

日本語

iCare HOME2

iCare HOME2  
クイックガイド

クイックガイド

icare



眼圧計をご使用になる前に、このクイックガイドを読み、HOME2取扱説明ビデオをご覧ください。手順に沿ってご使用を開始してください。



安全情報については、眼圧計を使用する前に、取扱説明書の第1章をお読みください。

iCare HOME2の眼圧計の使用に関してサポートが必要な場合は、医療従事者にお問い合わせください。



**注意!**測定を行う前に、眼圧計の設定から手動で時刻を設定してください。または、眼圧計をiCare PATIENT2アプリまたはiCare EXPORTソフトウェアに接続すると、自動的に時刻が更新されます。




## ステップ


## ページ

1	電池を挿入する	5
2	プローブを装填する	6
3	電源を入れる	8
4	測定位置を調節する	9
5	額あて・頬あての調整と眼圧計の位置を決める	10
6	眼圧を測定する	12
7	仰向けでの眼圧測定	14
8	トラブルシューティング	16
9	眼圧計の電源を切りプローブを処分する	18


## 各部名称

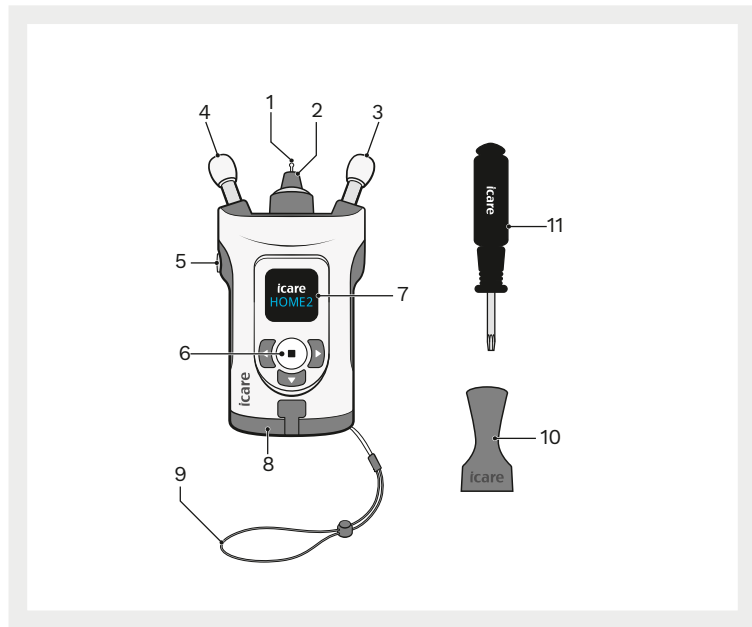


- 1 プローブ
- 2 プローブベース
- 3 頬あて
- 4 額あて
- 5 測定ボタン
- 6 セレクトボタン
- 7 ディスプレイ
- 8 電池カバー
- 9 リストストラップ
- 10 プローブアプリケーター
- 11 トルクスドライバーTX8

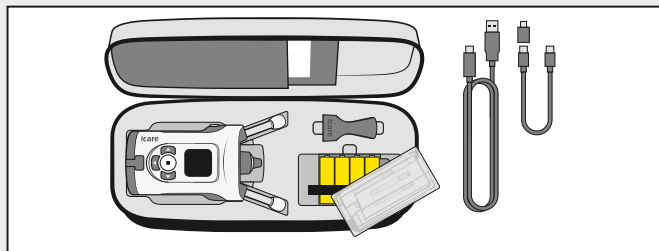


電池は、キャリングケース内のプローブの下に収納されています。

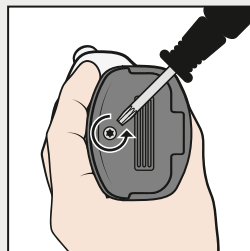


ドライバーで電池カバーを開きます。

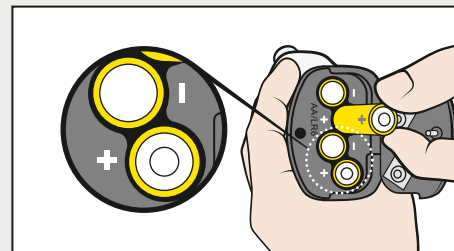


電池を挿入してカバーを閉じます。

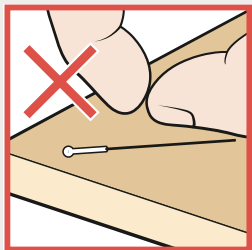


手やテーブル、その他滅菌されていないものに触れたプローブは使用しないでください。

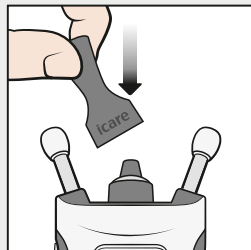

プローブアPLICエーターをプローブベースの上に置きます。

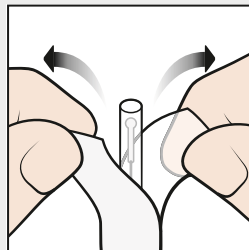


プローブのパッケージを開きます。

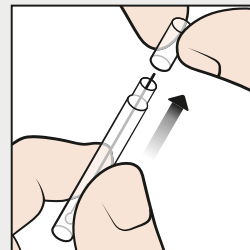


キャップを取り外します。





**警告!** 汚染を防ぐために、未使用のプローブは箱の中に保存してください。むき出しの状態のプローブに触れないでください。プローブがテーブルや床などの無滅菌のものに触れた場合は、使用しないでください。

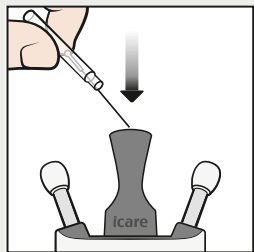

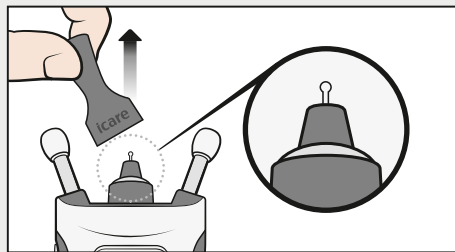


プローブ容器からプローブアプリーケーターへプローブを入れます。

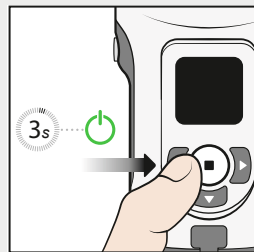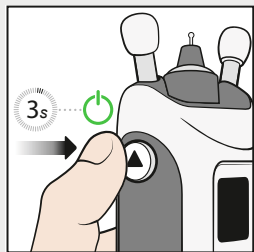


プローブアプリーケーターを外します。




ビープ音が聞こえるまで  を押し続けます。ディスプレイに「開始」と表示されます。

または、ビープ音が聞こえるまで、 を押し続けます。次に、 をもう一度押すと、測定モードになります。ディスプレイに「開始」と表示されます。




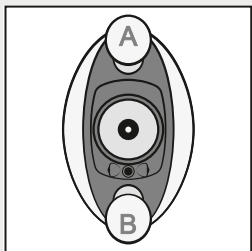

額あて A を額に当て、頬あて B を頬に当てます。



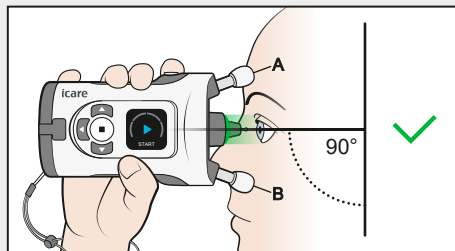


まっすぐ前を見て、眼圧計が顔に対して90度の角度になるようにします。この時プローブを眼から約5mmの距離にして、眼の中心に対して垂直になるように向けます。

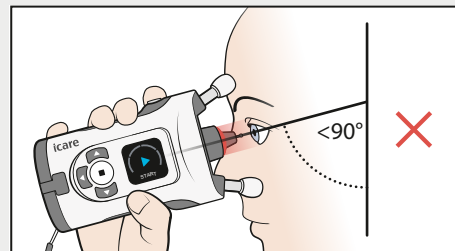

プローブベースのランプが赤く点灯している場合 眼圧計が下向きに傾きすぎています。姿勢を正し、あごを上げてください。

次の指示にしたがって眼圧計の位置を決めてください。

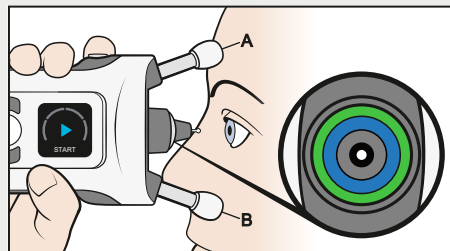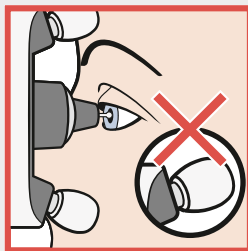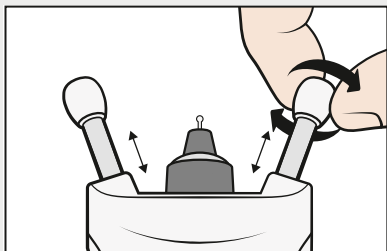


測定前に、額あてと頬あてを正しい距離に調節します。額あてと頬あての調節は長さを最大にしてから始めます。

眼圧計が眼に近づきすぎないように、額あてと頬あてのダイヤルは少しずつ調節してください。


眼圧計を顔に当て、プローブベースを覗き込みます。プローブベースのランプで、青色と緑色のリングが対称になっている場合、プローブは眼の中心に対して垂直になっています。




**警告!**眼に接触してよいのはプローブのみです。眼圧計の他の部分が眼に触れないようにしてください。眼圧計で眼を突かないでください。

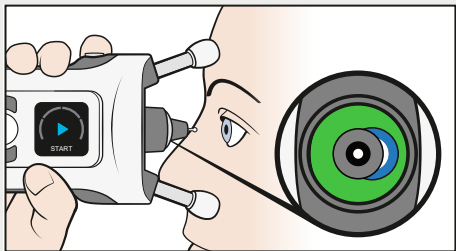




リングが対称になっていない場合、プローブは眼の中心に対して垂直になっていません。眼圧計の位置を修正してください。

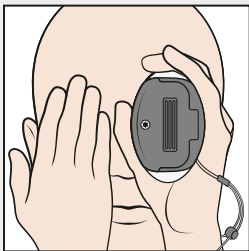

両眼は開けたままにしてください。測定しない方の眼を覆うと、リングがよりくっきり見える場合があります。

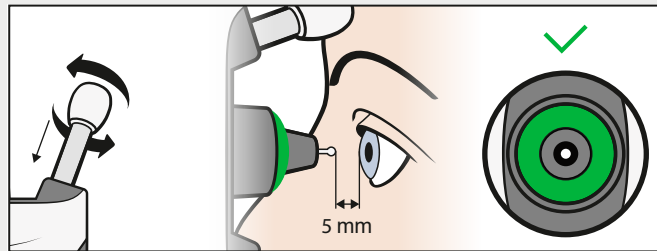


緑色のリングが対称に見えるまで、ダイヤルを1度に2回ずつ時計回りに回転させ、位置を調節します。これで、眼圧計は眼から適切な距離になります。

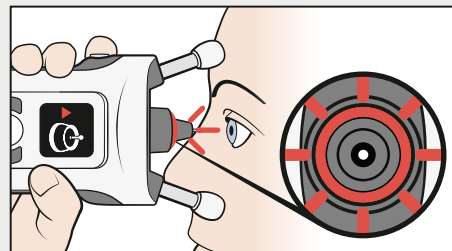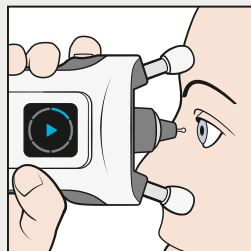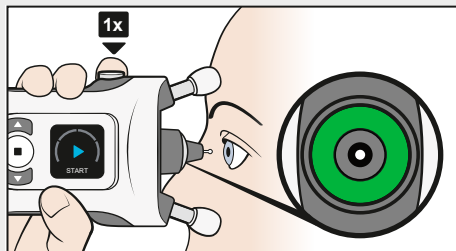

リングが緑色だけになり、かつ左右対称に見えたら測定を開始します。「測定」ボタン(▶)を1度押します。プローブは、眼に優しく接触します。


測定が正常に完了した場合は、ビープ音が1回鳴ります。長いビープ音が聞こえ、プローブベースのライトが消えるまで、測定を継続します。

プローブベースのランプが赤く点滅し、ビープ音が複数回聞こえた場合、測定が正常に行われていません。16ページの**トラブルシューティング**を参照してください。

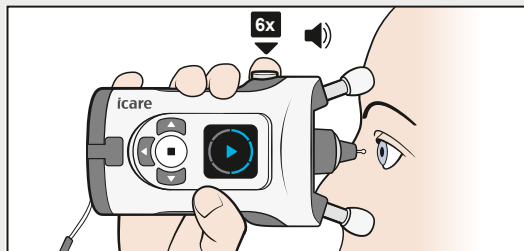


6回の測定を1セットとします。


**ヒント:**6回の測定がすべて完了するまで測定ボタン▶️を押し続けて、連続して測定を行うこともできます。

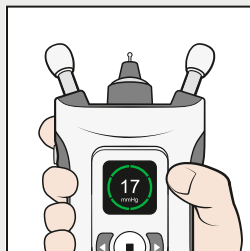


6回の測定がすべて正常に行われると、長いビープ音が鳴ります。プローブベースのランプが消え、ディスプレイに結果が表示されます。

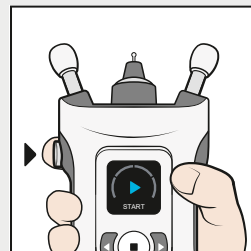


測定ボタン▶️を1回押して、もう一方の眼で測定を繰り返します。

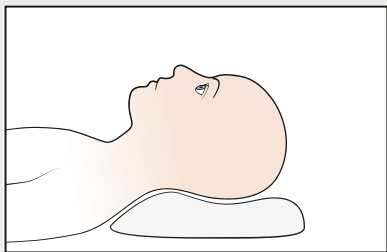


測定する前に、しばらく横になってください。

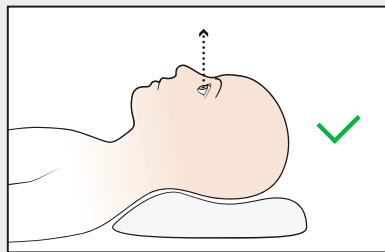


首の後ろに枕を置いて楽な体勢を取ってください。まっすぐ前を見てください。

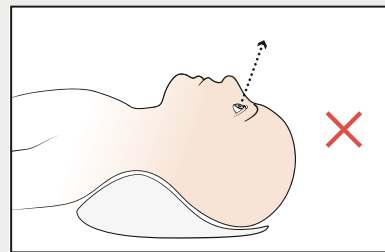


頭を後ろ向きに曲げないようにしてください。

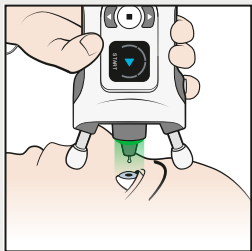

眼圧計を顔に対して90度の向きに当て、「6眼圧を測定する」で示されているように測定を行います。

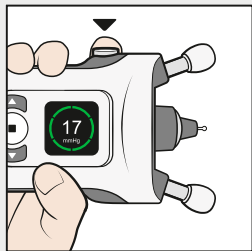



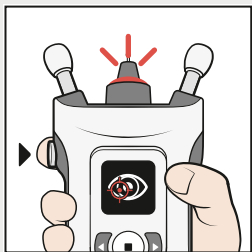














測定が正常に完了したら、測定ボタン▶を1度押して、もう一方の眼で測定を繰り返します。





エラーが発生すると、プローブベースのランプは赤色に点滅します。ディスプレイとビープ音でエラーの原因を知らせます。


ディスプレイを確認したら、測定ボタン (▶) を1度押し、必要な対処を行った後、測定を繰り返します。

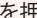

画面	テキスト	音	原因	対処法
	遠すぎます	長く3回 	プローブが眼から遠すぎます。	測定ボタン  を1度押して、エラーを確認します。額あてと頬あてを短くします。
	近すぎます	短く5回 	プローブが眼に近すぎます。	測定ボタン  を1度押して、エラーを確認します。額あてと頬あてを長くします。
	アライメントエラー	短く2回 	プローブが角膜に対して垂直にならなかったかまぶたかまつげに触れていました。	測定ボタン  を1度押して、エラーを確認します。プローブが眼の中心に向き、角膜の表面に対し垂直になるように眼圧計を保持して下さい。眼はしっかりと開けてください。
	再測定	短く2回 	プローブの動きに問題がありました。	測定ボタン  を1度押して、エラーを確認します。測定を繰り返します。
	検出エラー	短く2回 	センサーが測定した眼(右または左)を識別できませんでした。	 を押してから、正しい眼(右または左)がディスプレイに表示されるまで  を押します。  を押すか、キャンセルボタンを押して測定をキャンセルします。

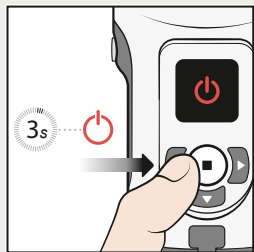


ビープ音が3回鳴り、画面の表示が消えるまで、セレクトボタン  を長押しします。

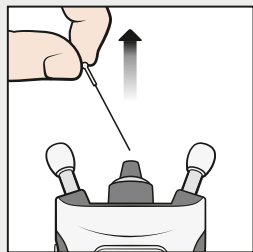

プローブを取り外し、プローブ容器に戻します。



プローブと容器は適正に処分してください。

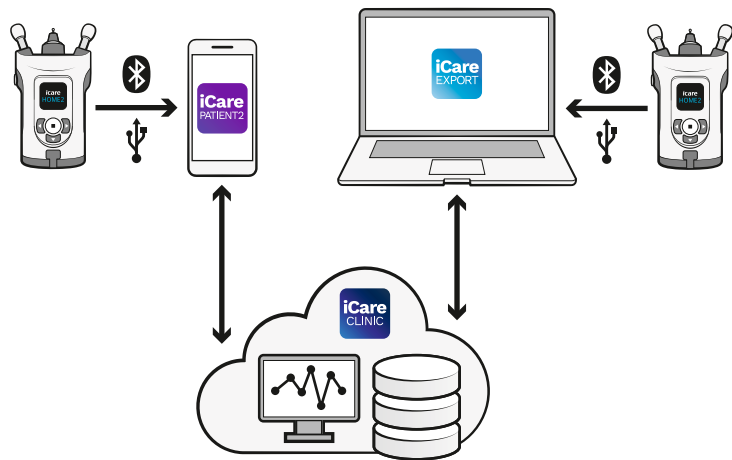

測定データはお使いのスマートフォンの iCare PATIENT2 またはコンピューターの iCare EXPORT ソフトウェアを使用して、医師の iCare CLINIC または iCare CLOUD のプライベートアカウントに転送できます。



## Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

電話番号 +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



詳細については、  
取扱説明書をご参照ください。



[www.icare-world.com](http://www.icare-world.com)

# icare

iCareはIcare Finland Oyの登録商標です。Icare Finland Oy、Icare USA, Inc.、iCare World Australia Pty Ltd、および Centervue S.p.A.は Revenio Group の一員であり、ブランド iCare を代表しています。  
製品、付属品、サービスまたは提供内容のすべてが、すべての市場で承認または提供されているわけではありません。また承認されたラベルと指示は、国によって異なる場合があります。製品の仕様は、継続的な技術開発の結果により、設計及び提供内容が変更される場合があります。