

Magyar

**iCare** HOME2

**iCare HOME2**  
Rövid útmutató

Rövid útmutató

**icare**



A tonométer használata előtt olvassa el ezt a gyors használati útmutatót, és tekintse meg a HOME2 felhasználói oktatóvideóját. Kövesse az utasításokat lépésről lépésre.



A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatásért a tonométer használata előtt olvassa el a használati útmutató 1. fejezetét.

Ha segítségre van szüksége az iCare HOME2 tonométer használatához, forduljon az Önt ellátó egészségügyi szakemberhez.



**FIGYELEM!** A mérések megkezdése előtt manuálisan frissítse a tonométer idejét a helyi időre a tonométer beállításai között, vagy frissítse automatikusan úgy, hogy a tonométert az iCare PATIENT2 alkalmazáshoz vagy az iCare EXPORT szoftverhez csatlakoztatja.




## Lépés


## Oldalszám

<b>1</b>	Elemek behelyezése	5
<b>2</b>	A szonda behelyezése	6
<b>3</b>	Bekapcsolás	7
<b>4</b>	Megfelelő mérési pozíció	8
<b>5</b>	A támaszok beállítása és a tonométer pozicionálása	9
<b>6</b>	Szemnyomásmérés	11
<b>7</b>	A szemnyomás mérése fekvő helyzetben	13
<b>8</b>	Hibaelhárítás	15
<b>9</b>	A tonométer kikapcsolása és a szonda ártalmatlanítása	17


## A tonométer részei

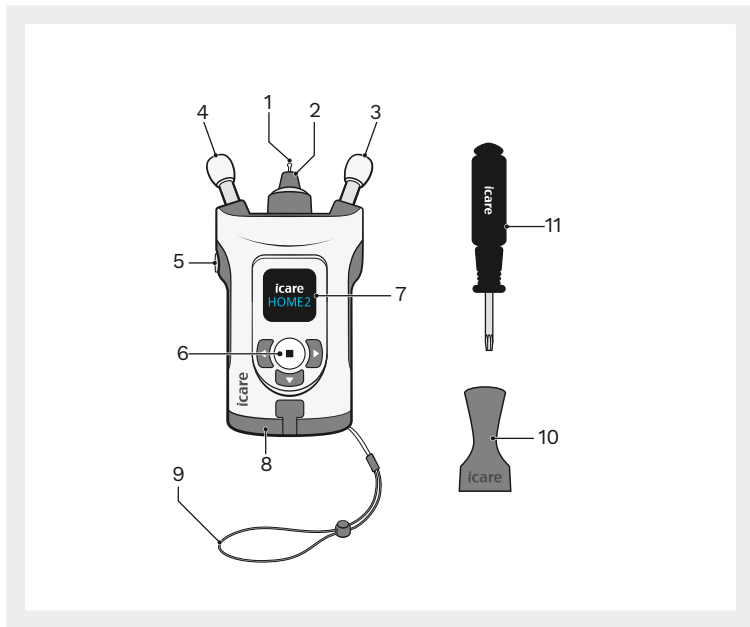


- 1 Szonda
- 2 Szonda befogó
- 3 Arctámasz
- 4 Homloktámasz
- 5 Mérés gomb
- 6 Kiválasztás gomb
- 7 Kijelző
- 8 Elemtartó rekesz fedele
- 9 Csuklópánt
- 10 Szondabevezető segédeszköz
- 11 Torx csavarhúzó TX8

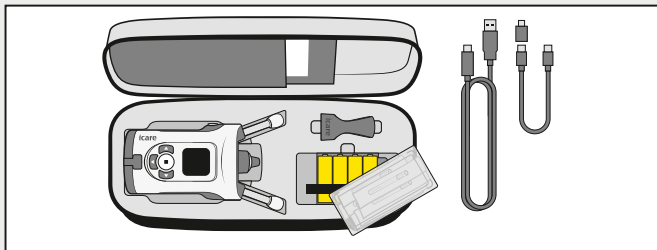


Az elemek a tonométer hordozótáskájában található a szondák doboza alatt.

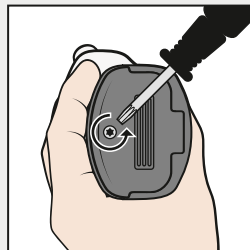


A csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

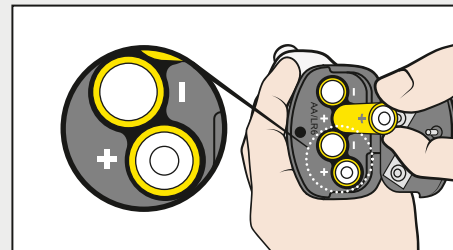


Helyezze be az elemeket, és zárja le a fedelet.

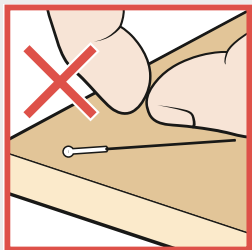


Ne használja a szondát, ha az hozzáért a kezéhez, az asztalhoz vagy más nem steril felülethez.

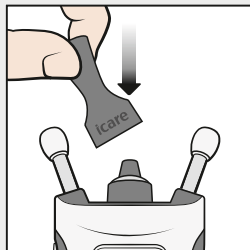

Tegye a szondabevezető segédeszközt a szondabefogó egységre.

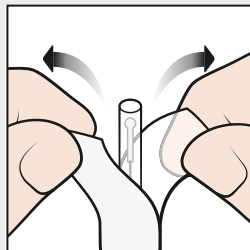


Bontsa ki a csomagolást.

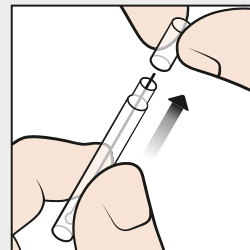


Távolítsa el a kupakot.





**VIGYÁZAT!** A szennyeződés megelőzése érdekében tartsa a fel nem használt szondákat a dobozukban. Ne érintse meg a csupasz szondát. Ne használja a szondát, ha az nem steril felülethez, például asztalhoz vagy padlóhoz ért.

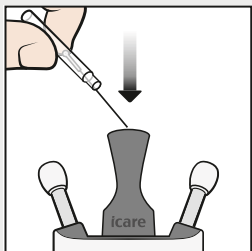

Ejtse a szondát  
a tartójából a  
szondabevezető  
segédeszközre.

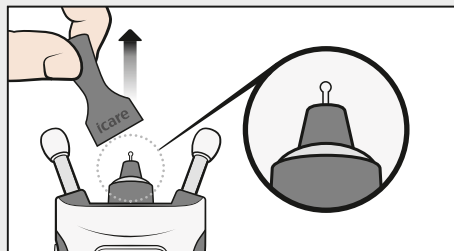


Vegye le a szondabevezető  
segédeszközt.

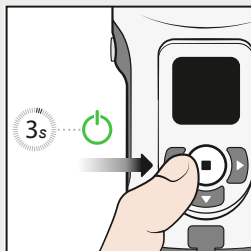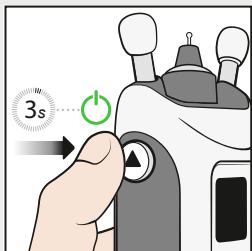


Nyomja addig a ► gombot, amíg hangjelzést nem hall. A kijelzőn a „Start” (Kezdés) felirat jelenik meg.

Másik lehetőségként nyomja addig a ◻ gombot, amíg hangjelzést nem hall. Ezután nyomja meg ismét a ◻ gombot a mérési üzemmódba lépéshez. A kijelzőn a „Start” (Kezdés) felirat jelenik meg.




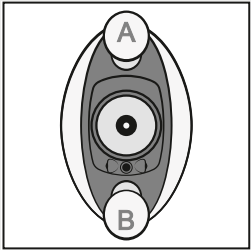

Az A homloktámasz a homlokán, a B arctámasz pedig az arcán nyugszik.



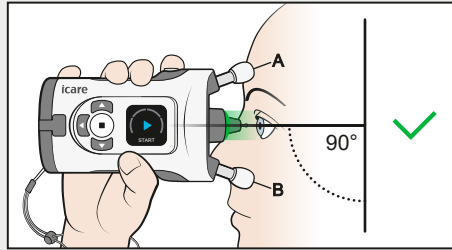


Nézzen egyenesen előre, és a tonométer 90 fokos szöget zárjon be az arcával. A szonda körülbelül 5 mm-re legyen a szemétől, és merőlegesen a szeme közepére mutasson.

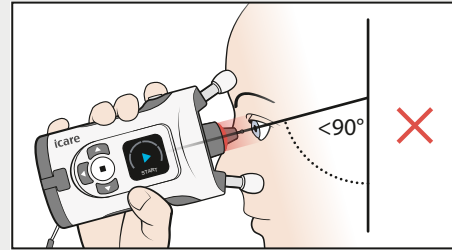

Ha a szondabefogó egység piros színnel világít, akkor a tonométer túlságosan lefelé dől. Egyenesedjen ki, és emelje fel az állát.

A tonométer pozicionálását a következő részben ismertetjük.

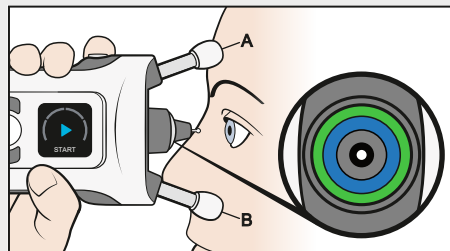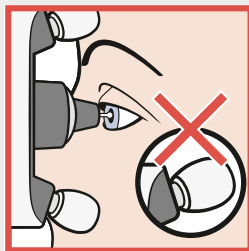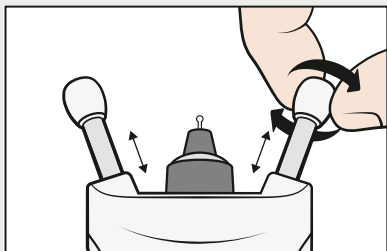


A mérés előtt a homloktámaszt és az arctámaszt állítsa be a megfelelő hosszúságra. Kezdje a beállítást úgy, hogy a támaszokat a lehető legnagyobb hosszra engedi ki.

Egyszerre csak két kattatásnyival csökkentse a hosszt, nehogy a tonométer túl közel kerüljön a szeméhez.


Helyezze a tonométert az arcához, és nézzen a szondabefogó egységbe. A szonda merőlegesen a szeme közepére mutat, ha a szondabefogó egység kék és zöld gyűrűje szimmetrikus.




**VIGYÁZAT!** Csak a szonda érhet a szemhez. Ne érintse meg a szemét a tonométer többi részével. Ne érjen hozzá a tonométer a szeméhez.

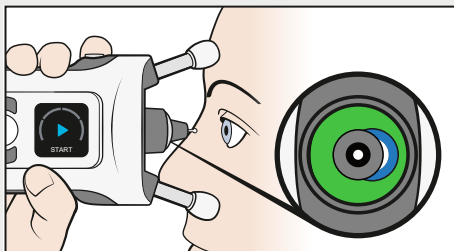




Ha a gyűrűk nem szimmetrikusak, a szonda nem merőlegesen mutat a szeme közepére. Pozícionálja megfelelően a tonométert.

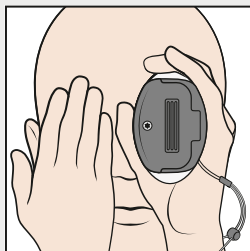

Tartsa nyitva mindkét szemét. Segíthet tisztábban látni a gyűrűket, ha a nem vizsgált szemét letakarja.

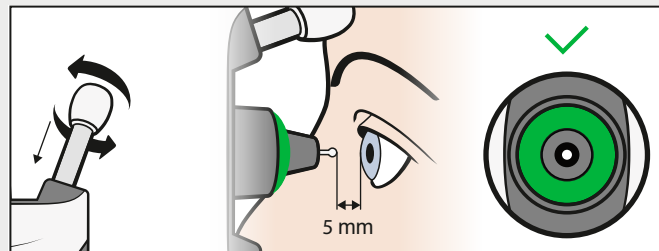


Csökkentse a támaszok hosszát úgy, hogy egyszerre két kattánással az óramutató járásával megegyező irányban forgatja őket, amíg csak egy szimmetrikus zöld gyűrűt lát. A tonométer most már megfelelő távolságra van a szemétől.

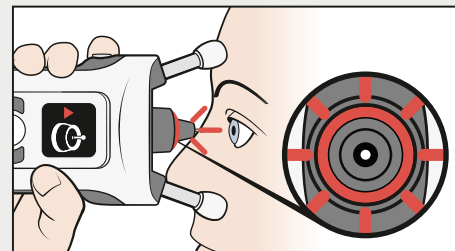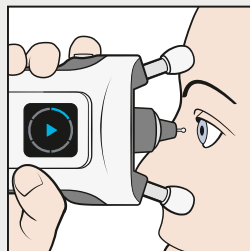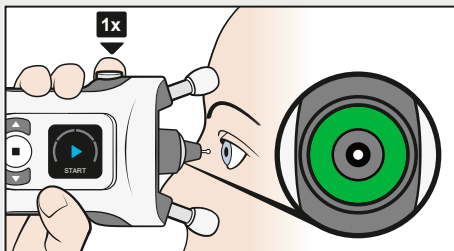

Indítsa el a mérést, ha csak egy szimmetrikus zöld gyűrűt lát. Nyomja meg egyszer a Mérés gombot (▶). A szonda finoman a szeméhez ér.


A sikeres mérést egyszeri hangjelzés jelzi. Folytassa a mérési folyamatot, amíg hosszú hangjelzést hall és a szondabefogó egység jelzőfénye kialszik.

Ha a szondabefogó egység pirosan villog, és többszöri hangjelzést hall, a mérés sikertelen volt. Lásd a **Hibaelhárítás** című részt a 17. oldalon.

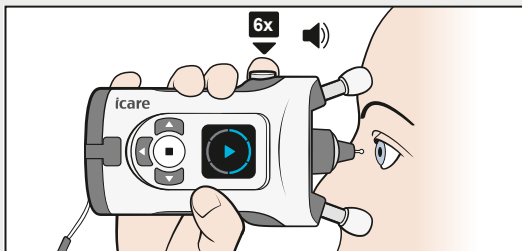


A méréssorozat hat mérésből áll.


**Tipp:** A méréssorozat úgy is elvégezhető, hogy addig lenyomva tartja a Mérés (▶) gombot, amíg mind a hat mérést el nem végezte a készülék.

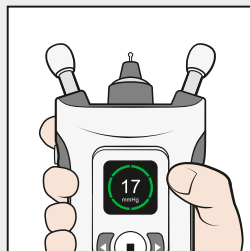


Ha mind a hat mérés sikeresen elkészült, egy hosszabb hangjelzést fog hallani, a szondabefogó egység jelzőfénye kialszik, az eredmény pedig megjelenik a kijelzőn.

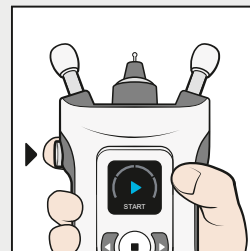


Nyomja meg egyszer a Mérés gombot (▶), és ismételje meg a mérést a másik szemén.

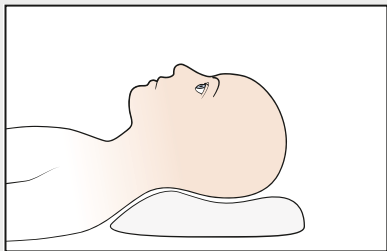


A mérés előtt feküdjön le egy pillanatra.

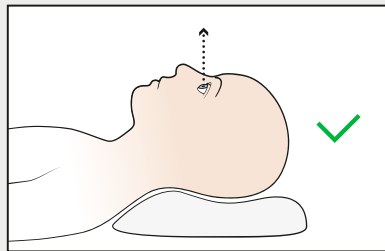


Kényelmesen helyezkedjen el a hátán, a nyaka alá párnát téve. Nézzon egyenesen előre.

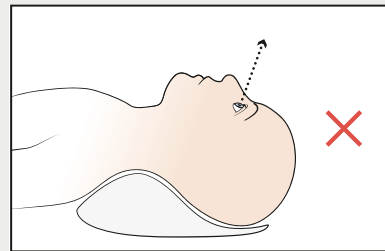


Ne hajtsa hátra a fejét.

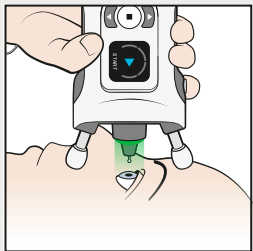

Helyezze a tonométert 90 fokos szögben az arcára, és végezze el a mérést a korábbi utasítások szerint.

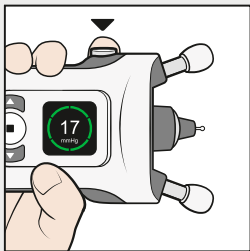



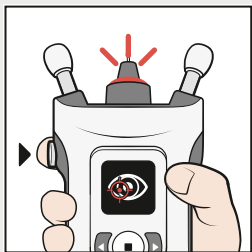














A sikeres mérést követően nyomja meg egyszer a Mérés gombot (▶), és ismétlje meg a mérést a másik szemén.





Hiba esetén a szondabefogó egység pirosan villog.  
A kijelző és a hangok jelzik a hiba forrását.


Nézze meg a kijelzőt, nyomja meg egyszer a Mérés  
▶ gombot, végezze el a szükséges hibaelhárítást,  
majd ismétlje meg a mérést.



Ikon	Kijelzőn megjelenő szöveg	Hangjelzés	Probléma	Megoldás
	<b>TOO FAR (TÚL MESSZE)</b>	3 hosszú 	A szonda túl messze van a szemtől.	A hiba nyugtázásához nyomja meg egyszer a Mérés  gombot. Csökkentse a homloktámasz és az arctámasz hosszát.
	<b>TOO NEAR (TÚL KÖZEL)</b>	5 rövid 	A szonda túl közel van a szemhez.	A hiba nyugtázásához nyomja meg egyszer a Mérés  gombot. Növelje a homloktámasz és az arctámasz hosszát.
	<b>INCORRECT ALIGNMENT (HELYTELEN POZICIONÁLÁS)</b>	2 rövid 	A szonda nem volt merőleges a szaruhártyára, vagy a szonda a szemhéjjal vagy a szempillával érintkezett.	A hiba nyugtázásához nyomja meg egyszer a Mérés  gombot. Igazítsa a tonométert úgy, hogy a szonda merőlegesen a szeme közepére mutasson. Nyissa kellően nagyra a szemét.
	<b>REPEAT (ISMÉTLÉS)</b>	2 rövid 	A szonda mozgásával kapcsolatos probléma adódott.	A hiba nyugtázásához nyomja meg egyszer a Mérés  gombot. Ismételje meg a mérést.
	<b>DETECTION ERROR (ÉSZLELÉSI HIBA)</b>	2 rövid 	Az érzékelő nem tudta azonosítani a mért szemet (jobb vagy bal).	Nyomja addig a  , majd a  gombot, amíg a megfelelő szem (jobb vagy bal) meg nem jelenik a kijelzőn. A mérés törléséhez nyomja meg a  vagy a vissza gombot.

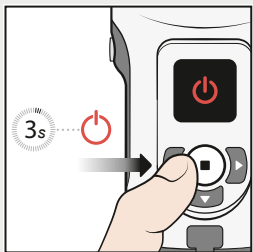


Nyomja meg és tartsa lenyomva addig a Kiválasztás  gombot, amíg 3 hangjelzést nem hall, és a kijelző ki nem kapcsol.

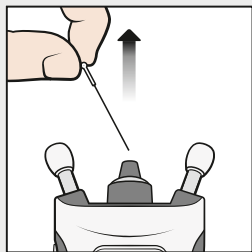

Vegye ki a szondát, és helyezze vissza a szondatartóba.



Dobja a szondát és a szondatartót a vegyeshulladékgyűjtőbe.

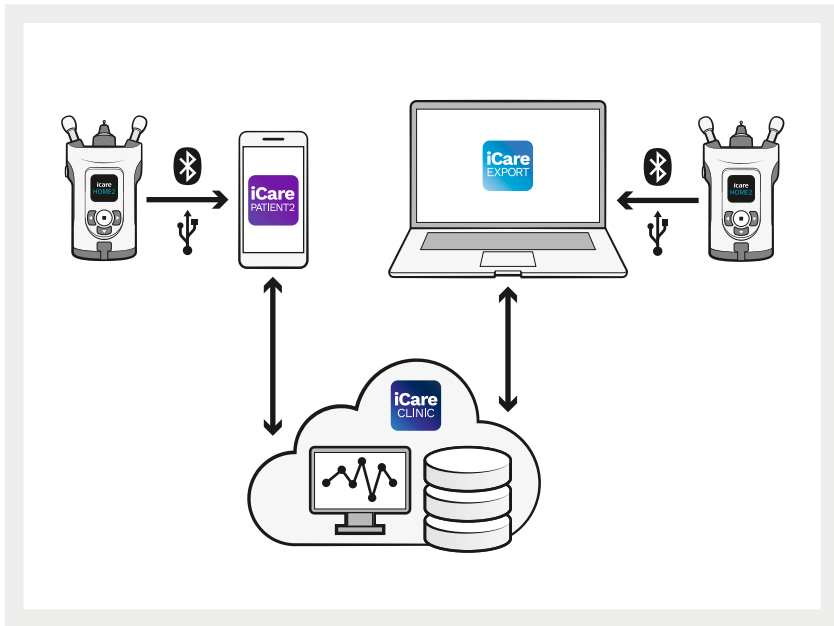

Most már a mobilszközén lévő iCare PATIENT2 alkalmazás vagy a számítógépen futó iCare EXPORT program segítségével továbbíthatja mérési eredményeit orvosa iCare CLINIC-jére vagy az iCare CLOUD szolgáltatásban regisztrált saját fiókjába.



## Icare Finland Oy

Äyritie 22

FI-01510 Vantaa, Finnország

Tel.: +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



További információért  
olvassa el a használati útmutatót.



[www.icare-world.com](http://www.icare-world.com)

# icare

Az iCare a Icare Finland Oy bejegyzett védjegye. Az Icare Finland Oy, az Icare USA, Inc., az Icare World Australia Pty Ltd. és a Centervue S.p.A. a Revenio Group részei és az iCare márkát képviselik.

A jelen tájékoztatóban szereplő termékek, tartozékok, szolgáltatások és ajánlatok közül nem mindegyik engedélyezett, illetve forgalmazott minden piacon, és a jóváhagyott címkézés és utasítások országonként eltérőek lehetnek. A termékek műszaki jellemzői a tervezés és a kiszállított csomag tartalma szerint, valamint a folyamatos műszaki fejlesztések következtében változhatnak.