



スタートガイド

iCare HOME2 – スタートガイド

この度は、自己眼圧測定用のiCare HOME2眼圧計をご購入いただきありがとうございます。iCare HOME2眼圧計は、患者が自宅で眼圧を測定するために設計されています。iCare HOME2眼圧計は、昼夜を問わず眼圧の変化をモニタリングすることで、緑内障ケアに革命をもたらします。

iCareソフトウェアは、眼圧の測定結果をグラフを用いて包括的に表示します。測定結果は、スマートフォンやウェブブラウザで簡単にアクセスできます。iCare HOME2眼圧計は、単独でも使用できます。眼圧計は、過去 100 回分の測定結果を表示することが可能です。

iCare HOME2眼圧計およびiCareソフトウェアの使用開始にあたって

1. このガイドの第 1 章の指示に従って、眼圧計の言語、日付、時刻を設定してください。これにより、眼圧の測定結果が、正しい現地時間と共に保存されます。
2. iCare HOME2眼圧計での測定方法は、iCare HOME2眼圧計 操作ガイドの手順に従ってください。眼圧計のキャリングケースに付属のUSBスティックに保存されているトレーニングビデオもご参照ください。
3. 患者の方へ - iCareソフトウェアでiCare HOME2眼圧計を使用するには、このガイドの第2章と第3章の手順に従ってください。
4. 医療従事者の方へ - iCareソフトウェアでiCare HOME2眼圧計を使用するには、このガイドの第 2 章と第 4 章の手順に従ってください。










iCare HOME2眼圧計とiCareソフトウェアの取扱説明書およびクイックガイドは、iCare HOME2眼圧計のプロダクトパッケージに同梱されています。

何かご不明な点がありましたら、販売店または医療従事者までお問い合わせください。









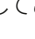





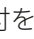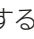


1 言語、日付、時刻の設定




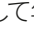

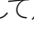


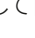


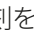



1.1 言語の設定


1. を長押しして、眼圧計のスイッチを入れます。
2. を押して**設定**を表示します。
3. を押します。
4. またはを押して**言語**を表示します。
5. を押します。
6. またはを押してご希望の言語を選択し、を押します。

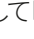1.2 日付の設定

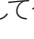7. 日付を変更するには、またはを押して**日付**を選択します。
8. を押します。
9. またはを押して日付形式を選択し、で決定します。
10. またはを押して年を選択し、で決定します。
11. またはを押して月を選択し、で決定します。
12. またはを押して日を選択し、で決定します。

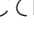1.3 時刻の設定

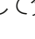13. 時刻を変更するにはまたはを押して時刻を選択します。
14. を押します。
15. またはを押して時刻形式を選択し、で決定します。
16. またはを押してタイムゾーンを選択し、で決定します。
17. またはを押して時間を選択し、で決定します。
18. またはを押して分を選択し、で決定します。

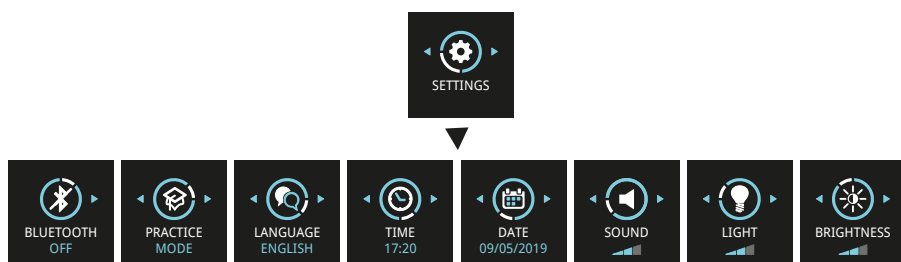


2 iCareソフトウェアシステム

iCare ソフトウェアシステムは、以下から構成されています。

- iCare HOME 2
自己測定用の眼圧計
- iCare CLINIC
医療従事者と患者が測定データを閲覧できるブラウザベースのソフトウェアサービス。
- iCare CLOUD
HOME2の測定結果を保存するために、患者のプライベートアカウントを作成するサービス。
- iCare PATIENT2
患者が測定データを閲覧し、iCare CLINICやiCare CLOUDにデータを転送できるモバイルアプリケーション。
- iCare EXPORT
測定データを閲覧し、iCare CLINICやiCare CLOUDにデータを転送できる、Windows OS用のソフトウェア。

注意! iCare HOME2 眼圧計は、iCare CLINIC または iCare CLOUD のいずれかに接続できますが、両方には接続できません。眼圧計が医療従事者の iCare CLINIC アカウントに登録されていない場合、患者は眼圧測定データを iCare CLOUD のプライベートアカウントに保存できます。

iCare HOME2 使用モデル

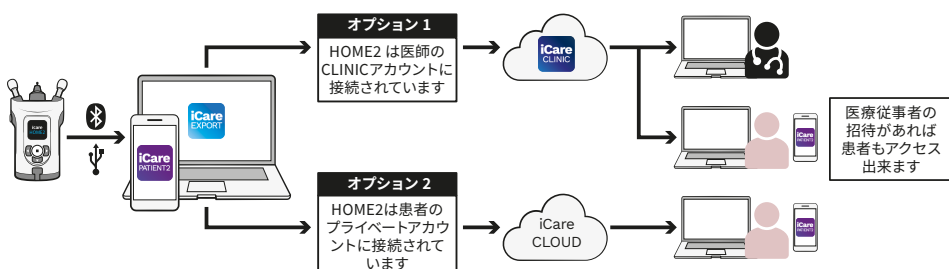

3 患者向け

iCare HOME2の登録とiCareソフトウェアの使用開始にあたって

iCare HOME2の測定結果をスマートフォンやWebブラウザでご覧いただくには、iCare HOME2眼圧計の登録が必要です。

- iCare CLINIC
- iCare CLOUDのプライベートアカウント

登録可能なiCare CLINICアカウントを持っているかについては、医療従事者にご相談ください。iCare HOME2がiCare CLINICアカウントに登録されると、医療従事者は患者のアクセスを許可することが出来ます。これらの測定結果は、iCare PATIENT2アプリ、またはWebブラウザからアクセスすることができます。

iCare HOME2 眼圧計が iCare CLINIC アカウントに登録されていない場合は、以下の手順に従って、iCare CLOUDのプライベートアカウントを設定してください。

1. **www.icare-world.com/cloud/registration/**へ移動します
2. まず、お住いの国を選択します。
3. 利用規約に同意の上、全てのチェックボックスをクリックしてチェックマークを入れ、メールアドレスを入力してください。
4. 登録したメールアドレスへメールが届きます。アクティベーションのリンクをクリックします。
5. パスワードを含め、ウェブページに必要な情報を入力して登録を完了してください。シリアル番号は、眼圧計の背面に記載されています。
6. 登録確認メールが届きます。メールには、iCare CLOUDアカウントにアクセスするためのURLが含まれています。
7. 同じiCare認証情報を使用して、iCare PATIENT2モバイルアプリにログインすることができます。

iCarePATIENT2アプリを使用するには、iCarePATIENT2およびEXPORTクイックガイドの手順に従ってください。

iCare EXPORT を使用するには、iCare PATIENT2およびEXPORTクイックガイドの手順に従ってください。iCare EXPORT ソフトウェアは **<https://www.icare-world.com/apps/export/>**からダウンロードできます。

iCare EXPORTはWindows OSで動作します。

iCare CLOUDの登録解除をご希望の場合は、**home-software-support@icare-world.com**へお問い合わせください。

4 医療従事者の方へ

iCareソフトウェアの使用開始にあたって

iCare CLINIC ソフトウェアは、iCare HOME および iCare HOME2 眼圧計の患者への貸し出しを管理し、眼圧の測定結果を表示、分析、報告するために使用することができます。

iCare CLINICの詳細については、**www.icare-world.com/product/icare-clinic-software/**をご覧ください

iCare CLINIC のご登録については、**<https://store.icare-world.com/>**をご覧ください。

iCare HOME2眼圧計をiCareCLINICに追加するには、iCare CLINIC、EXPORT、およびPATIENTの医療従事者向け取扱説明書の手順に従ってください。

また、iCare EXPORT ソフトウェアを使用して、眼圧の測定結果を閲覧することができます。また、表形式の簡易的な測定レポートの作成にも使用できます。

iCare EXPORT ソフトウェアは **<https://www.icare-world.com/apps/export/>**からダウンロードできます。

iCare CLINIC、EXPORT、およびPATIENTの医療従事者向け取扱説明書は、iCare HOME 2キャリングケース内のUSBに入っています。



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

電話 +358 0 9775 1150

info@icare-world.com



詳細については、取扱説明書をご参照ください。



www.icare-world.com

icare

iCare は Icare Finland Oy の登録商標です。Centervue S.p.A.、Icare Finland Oy、および Icare USA Inc. は Revenio Group の一員であり、ブランド iCare を代表しています。このパンフレットに記載の製品、サービス、または提供内容のすべてが、すべての市場で承認または提供されているわけではありません。また承認されたラベルと指示は、国によって異なる場合があります。製品の仕様は、継続的な技術開発の結果により、設計及び提供内容が変更される場合があります。