

日本語

iCare PATIENT2
iCare EXPORT



クイックガイド

Rx Only (U.S.)

icare

iCare PATIENT2 & EXPORT

モバイルおよびPCのクイックガイド



iCare PATIENT2 を使用する前に、このクイックガイドをお読みください。ステップごとに手順を実行します。

PATIENT2 アプリの使用についてサポートが必要な場合は、医療従事者または販売元にお問い合わせください。

Android 用 PATIENT2 クイックガイド

ステップ

ページ

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | iCare PATIENT2 の使用を開始する | 4 |
| 2 | Bluetoothで眼圧計をペアリングし、測定値を転送する | 5 |
| 3 | USBで眼圧計をペアリングし、測定値を転送する | 7 |
| 4 | ログイン | 8 |
| 5 | グラフ・テーブル機能 | 9 |

iOS 用 PATIENT 2 クイックガイド

ステップ

ページ

- | | | |
|---|-------------------------|----|
| 1 | iCare PATIENT2 の使用を開始する | 12 |
| 2 | 眼圧計をモバイル機器にペアリングする | 13 |
| 3 | 測定値の転送とログイン | 15 |
| 4 | グラフ・テーブル機能 | 17 |
| 5 | 眼圧計のBluetoothをオンにする | 19 |

Android 用 PATIENT2 クイックガイド

患者は、iCare PATIENT2 を使用して各自の眼圧測定値を閲覧、および結果を iCare CLINIC または iCare CLOUD に転送することができます。医療従事者は、iCare PATIENT2 を iCare CLINIC に眼圧測定値を転送するために使用できます。




iCare PATIENT2 がインストールされたモバイル機器の時間と日付が正しく設定されているか確認してください。



測定する前に、眼圧計の時刻を眼圧計の設定から手動で、または眼圧計を iCare PATIENT2 または iCare EXPORT に接続して自動で更新してください。



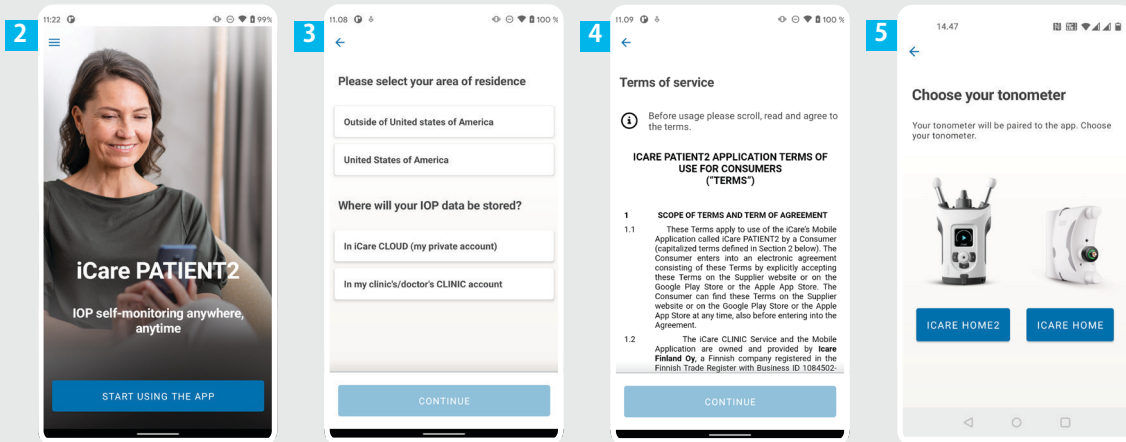

1 iCare PATIENT2 を Google Play からダウンロードします。



2 [アプリの使用を開始する] **START USING THE APP** ボタンを押します。

3 お住まいの地域を選択してください。眼圧データの保存先を選択します。


4 下にスクロールして利用規約を読み同意します。

5 眼圧計のモデルを選択してください。

Bluetoothで眼圧計をペアリングし、測定値を転送する




Android 用 | 5

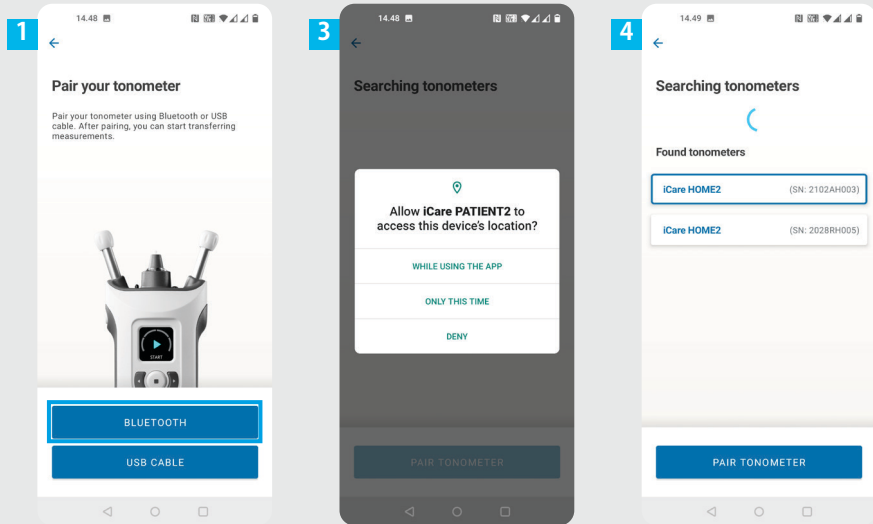

- 1 ペアリング方法を選択してください。
- 2 お使いのスマートフォンで「設定」に移動し、Bluetooth をオンに切り替えます。
- 3 眼圧計のBluetoothはデフォルトでオンです。そうでない場合は、「眼圧計のBluetoothをオンにする」の章を参照してください。ペアリングを続行するために、モバイル機器のプロンプトによる要求を許可します。
- 4 眼圧計のシリアル番号のある眼圧計をタップします。**PAIR TONOMETER** (眼圧計のペアリング) をタップします。

注記!以前にUSB ケーブルで眼圧計をペアリングしていて、Bluetoothを使用したい場合は、再度ペアリングする必要があります。

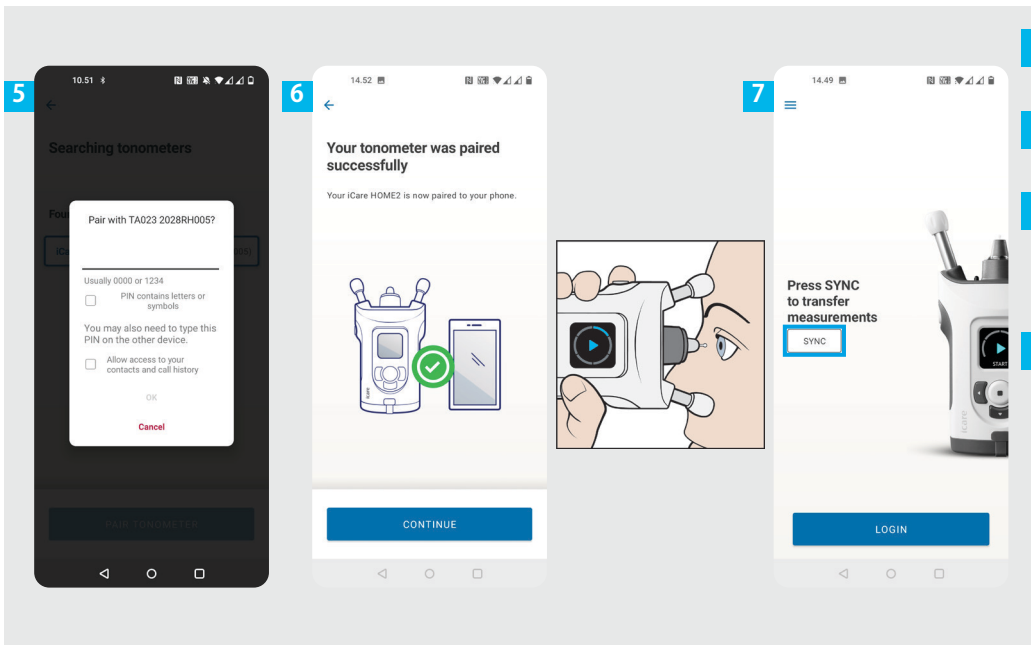


5 眼圧計に表示されるPINコードを入力します。**OK**をタップします。

6 これで、眼圧計はペアリングを完了しました。**CONTINUE** (継続)をタップします。

7 これで、アプリの使用を開始する準備が整いました。眼圧を測定した後、[同期] **SYNC**をタップすると、測定結果をクラウドに転送できます。


8 iCare 認証情報を求めるポップアップが表示された場合、ユーザー名およびパスワードまたは医療従事者から提供されたセキュリティコードを入力します。

iCare 認証情報の取得方法についての詳細は、「HOME2 スタートガイド」をご覧ください。

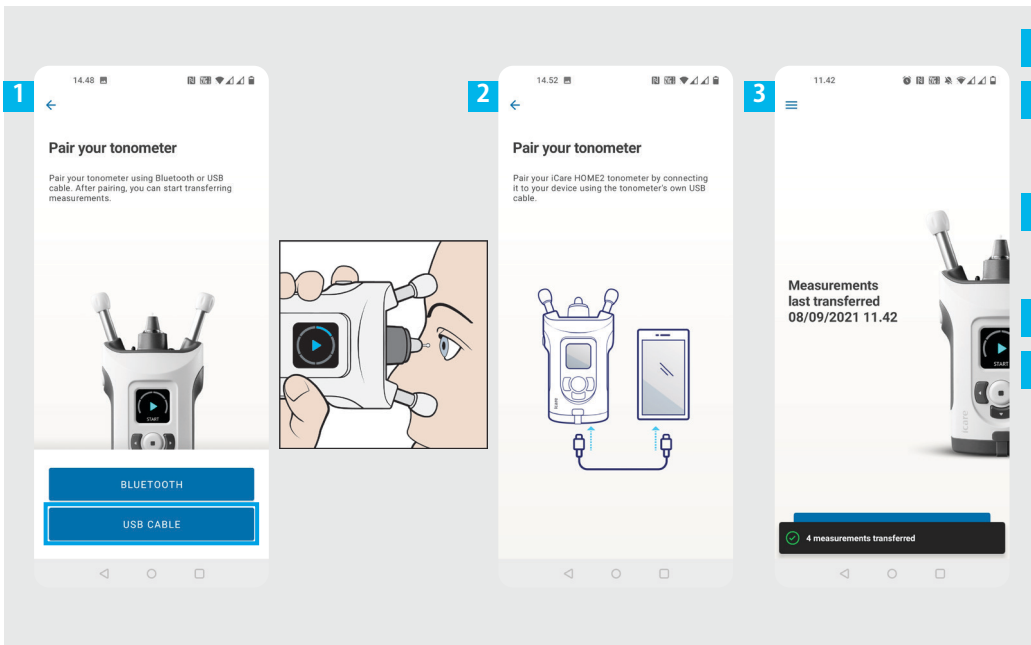

- 1 **USBケーブル** をタップします。
- 2 測定後、お使いの眼圧計を付属のUSBケーブルを使用して、モバイル機器に接続します。必要に応じて、付属のアダプターを使用してください。
- 3 iCare 認証情報を求めるポップアップが表示された場合、ユーザー名およびパスワードまたは医療従事者から提供されたセキュリティコードを入力します。
- 4 測定データは自動的に転送されます。
- 5 測定値の転送が完了したら、USBケーブルを外します。



iCare 認証情報の取得方法についての詳細は、「HOME2 スタートガイド」をご覧ください。


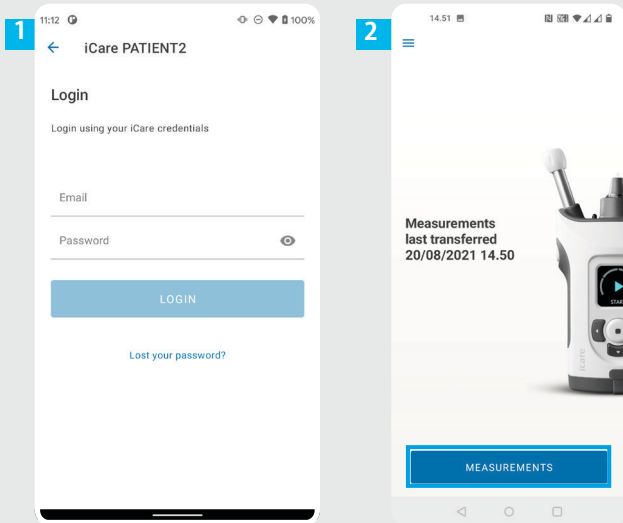


- 1 iCare 認証情報でログインします。
- 2 [測定] **MEASUREMENT** をタップして、眼圧測定値を表示します。

注記!iCare 認証情報の取得方法についての詳細は、眼圧計に付属の「スタートガイド」をご覧ください。

クラウドに保存されると、眼圧計のメモリから測定結果は消去されます。

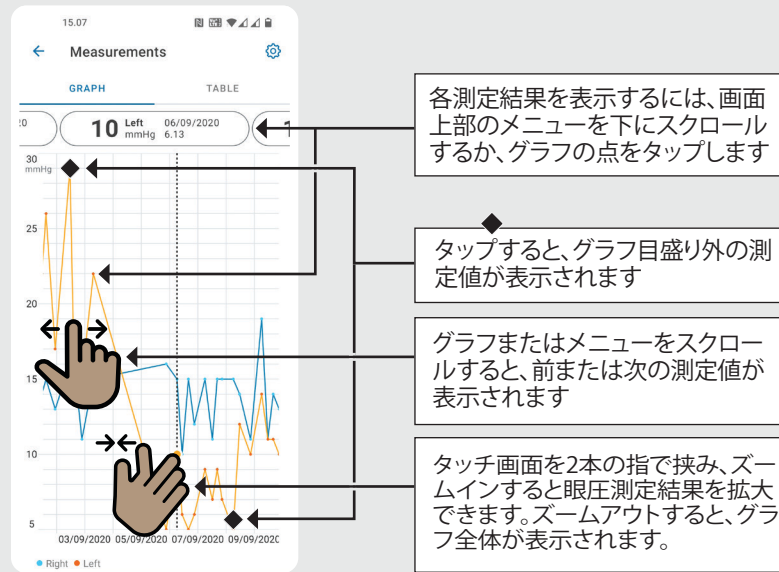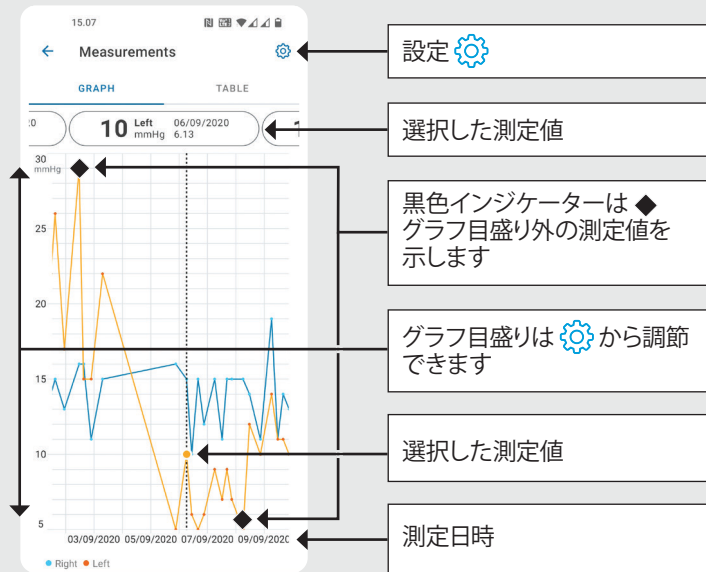

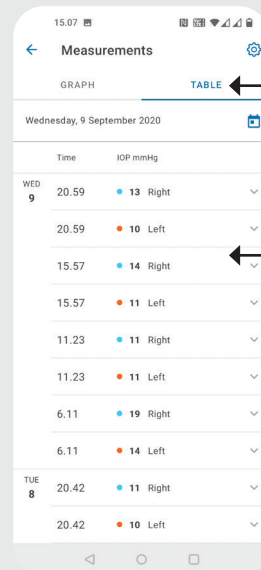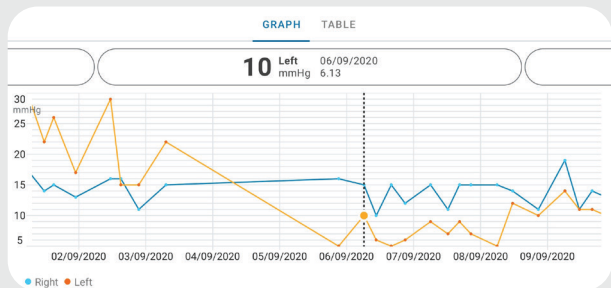

iOS 用 PATIENT 2 クイックガイド


患者は、iCare PATIENT2 を使用して各自の眼圧測定値を閲覧、および結果を iCare CLINIC または iCare CLOUD に転送することができます。医療従事者は、iCare PATIENT2 を iCare CLINIC に眼圧測定値を転送するために使用できます。






iCare PATIENT2 がインストールされたモバイル機器の時間と日付が正しく設定されているか確認してください。



測定する前に、眼圧計の時刻を眼圧計の設定から手動で、または眼圧計を iCare PATIENT2 または iCare EXPORT に接続して自動で更新してください。

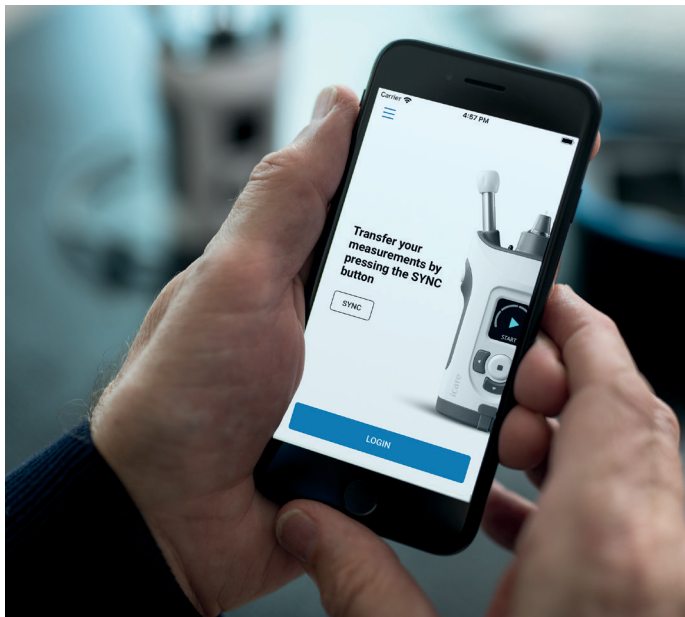

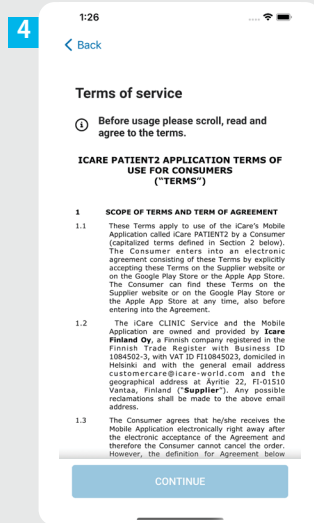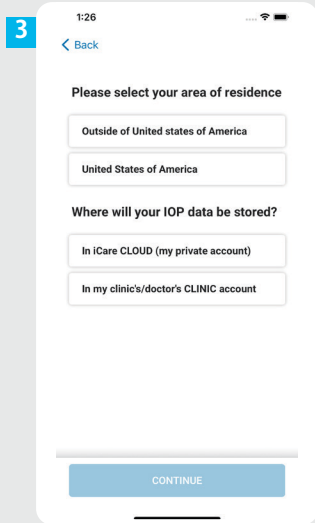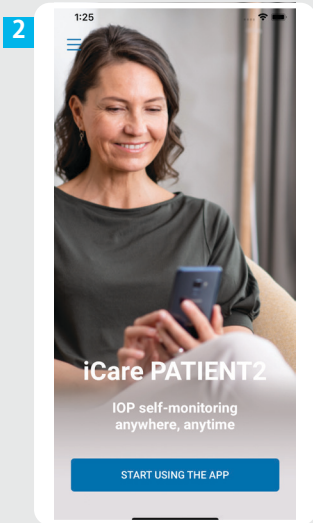


1 iCare PATIENT2 アプリを App Store からダウンロードします。






2 [アプリの使用を開始する] **START USING THE APP** ボタンを押します。

3 お住まいの地域を選択してください。眼圧データの保存先を選択します。



4 下にスクロールして利用規約を読み、同意します。

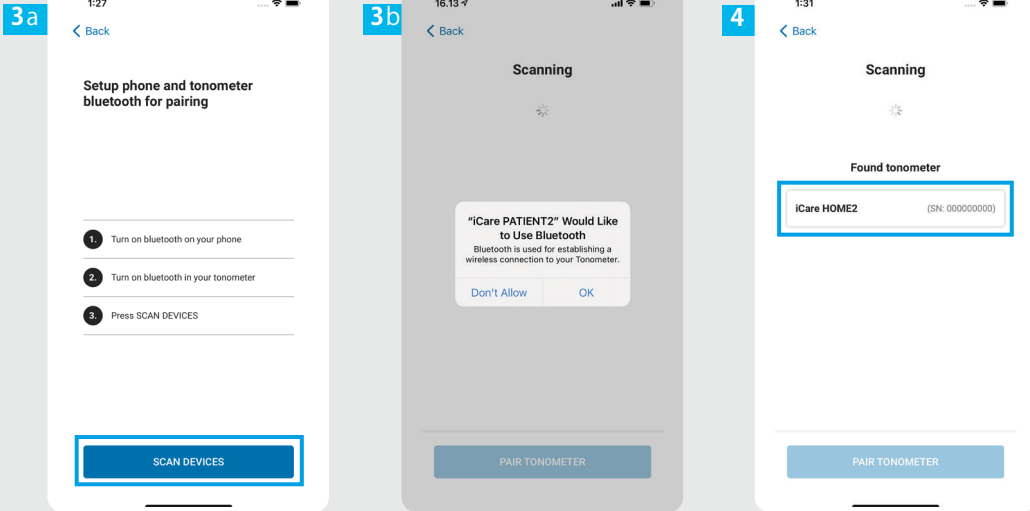

- 1 眼圧計のBluetoothはデフォルトでオンです。そうでない場合は、手順の「眼圧計のBluetoothをオンにする」の章を参照してください。
- 2 モバイル機器の設定から、Bluetoothをオンにします。
- 3 **SCAN DEVICES** (デバイスのスキャン)をタップします。アプリがBluetoothの使用許可を求めてきた場合は、[OK]をタップします。
- 4 シリアル番号のある眼圧計をタップします。
- 5 **PAIR TONOMETER** (眼圧計のペアリング)をタップします。

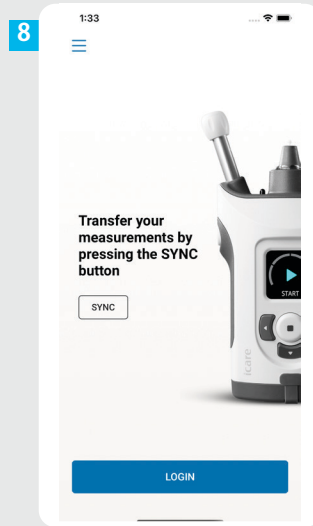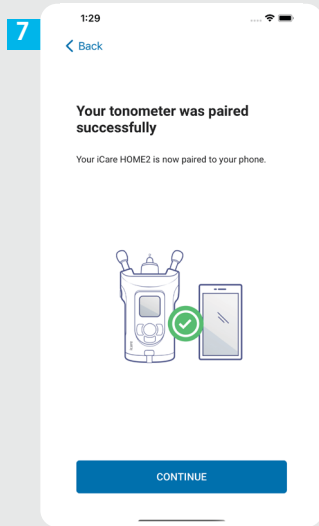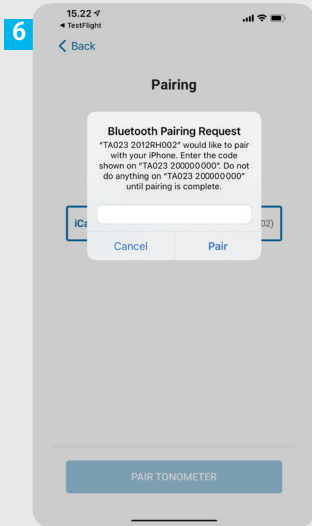


- 6 眼圧計に表示される PIN コードを入力します。**ペア** をタップします。
- 7 これで、眼圧計はペアリングを完了しました。**CONTINUE** (継続) をタップします。
- 8 これで、アプリの使用を開始する準備が整いました。

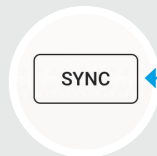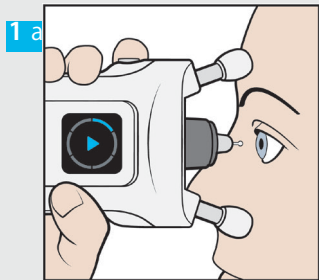

- 1 眼圧を測定した後、[同期] **SYNC** をタップすると、測定結果をクラウドに転送できます。
- 2 iCare 認証情報を求めるポップアップが表示された場合、ユーザー名およびパスワードまたは医療従事者から提供されたセキュリティコードを入力します。

iCare 認証情報の取得方法についての詳細は、「HOME2 スタートガイド」をご覧ください。



クラウドに保存されると、眼圧計のメモリから測定結果は消去されます。

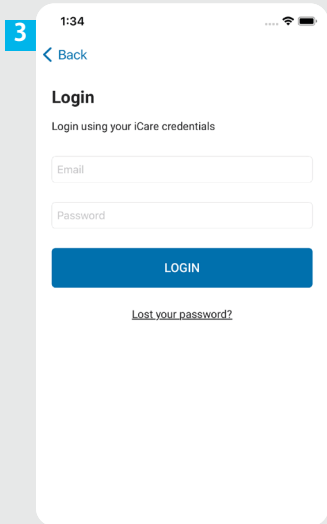


3 iCare 認証情報でログインします。


4 [測定] **MEASUREMENT**をタップして、IOP測定履歴を表示します。

注記!iCare 認証情報の取得方法についての詳細は、眼圧計に付属の「スタートガイド」をご覧ください。

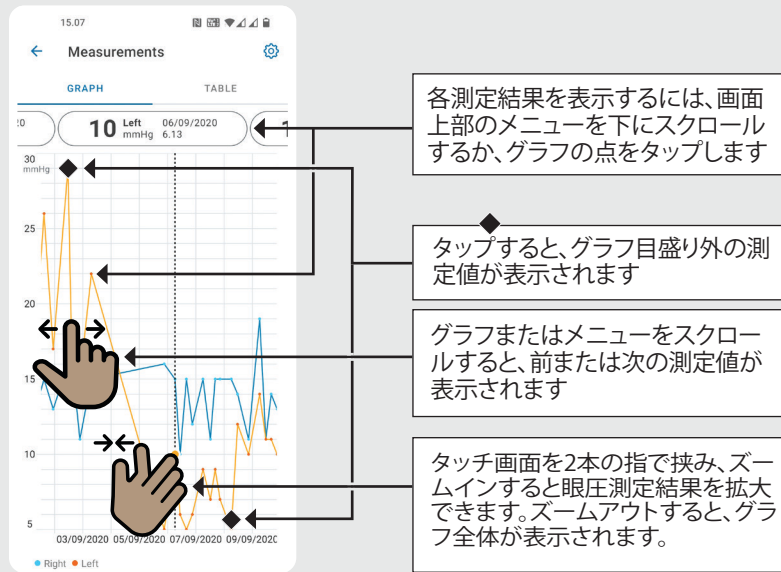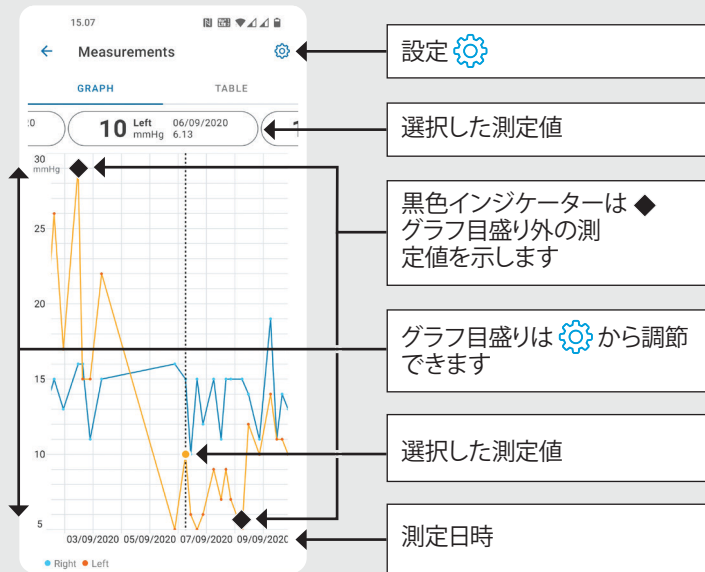

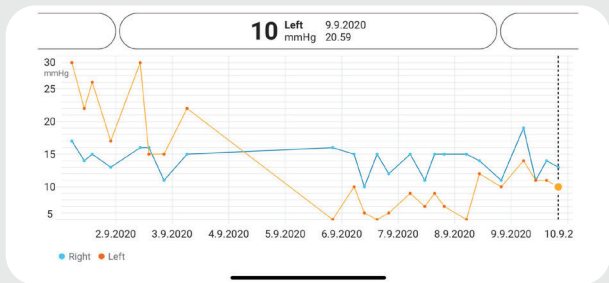

グラフを横向きに表示するにはモバイル機器を回転させます

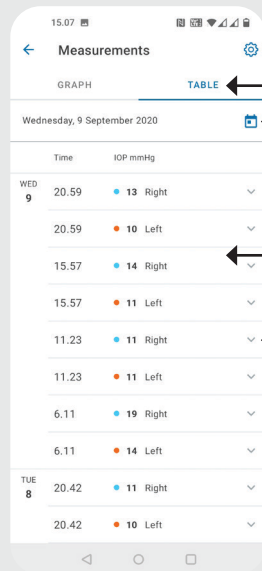

表をタップすると、測定データがリスト形式で表示されます

📅 から日付を選択します







リストをスクロールします

✓ をタップすると、測定品質が表示されます

この手順では、眼圧計を縦状態のままにします。



お使いの眼圧計のBluetoothは、工場出荷時の初期設定はオンになっています。眼圧計のBluetoothがオンになっているか確認したい場合、もしくはBluetoothをオンにしたい場合は、下の手順に従ってください。


- 1  を押すと、眼圧計はオンになります。
- 2  を押し、眼圧計画面に「設定」 **SETTING** を表示させ、 を押します。
- 3 Bluetooth がオフの場合は、 を押して「**BLUETOOTH**」メニューにします。
- 4  を押し、「電源オン」 **TURN ON** を表示させ、 を押します。

iCare EXPORT
クイックガイド (Windows のみ)

iCare EXPORT

クイックガイド

icare

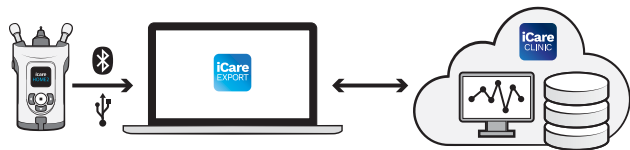

iCare EXPORT を使用する前に、このクイックガイドをお読みください。ステップごとに手順を実行します。

EXPORT の使用についてサポートが必要な場合は、医療従事者または販売元にお問い合わせください。

EXPORT クイックガイド

ステップ

ページ

- | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 1 | iCare EXPORT をダウンロードしてセットアップする | 22 |
| 2 | USB ケーブルを使用して測定値を送信する | 24 |
| 3 | Bluetooth を使用して測定値を送信する | 25 |

眼圧計が医療従事者の iCare CLINIC アカウントに登録されていない場合、眼圧測定データを iCare CLOUD のプライベートアカウントに保存できません。プライベートアカウントのセットアップ方法についての詳細は、眼圧計キャリーケースにある「スタートガイド」をご覧ください。




iCare EXPORT の使用時、コンピューターの時刻と日付が正しく設定されているか確認してください。




測定する前に、眼圧計の時刻を眼圧計の設定から手動で、または眼圧計を iCare PATIENT2 または iCare EXPORT に接続して自動で更新してください。

2

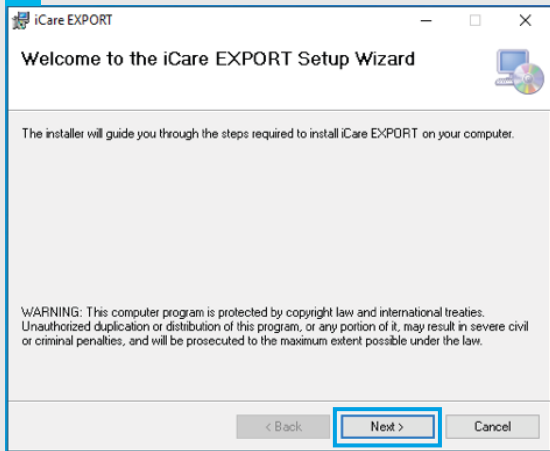

3

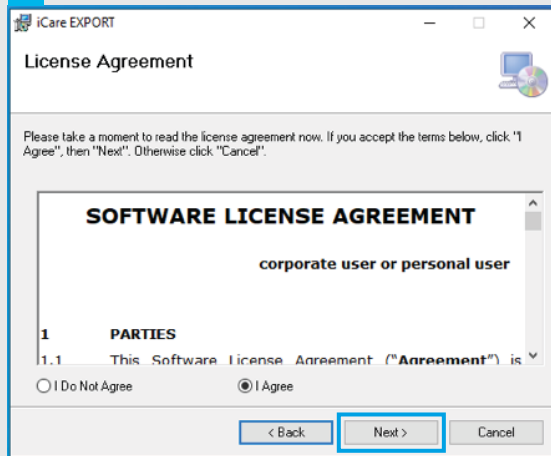

1

下記のウェブサイトから iCare EXPORT をダウンロードしてください:

<https://www.icare-world.com/apps/export/>

「Icare EXPORT Setup.exe」ファイルをダブルクリックします。


2

セットアップ ウィザードの手順を読み、**次へ** をクリックします。

3

同意する を選択して、ソフトウェアライセンス契約に同意します。続行するには、インストールが完了するまで **次へ** をクリックしてください。


4

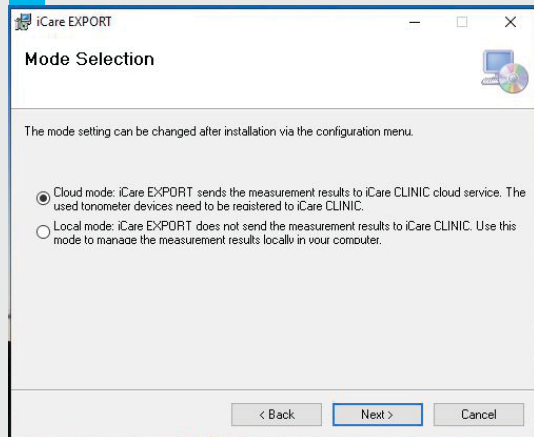

6



7

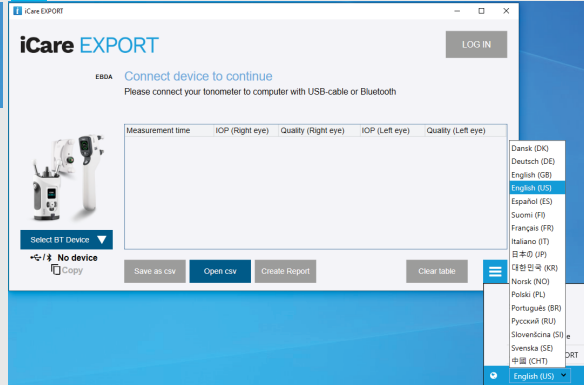

4

クラウドモードを選択すると、測定結果をiCare CLINICやCLOUDに保存することができます。ローカルモードを選択すると、PCに測定データを保存することができます。

5


インストールが完了したら、閉じるをクリックします。

6

デスクトップのiCare EXPORT アイコンをダブルクリックするか、iCare フォルダの下にあるWindowsのスタートメニューでプログラムを見つけてプログラムを起動します。

7

右下のメニューから言語を選択できます。

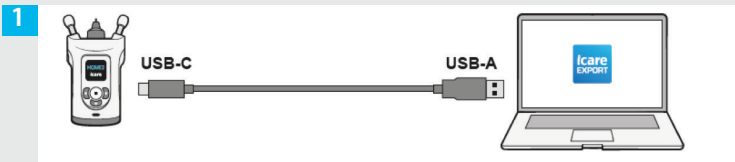

3

iCare EXPORT

LOG IN

Measurements saved!
All measurements were successfully posted to [TopEye](#)

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
11/17/2021 1:24:10 PM	12	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15	Good	

HOME2 2043AH0C


1834BM002 S/N

Copy

Save as csv Open csv Create Report Clear device memory

- 1 測定後、お使いの眼圧計を付属のUSBケーブルで、PCに接続します。
- 2 iCare 認証情報を求めるポップアップが表示された場合、ユーザー名およびパスワードまたは医療従事者から提供されたセキュリティコードを入力します。
- 3 眼圧計は測定結果を自動でサーバーに送信します。

注記!データを転送すると、測定結果は自動的に眼圧計のメモリから消去されます。

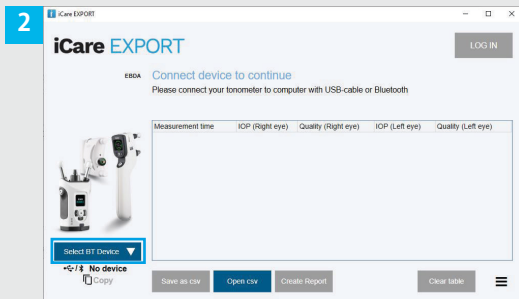

Icare EXPORT

これらの操作手順については、眼圧計および PC の Bluetooth がオンになっているか確認してください。手順については、5「眼圧計でBluetoothをオンにする」を参照してください。

- 1 眼圧計を iCare EXPORT に接続する前に、眼圧計がオンになっているか確認してください。
- 2 左下の **BTデバイスを選択** をクリックします。
- 3 ドロップダウンメニューから、お使いの眼圧計のシリアル番号を選択してください。シリアル番号 (SN) は、お使いの眼圧計の背面ラベルに記載されています。
- 4 眼圧計画面に表示される PIN コードを入力し、**OK** を押します。

1

The screenshot shows the iCare EXPORT software interface. At the top left, there is a blue square with the number '1'. The window title is 'iCare EXPORT'. The main header displays 'iCare EXPORT' in large blue letters, with a 'LOG IN' button to the right. Below the header, a blue notification box states '2C55 Measurements saved! All measurements were successfully posted to [Topeye](#)'. To the left of the table is an image of the iCare HOME2 tonometer. Below the image, the device ID 'HOME2 2043AH0C' is shown with a dropdown arrow. Underneath, the serial number '1834BM002 S/N' is displayed with a 'Copy' icon. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Save as csv', 'Open csv', 'Create Report', and 'Clear device memory', along with a hamburger menu icon.

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
11/17/2021 1:24:10 PM	12	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15	Good	

- 1 眼圧計はiCare EXPORTに接続されると、測定結果を iCare CLOUD または担当の医療従事者の iCare CLINIC アカウントに自動送信します。
- 2 iCare 認証情報を求めるポップアップが表示された場合、ユーザー名およびパスワードまたは医療従事者から提供されたセキュリティコードを入力します。

注記!データを転送すると、測定結果は自動的に眼圧計のメモリから消去されます。



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

電話番号 +358 9 8775
1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com

Icare USA, Inc.

4700 Falls of Neuse Rd.Ste 245

Raleigh, NC.27609

電話番号 +1 888.422.7313 | Fax +1 877.477.5485
infoUSA@icare-world.com



詳細については、
取扱説明書をご覧ください。



icare

iCareはIcare Finland Oyの登録商標です。Centervue S.p.A.、iCare Finland Oy、および iCare USA Inc. は Revenio Group の一員であり、ブランドiCareを代表しています。このパンフレットに記載の製品、サービスまたは提供内容のすべてが、すべての市場で承認または提供されているわけではありません。また承認されたラベルと指示は、国によって異なる場合があります。製品の仕様は、継続的な技術開発の結果により、設計及び提供内容が変更される場合があります。