

简体中文

iCare PATIENT2
iCare EXPORT



iCare PATIENT2 & EXPORT
适用于手机和个人
电脑的简易指南

简易指南

限医生处方下使用 (美国)

icare



在使用 iCare PATIENT2 之前请阅读此简易指南。请按照说明逐步操作。

如果您在使用 PATIENT2 应用程序时需要帮助，请联系您的医疗保健专业人员或 iCare 分销商。

Android 版 PATIENT2 简易指南

步骤

页码

1	开始使用 iCare PATIENT2 应用程序	4
2	通过蓝牙配对眼压计并传输测量值	5
3	通过 USB 配对眼压计并传输测量值	7
4	登录	8
5	图表和表格功能	9

iOS 版 PATIENT2 简易指南

步骤

页码

1	开始使用 iCare PATIENT2 应用程序	12
2	将眼压计与移动设备配对	13
3	传输测量值和登录	15
4	图表和表格功能	17
5	在眼压计上打开蓝牙	19



Android 版 PATIENT2 简易指南





患者可以使用 iCare PATIENT2 查看其 IOP 测量结果，并将结果传输到 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD。医疗保健专业人员则只能使用 iCare PATIENT2 应用程序将 IOP 测量结果传输到 iCare CLINIC。



确保为安装了 iCare PATIENT2 应用程序的移动设备设置正确的时间和日期。



在进行测量之前，请将眼压计的时间从眼压计的默认设置手动更新到您的当地时间，或者通过将眼压计连接到 iCare PATIENT2 应用程序或 iCare EXPORT 软件自动更新到当地时间。

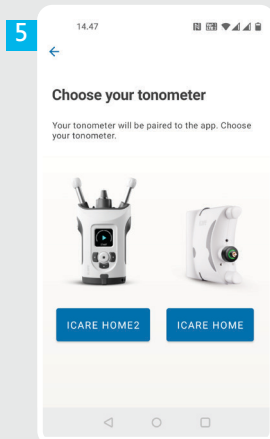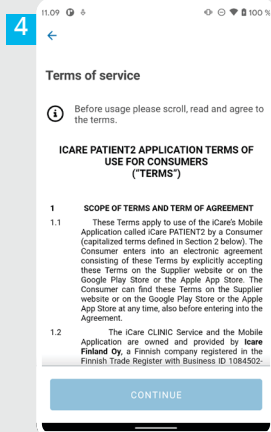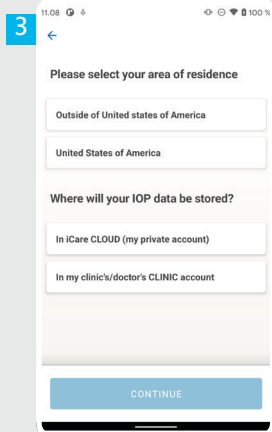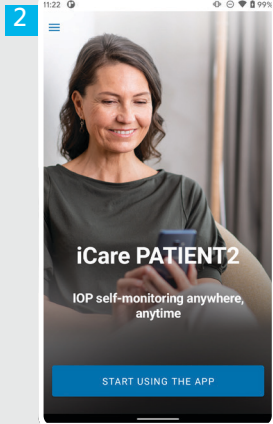

1 从 Google Play Store 下载 iCare PATIENT2 应用程序。



2 按下“开始使用应用程序”按钮。

3 请选择您的居住区域。选择存储 IOP 数据的位置。


4 向下滚动通读服务条款并同意这些条款。

5 选择眼压计型号。

通过蓝牙配对眼压计并传输测量值




Android 版 | 5

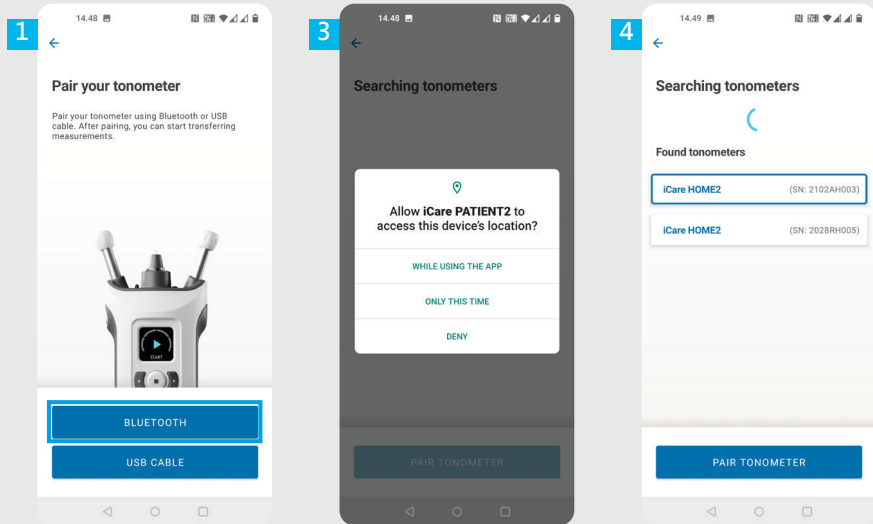

- 1 选择配对方法。
- 2 前往智能手机的设置，并开启蓝牙。
- 3 眼压计上的蓝牙默认处于开启状态。如果眼压计上的蓝牙未开启，请参阅“在眼压计上打开蓝牙”章节查看说明。同意移动设备上的弹出请求以继续配对。
- 4 点击带有您的眼压计序列号的眼压计。点击**配对眼压计**。

注意！如果您之前已通过 USB 线缆配对您的眼压计，并且想使用蓝牙，则需要再次配对。

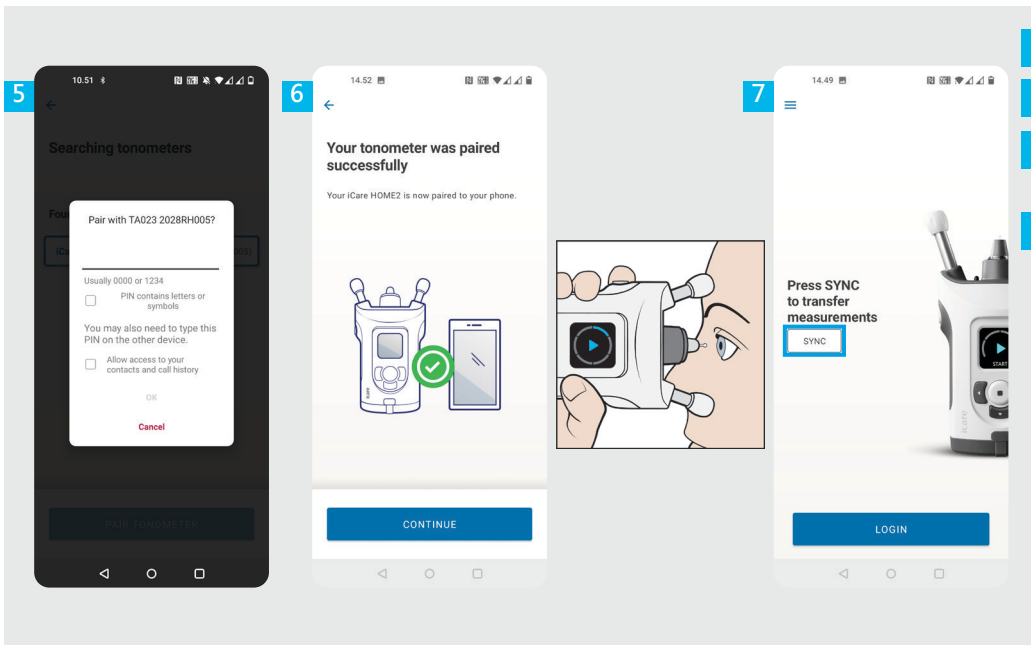


5 输入眼压计屏幕上显示的 PIN 码。点击**确认**。

6 眼压计现在已成功配对。点击**继续**。

7 您现在已准备就绪，可以开始使用应用程序。测量 IOP 后，点击**同步**将测量结果传输到云。


8 如果弹窗提示需打开您的 iCare 凭据，请输入由您的医疗保健提供商提供的用户名和密码或安全代码。

有关如何获得 iCare 凭据的信息，请参阅 iCare HOME2 入门指南。

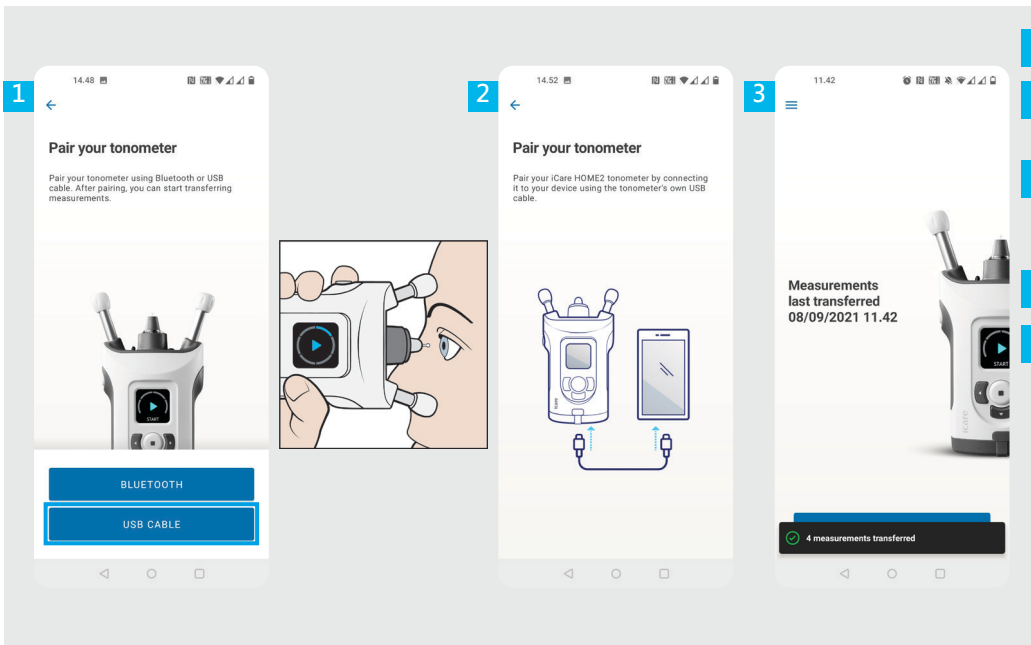

- 1 点击**USB 线缆**。
- 2 测量后，使用提供的 **USB 线缆**将眼压计连接到手机。如有需要可以使用提供的适配器。
- 3 如果弹窗提示需打开您的 **iCare 凭据**，请输入由您的医疗保健提供商提供的用户名和密码或安全代码。
- 4 测量数据会自动传输。
- 5 测量值传输完成后断开 **USB 线缆**。



有关如何获得 iCare 凭据的信息，请参阅 iCare HOME2 入门指南。

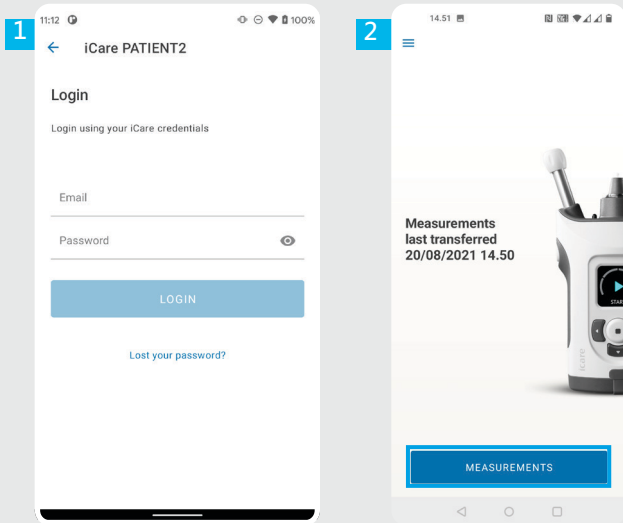


- 1 使用您的 iCare 凭据登录。
- 2 点击**测量值**以查看您的 IOP 测量结果。


注意！有关如何获得 iCare 凭据的信息，
请阅读眼压计便携盒中的“入门指南”。

测量值储存至云端后将从眼压计的内存中删除。

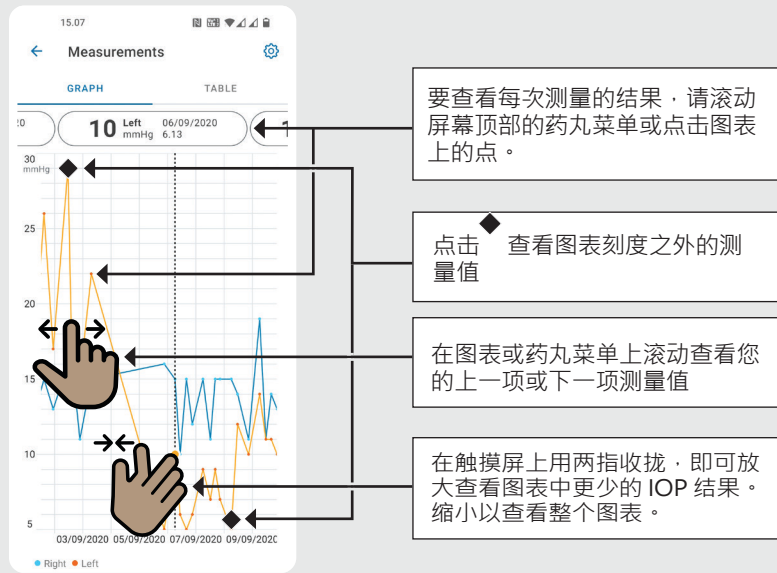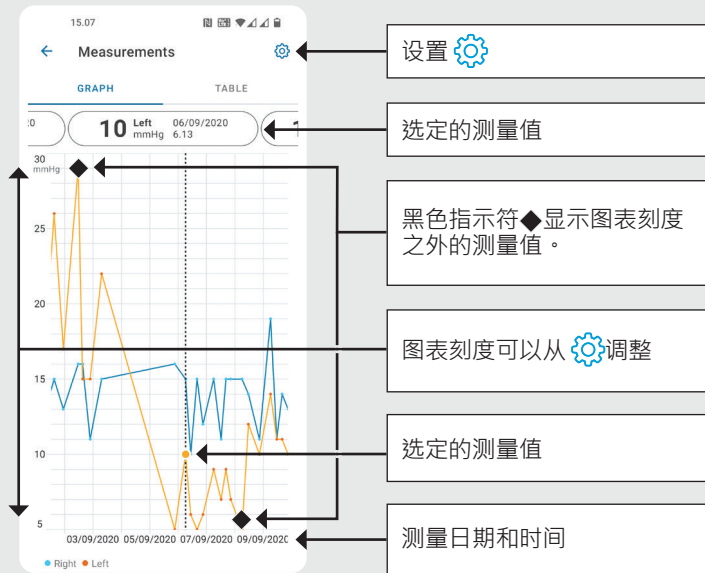

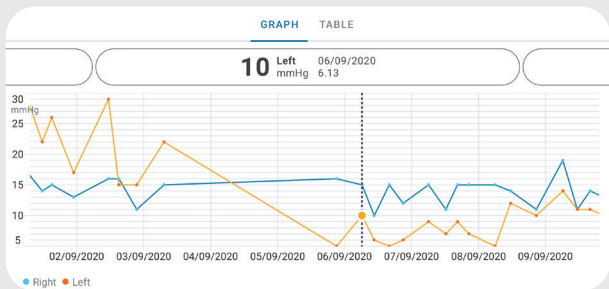

旋转以横向查看图表

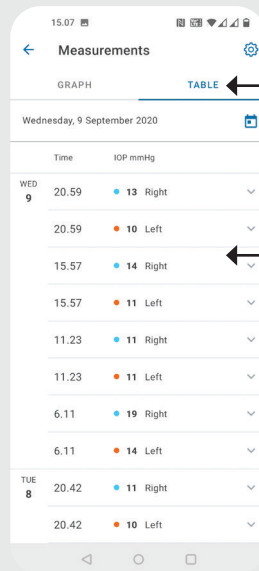

点击表格以列表格式查看测量值

从日历中选择日期

滚动列表

点击查看测量质量

iOS 版 PATIENT2 简易指南


患者可以使用 iCare PATIENT2 查看其 IOP 测量结果，并将结果传输到 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD。医疗保健专业人员则只能使用 iCare PATIENT2 应用程序将 IOP 测量结果传输到 iCare CLINIC。






确保为安装了 iCare PATIENT2 应用程序的移动设备设置正确的时间和日期。



在进行测量之前，请将眼压计的时间从眼压计的默认设置手动更新到您的当地时间，或者通过将眼压计连接到 iCare PATIENT2 应用程序或 iCare EXPORT 软件自动更新到当地时间。

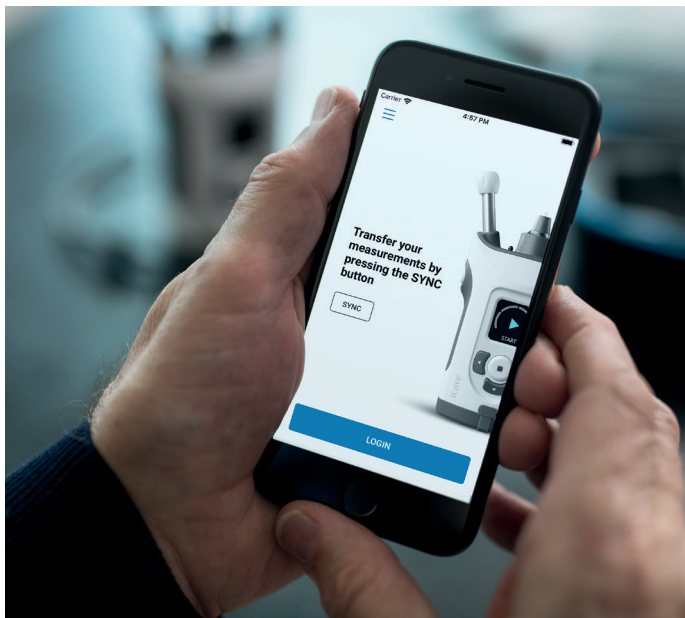

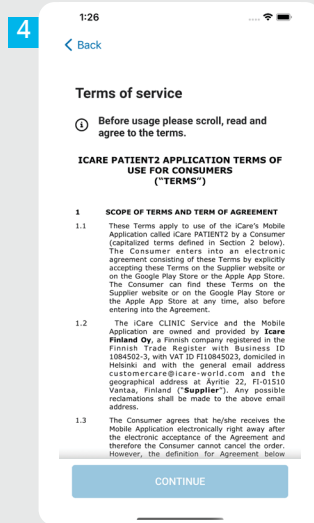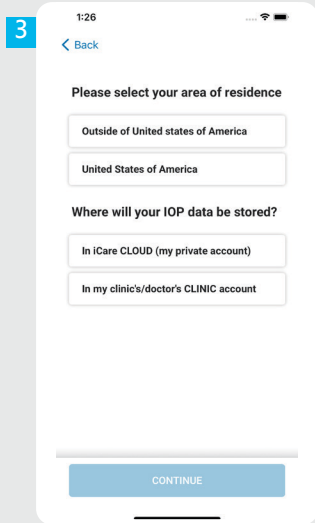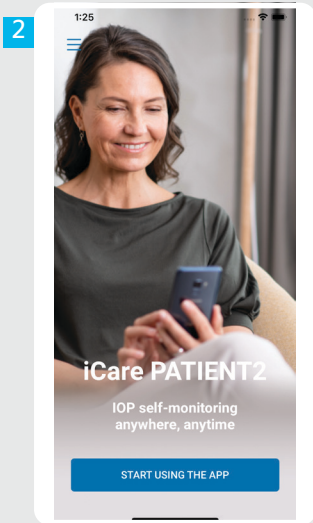

1 从 App Store 下载 iCare PATIENT2 应用程序。




2 按下“开始使用应用程序”按钮。


3 请选择您的居住区域。选择存储 IOP 数据的位置。

4 向下滚动通读服务条款并同意这些条款。


3a

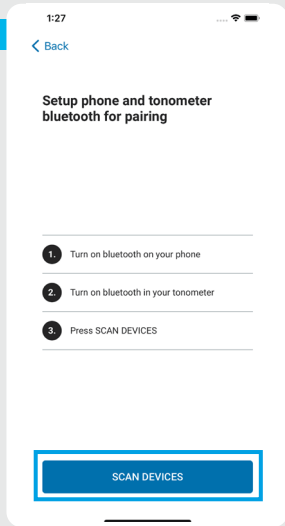




3b

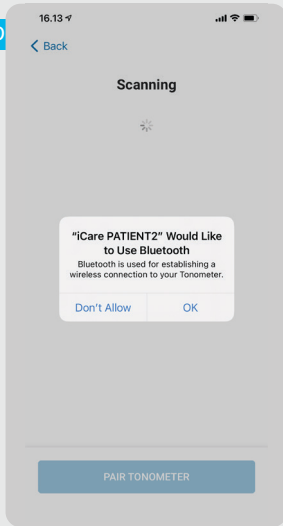



4

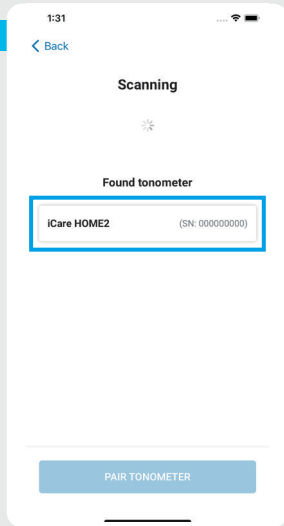

- 1 眼压计上的蓝牙默认处于开启状态。如果眼压计上的蓝牙未开启，请参阅“在眼压计上打开蓝牙”章节查看说明。
- 2 前往智能手机的设置，然后开启蓝牙。
- 3 点击**扫描设备**。如果应用程序要求获得蓝牙使用权限，请点击确定。
- 4 点击带有序列号的眼压计。
- 5 点击**配对眼压计**。

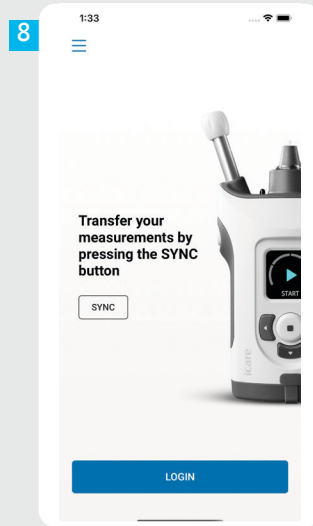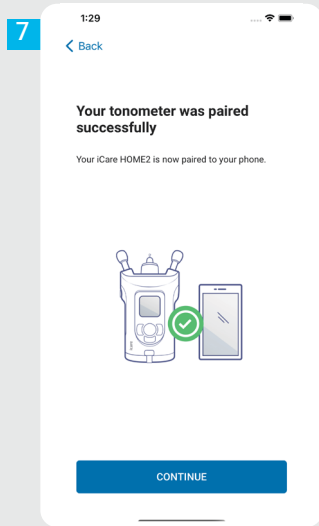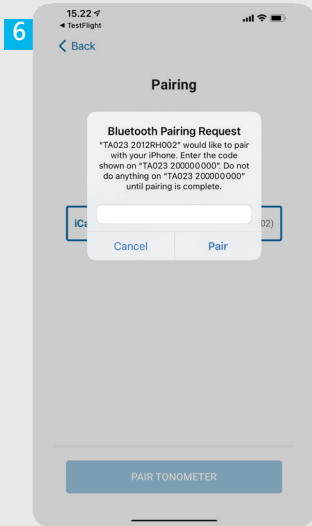


- 6 输入眼压计屏幕上显示的 PIN 码。点击**配对**。
- 7 眼压计现在已成功配对。点击**继续**。
- 8 您现在已准备就绪，可以开始使用应用程序。

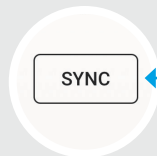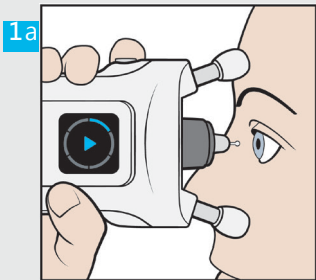

- 1 测量 IOP 后，点击**同步**将测量结果传输到云。
- 2 如果弹窗提示需打开您的 iCare 凭据，请输入由您的医疗保健提供商提供的用户名和密码或安全代码。

有关如何获得 iCare 凭据的信息，请参阅 iCare HOME2 入门指南。



测量值储存至云端后将从眼压计的内存中删除。

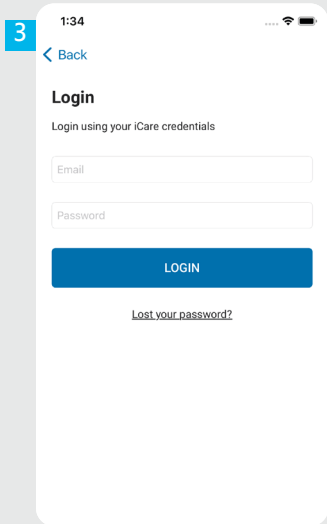


3 使用您的 iCare 凭据登录。


4 点击**测量值**以查看您的 IOP 测量历史记录。

注意！有关如何获得 iCare 凭据的信息，请阅读眼压计便携盒中的“入门指南”。

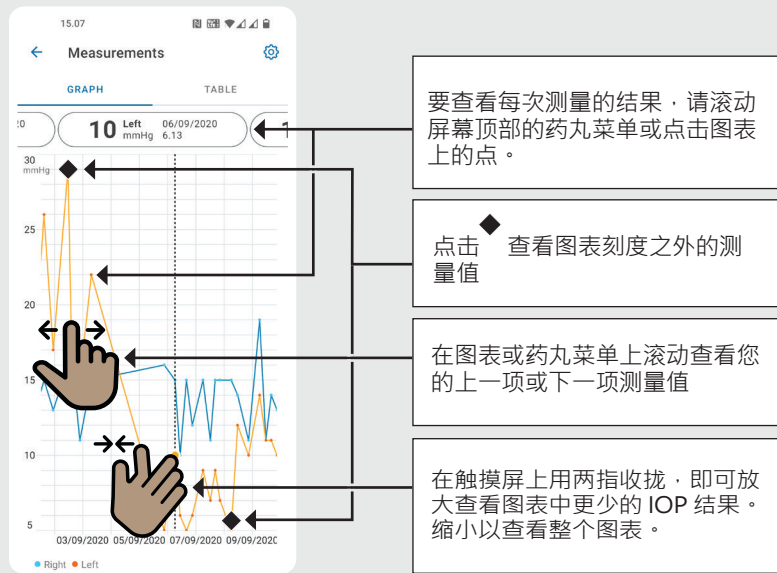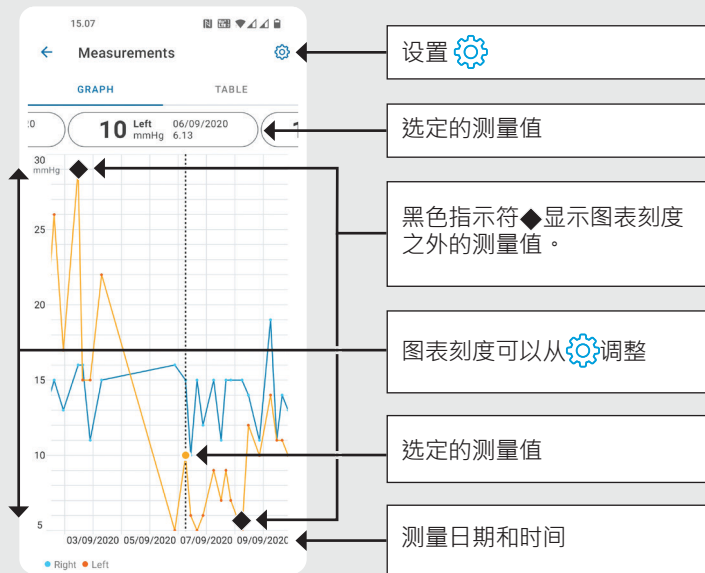

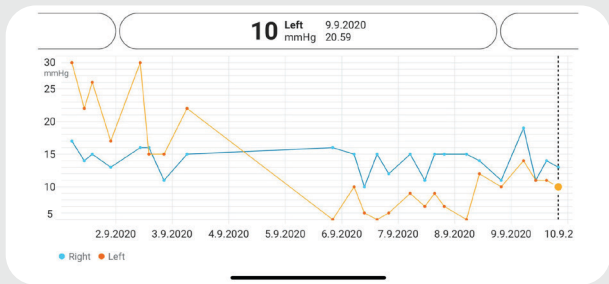

旋转以横向查看图表

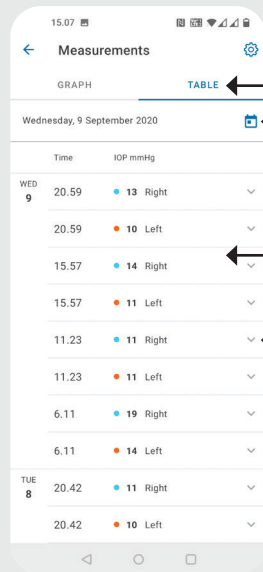

点击表格以列表格式查看测量值

从日历中选择日期







滚动列表

点击▼查看测量质量



按照这些说明操作时
请垂直握住眼压计。

眼压计上的蓝牙为出厂设置的默认开启状态。如要检查眼压计的蓝牙是否开启或想要将其打开，请按照下面的说明操作。


- 1 按下  打开眼压计。
- 2 按下 ，直至在眼压计屏幕上看到**设置**，然后按下 。
- 3 如果蓝牙关闭，请按下  进入**蓝牙菜单**。
- 4 按下 ，直至看到**打开**，然后按下 。

iCare EXPORT
简易指南（仅适用于 Windows）

iCare **EXPORT**

简易指南

icare

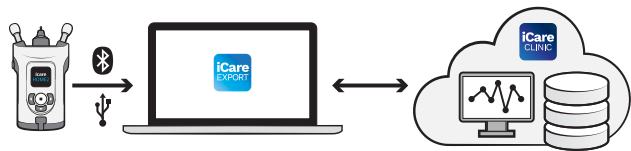

在使用 iCare EXPORT 之前请阅读此“简易指南”。请按照说明逐步操作。

如果您在使用 EXPORT 软件时需要帮助，请联系您的医疗保健专业人员或 iCare 分销商。

EXPORT 简易指南

步骤

页码

- | | | |
|---|--------------------|----|
| 1 | 下载并设置 iCare EXPORT | 22 |
| 2 | 使用 USB 线缆连接并发送测量值 | 24 |
| 3 | 通过蓝牙连接并发送测量值 | 25 |

如果患者的眼压计未注册到医疗保健专业人员的 iCare CLINIC 帐户，则患者可以将其 IOP 测量数据存储到 iCare CLOUD 中的私人帐户。有关如何设置私人帐户的信息，请阅读眼压计便携盒中的“入门指南”。




配合 iCare EXPORT 使用时，请确保计算机的时间和日期正确无误。




在进行测量之前，请将眼压计的时间从眼压计的默认设置手动更新到您的当地时间，或者通过将眼压计连接到 iCare PATIENT2 应用程序或 iCare EXPORT 软件自动更新到当地时间。

2

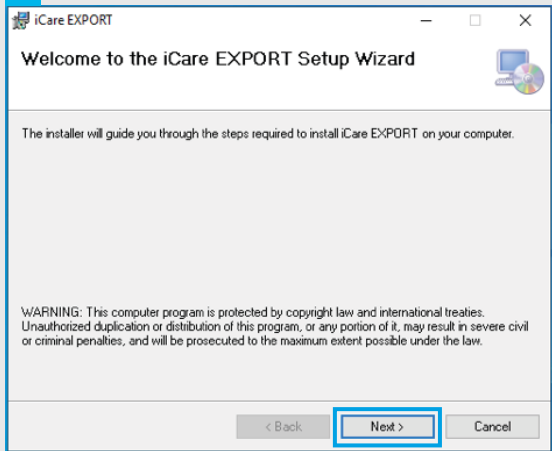

3

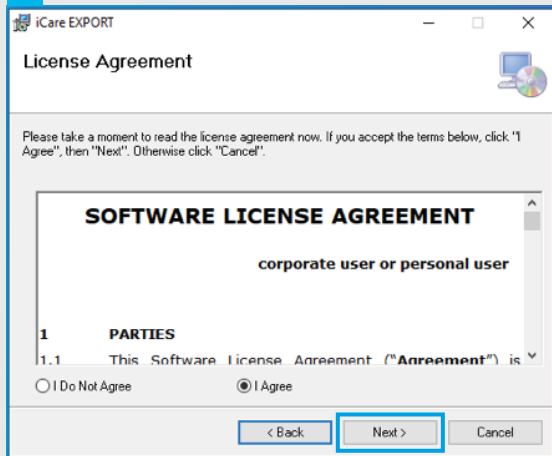

1

从以下网站下载 iCare EXPORT:
<https://www.icare-world.com/apps/export/>.

双击 iCare EXPORT Setup.exe 文件。


2

阅读设置向导上的说明，然后单击下一步。


3

通过选择**我同意**来接受软件许可协议。要继续，请单击**下一步**，直到安装完成。


4

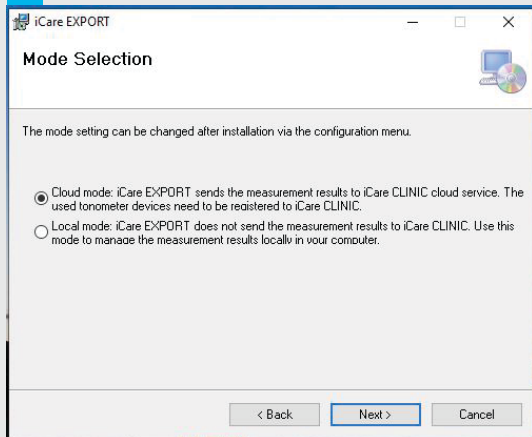

6

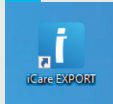

7

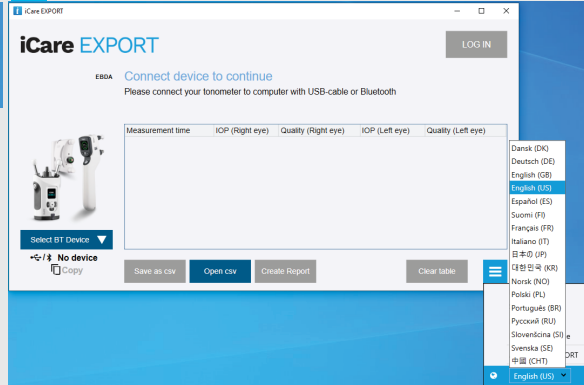

4

选择**云模式**将测量结果存储在 iCare CLINIC 或 CLOUD 中。选择**本地模式**将测量结果存储在你的个人电脑 (PC) 中。

5

安装完成后，单击**关闭**。


6

双击桌面上的“**iCare EXPORT**”图标，或在“**Windows 开始**”菜单的“**iCare**”文件夹下找到该程序，并启动程序。

7

您可以从右下角菜单中选择语言。

1

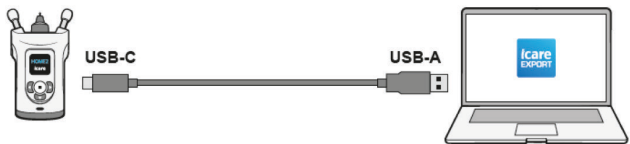

3

iCare EXPORT

iCare EXPORT LOG IN

zcs5 Measurements saved!
All measurements were successfully posted to [Topsyeye](#)

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
11/17/2021 1:24:10 PM	12	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15	Good	

HOME2 2043AH00

1834BM002 S/N

Copy Save as csv Open csv Create Report Clear device memory

1

使用提供的 USB 线缆将眼压计连接到 PC。



2

如果弹窗提示需打开您的 iCare 凭据，请输入由您的医疗保健提供商提供的用户名和密码或安全代码。

3

眼压计会自动将测量结果发送到服务器。

注意！一旦您传输了数据，测量结果就会自动从眼压计的内存中删除。

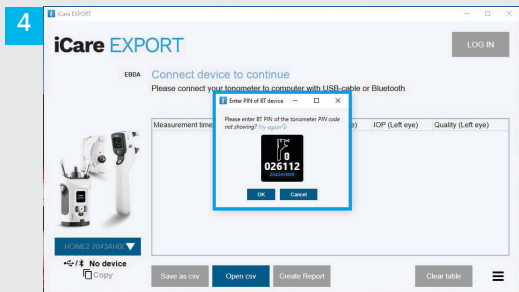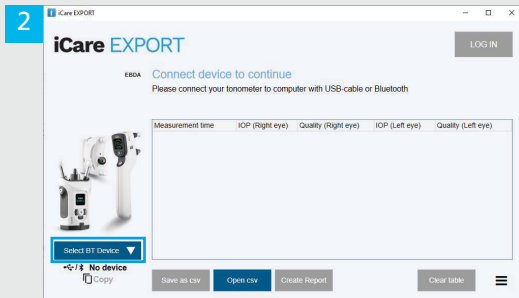


在 iCare EXPORT 应用程序中

针对这些说明，请确保眼压计和个人电脑的蓝牙均开启。有关说明，请参阅第 5 章“如何在眼压计上打开蓝牙”。

- 1 在将眼压计连接到 iCare EXPORT 之前，请确保眼压计开启。
- 2 单击左下角的**选择 BT 设备**。
- 3 从下拉菜单中选择您的眼压计序列号。您可以在眼压计背面的标签上找到序列号 (SN)。
- 4 输入眼压计屏幕上显示的 PIN 码，然后按下**确定**。

1

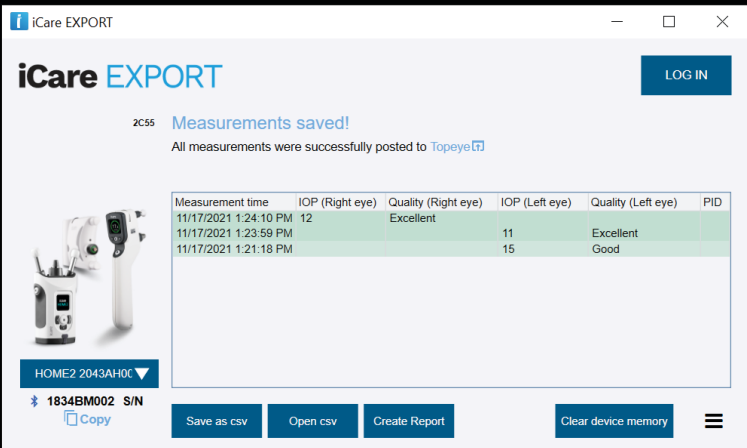

The screenshot shows the iCare EXPORT application window. At the top left, there is a blue square with the number '1'. The window title is 'iCare EXPORT'. Below the title, there is a 'LOG IN' button. A message reads '2C55 Measurements saved! All measurements were successfully posted to [Topeye](#)'. Below this is a table with columns: Measurement time, IOP (Right eye), Quality (Right eye), IOP (Left eye), Quality (Left eye), and PID. To the left of the table is an image of the iCare HOME2 tonometer. Below the image is a dropdown menu showing 'HOME2 2043AH0C'. At the bottom left, there is a 'Copy' icon and the text '1834BM002 S/N'. At the bottom, there are buttons for 'Save as csv', 'Open csv', 'Create Report', and 'Clear device memory', along with a hamburger menu icon.

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
11/17/2021 1:24:10 PM	12	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15	Good	

- 1 眼压计连接到 iCare EXPORT 应用程序，并自动将测量结果发送到 iCare CLOUD 或您的医疗保健专业人员的 iCare CLINIC 帐户。
- 2 如果弹窗提示需打开您的 iCare 凭据，请输入由您的医疗保健提供商提供的用户名和密码或安全代码。

注意！一旦您传输了数据，测量结果就会自动从眼压计的内存中删除。



iCare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

电话：+358 9 8775 1150

info@icare-world.com

Icare USA, Inc.

4700 Falls of Neuse Rd.Ste 245

Raleigh, NC.27609

电话号码 +1 888.422.7313 | 传真 +1 877.477.5485

infoUSA@icare-world.com



如需了解更多信息，
请阅读使用手册。



www.icare-world.com

icare

iCare 是 iCare Finland Oy 的注册商标。Centervue S.p.A.、iCare Finland Oy 和 iCare USA Inc. 隶属于 Revenio 集团，代表 iCare 品牌。

本手册中提及的所有产品、服务或优惠并非在每个市场均得到批准或提供，且经批准的标签和说明可能因国家/地区而异，产品规格可能会因设计和交付范围的变化以及持续的技术发展而变化。