

繁體中文

iCare PATIENT2  
iCare EXPORT



快速指南

需醫師處方箋才可使用 (美國)

icare

iCare PATIENT2 & EXPORT  
行動電話與個人電腦的快速指南





在使用 iCare PATIENT2 之前請閱讀本快速指南。逐步按照指示操作。

如果在使用 PATIENT2 應用程式時需要協助，請聯絡您的醫療保健專業人員或 iCare 經銷商。

## PATIENT2 的 Android 快速指南

步驟

頁數

1	開始使用 iCare PATIENT2 應用程式	4
2	透過藍牙與眼壓計配對並傳輸測量值	5
3	透過 USB 與眼壓計配對並傳輸測量值	7
4	登入	8
5	圖形和表格功能	9

## PATIENT2 的 iOS 快速指南

步驟

頁數

1	開始使用 iCare PATIENT2 應用程式	12
2	將眼壓計與行動裝置配對	13
3	傳輸測量值和登入	15
4	圖形和表格功能	17
5	開啟眼壓計上的藍牙	19

## PATIENT2 的 Android 快速指南

患者可以使用 iCare PATIENT2 檢視其 IOP 測量結果，並將結果傳輸至 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD。醫療保健專業人員僅能使用 iCare PATIENT2 應用程式將 IOP 測量結果傳輸至 iCare CLINIC。







請確認安裝 iCare PATIENT2 應用程式的行動裝置已設定為正確的時間和日期。



在進行測量之前，請將眼壓計的時間從預設時間手動更新至您的當地時間，或將眼壓計連線至 iCare PATIENT2 應用程式或 iCare EXPORT 軟體來自動更新為當地時間。



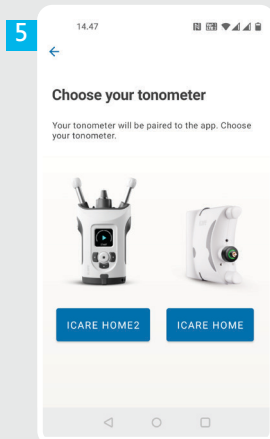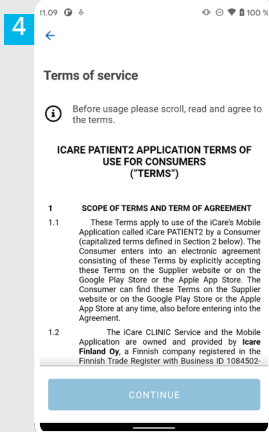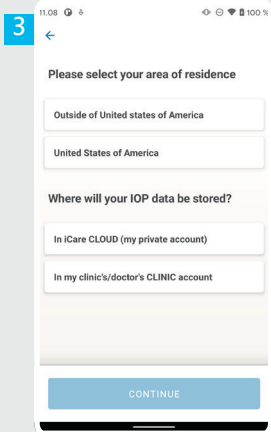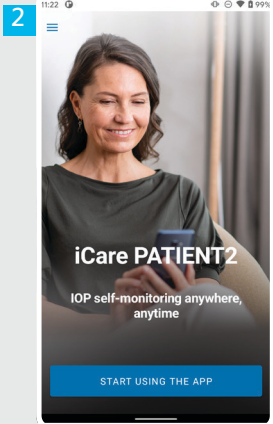

1 從 Google Play 商店下載 iCare PATIENT2 應用程式。



2 按下開始使用應用程式按鈕。

3 請選擇您的居住區域。選擇您的 IOP 資料儲存位置。


4 向下捲動，閱讀並同意服務條款。

5 選擇您的眼壓計型號。

## 透過藍牙與眼壓計配對並傳輸測量值




針對 Android 5

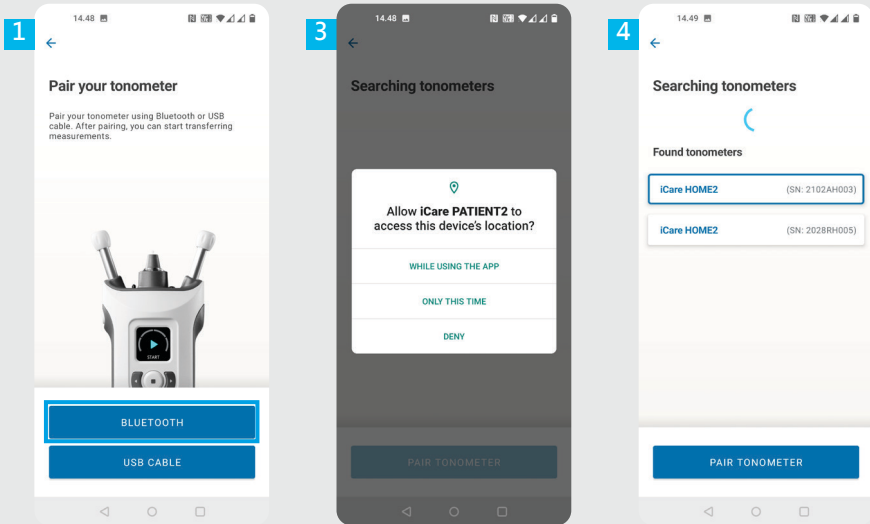


- 1 選擇配對方式。
- 2 前往智慧型手機的設定並開啟藍牙。
- 3 在預設情況下，眼壓計上的藍牙為開啟狀態。若不是，請參閱〈如何開啟眼壓計上的藍牙〉章節以取得說明。允許行動裝置上的提示請求以繼續配對。
- 4 輕按附有您的眼壓計序號的眼壓計。輕按配對眼壓計。

注意！如果您之前已透過 USB 纜線而想改用藍牙與您的眼壓計配對，則您需要重新配對。

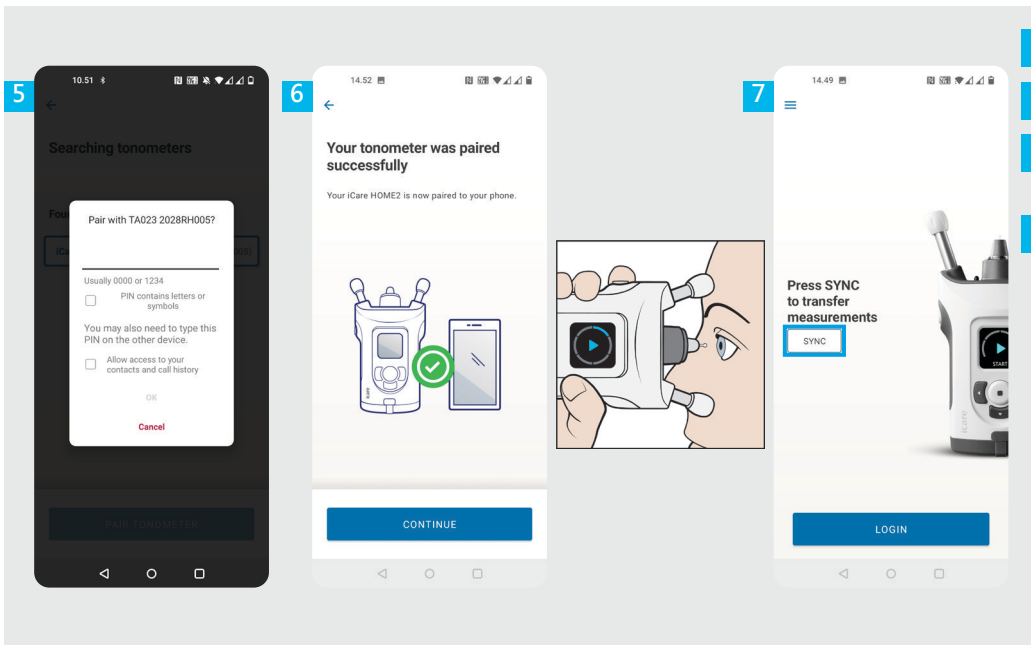

- 5 輸入眼壓計上顯示的 PIN 碼。輕按確定。
- 6 眼壓計現已成功配對。輕按繼續。
- 7 您現在已準備好開始使用應用程式。測量完 IOP 後，輕按同步將測量結果傳輸至雲端。
- 8 如果快顯請求 iCare 憑證的視窗，請輸入您的使用者名稱和密碼，或您的醫療保健提供者提供的安全碼。


如果需要如何獲得 iCare 憑證的相關資訊，請參閱《HOME2 開始指南》。

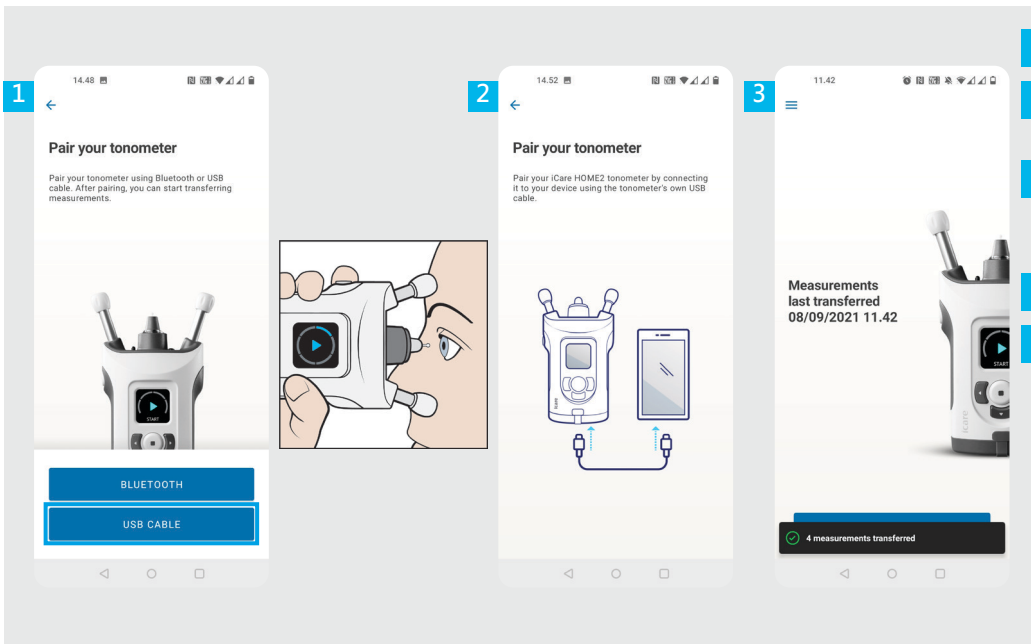

- 1 輕按 USB 纜線。
- 2 測量後，使用提供的 USB 纜線將眼壓計與手機連線。如有需要，可以使用提供的轉接器。
- 3 如果快顯請求 iCare 憑證的視窗，請輸入您的使用者名稱和密碼，或您的醫療保健提供者提供的安全碼。
- 4 測量資料會自動傳輸。
- 5 測量傳輸完成後請拔除 USB 纜線。

如果需要如何獲得 iCare 憑證的相關資訊，請參閱《HOME2 開始指南》。





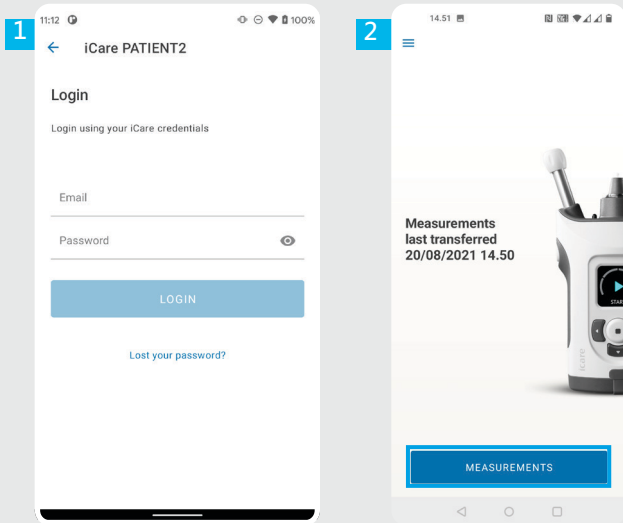


- 1 使用您的 iCare 憑證登入。
- 2 輕按測量以查看您的 IOP 測量結果。

注意！如果需要如何獲得 iCare 憑證的相關資訊，請閱讀眼壓計攜帶箱中的《入門指南》。

測量結果儲存到雲端後，會從眼壓計的記憶體中刪除。

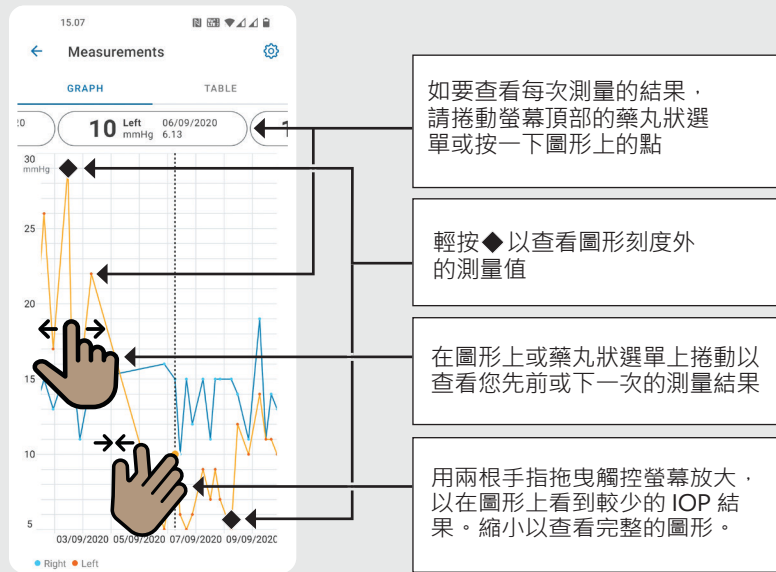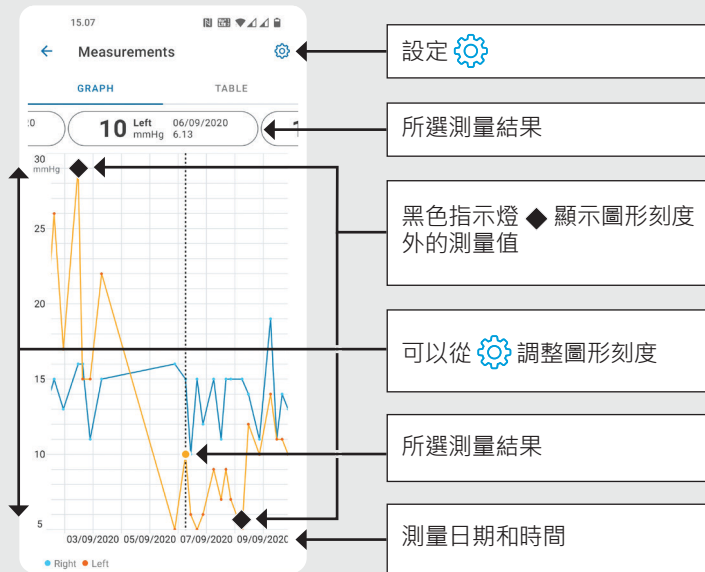

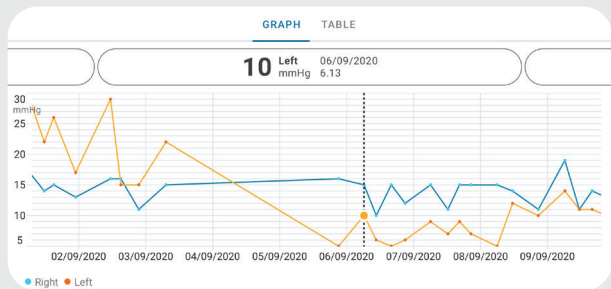

旋轉以橫向檢視視形

15.07 西

← Measurements

GRAPH TABLE

Wednesday, 9 September 2020

Time	IOP mmHg
WED 9 20:59	● 13 Right
20:59	● 10 Left
15:57	● 14 Right
15:57	● 11 Left
11:23	● 11 Right
11:23	● 11 Left
6:11	● 19 Right
6:11	● 14 Left
TUE 8 20:42	● 11 Right
20:42	● 10 Left

輕按表格以用列表格式檢視測量值

從 選擇日期

捲動清單

輕按 以檢視測量值品質

## PATIENT2 的 iOS 快速指南


患者可以使用 iCare PATIENT2 檢視其 IOP 測量結果，並將結果傳輸至 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD。醫療保健專業人員僅能使用 iCare PATIENT2 應用程式將 IOP 測量結果傳輸至 iCare CLINIC。






請確認安裝 iCare PATIENT2 應用程式的行動裝置已設定為正確的時間和日期。



在進行測量之前，請將眼壓計的時間從預設時間手動更新至您的當地時間，或將眼壓計連線至 iCare PATIENT2 應用程式或 iCare EXPORT 軟體來自動更新為當地時間。

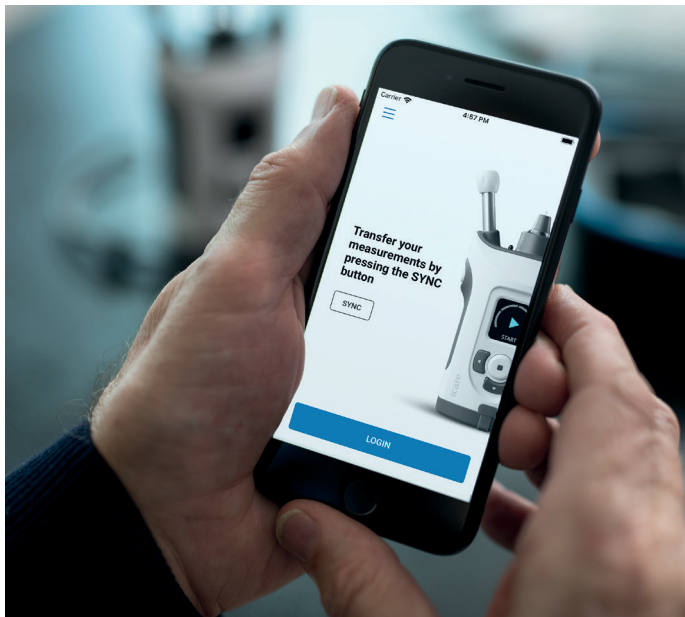

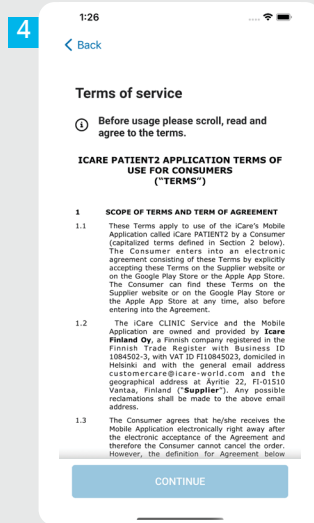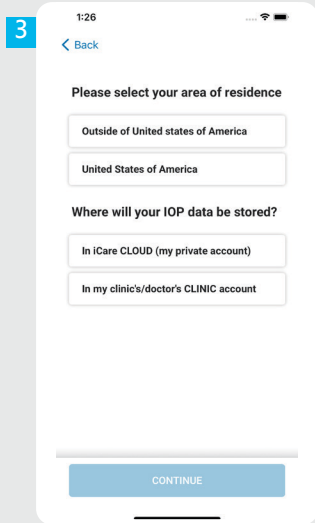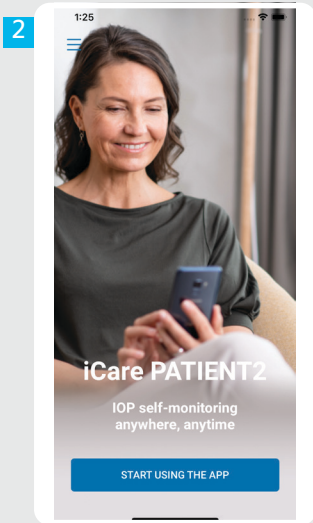

1 從 App Store 下載 iCare PATIENT2 應用程式。




2 按下「開始使用應用程式」按鈕。


3 請選擇您的居住區域。選擇您的 IOP 資料儲存位置。

4 向下捲動，閱讀並同意服務條款。


3a

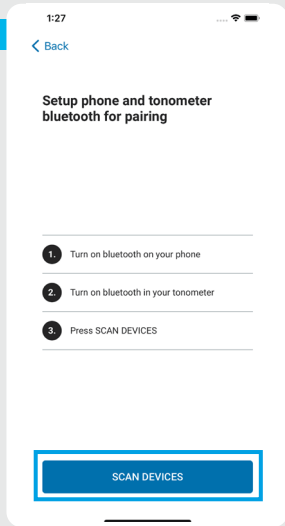




3b

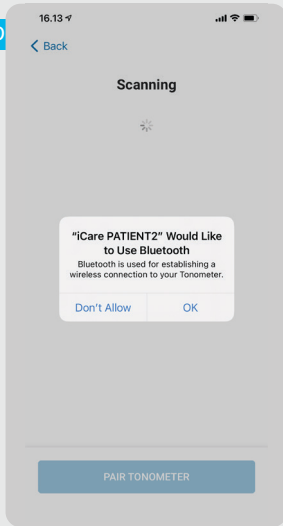

4

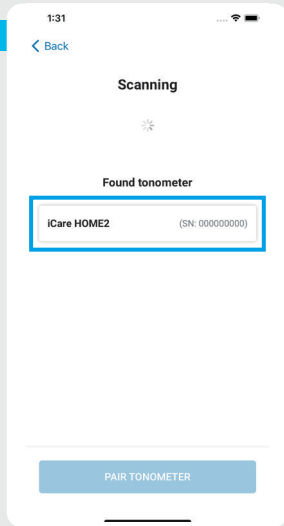



- 1 在預設情況下，眼壓計上的藍牙為開啟狀態。若不是，請參閱〈如何開啟眼壓計上的藍牙〉章節以取得說明。
- 2 前往行動裝置的設定並開啟藍牙。
- 3 輕按掃描裝置。如果應用程式要求使用藍牙的權限，請輕按確定。
- 4 輕按顯示該序號的眼壓計。
- 5 輕按配對眼壓計。

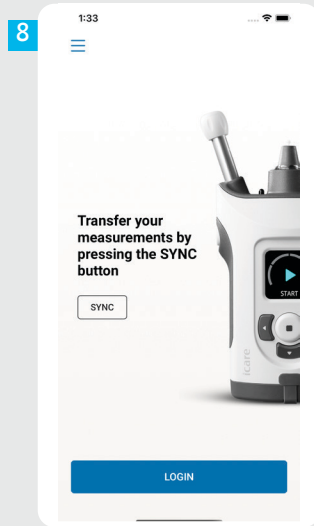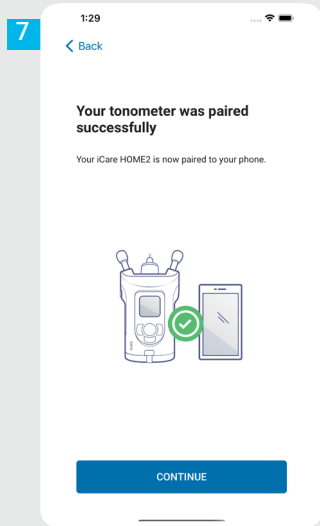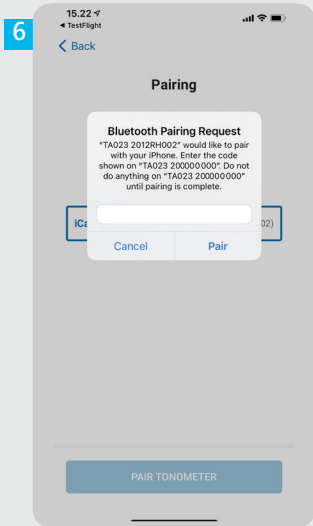

6 輸入眼壓計上顯示的 PIN 碼。  
輕按**配對**。

7 眼壓計現已成功配對。輕按**繼續**。

8 您現在已準備好開始使用應用  
程式。

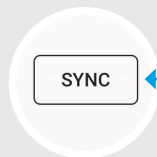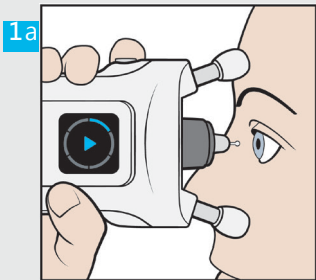


- 1 測量完 IOP 後，輕按同步將測量結果傳輸至雲端。
- 2 如果快顯請求 iCare 憑證的視窗，請輸入您的使用者名稱和密碼，或您的醫療保健提供者提供的安全碼。

如果需要如何獲得 iCare 憑證的相關資訊，請參閱《HOME2 開始指南》。

測量結果儲存到雲端後，會從眼壓計的記憶體中刪除。





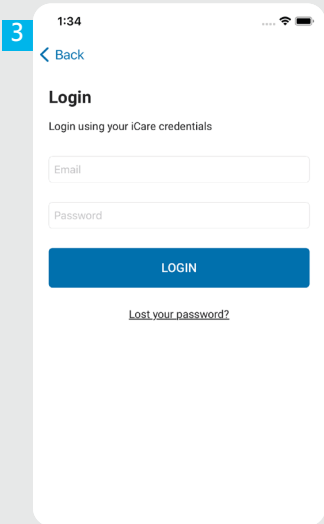


3 使用您的 iCare 憑證登入。

4 輕按測量以檢視您的 IOP 測量歷史記錄。

注意！如果需要如何獲得 iCare 憑證的相關資訊，請閱讀眼壓計攜帶箱中的《入門指南》。

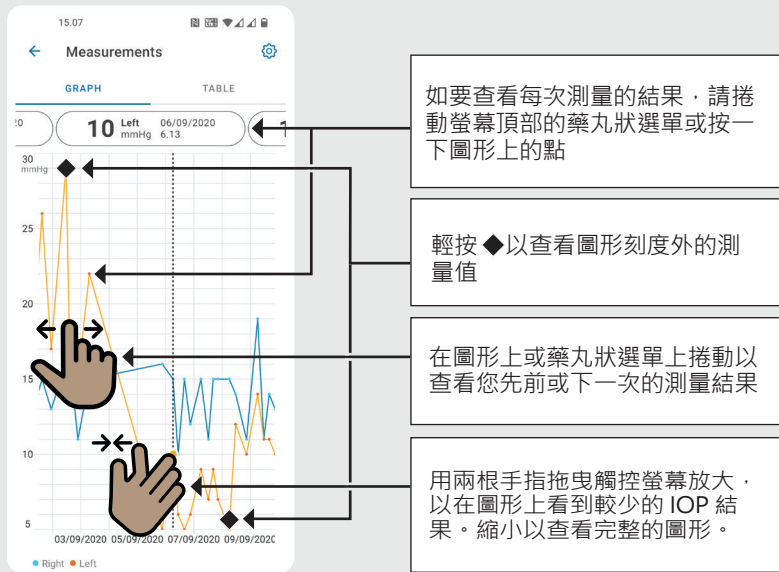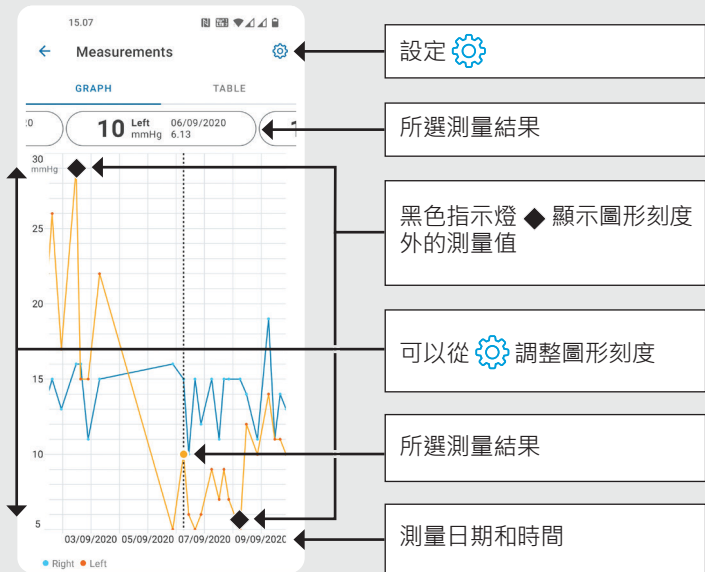

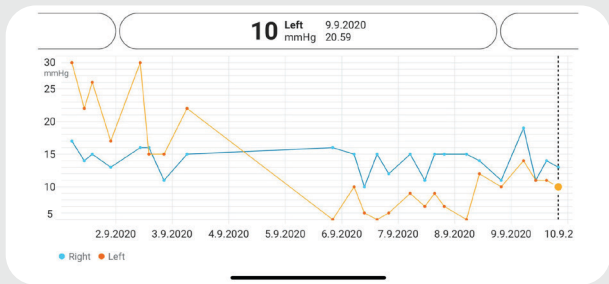

旋轉以橫向檢視形

Time	IOP mmHg
Wednesday, 9 September 2020	
20.59	13 Right
20.59	10 Left
15.57	14 Right
15.57	11 Left
11.23	11 Right
11.23	11 Left
6.11	19 Right
6.11	14 Left
TUE 8	
20.42	11 Right
20.42	10 Left

輕按表格以用列表格式檢視測量值

從  選擇日期







捲動清單

輕按  以檢視測量值品質



執行這些指示時請將眼壓計保持在垂直狀態。

出廠設定的預設情況下，眼壓計上的藍牙為開啟狀態。如要檢查眼壓計上的藍牙是否開啟或想開啟藍牙，請依以下指示操作。


- 1 按下  以開啟眼壓計。
- 2 按住 ，直至您在眼壓計螢幕上看到設定，並按下 。
- 3 如果藍牙已關閉，按下  以進入藍牙功能表。
- 4 按住 ，直至您看到開啟，並按下 。

**iCare EXPORT**  
快速指南 ( 仅限 Windows 使用 )

iCare **EXPORT**

快速指南

**icare**

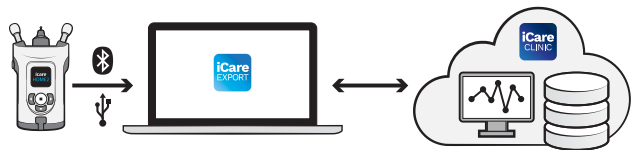

使用 iCare EXPORT 前請閱讀  
《快速指南》。逐步按照指示操作。

如果在使用 EXPORT 軟體時需要協助，  
請聯絡您的醫療保健專業人員或 iCare  
經銷商。

## EXPORT 快速指南

### 步驟

頁數

- |   |                    |    |
|---|--------------------|----|
| 1 | 下載並設定 iCare EXPORT | 22 |
| 2 | 使用 USB 纜線連接並傳送測量結果 | 24 |
| 3 | 透過藍牙連線和傳送測量結果      | 25 |

如果患者的眼壓計未註冊在醫療保健專業人員的 iCare CLINIC 帳戶下，則患者可以將其 IOP 測量資料儲存到 iCare CLOUD 上的私人帳戶。如果需要如何設定私人帳戶的相關資訊，請閱讀眼壓計攜帶箱中的《開始指南》。




使用 iCare EXPORT 時，請確認電腦的時間和日期正確。




在進行測量之前，請將眼壓計的時間從預設時間手動更新至您的當地時間，或將眼壓計連線至 iCare PATIENT2 應用程式或 iCare EXPORT 軟體來自動更新為當地時間。

2

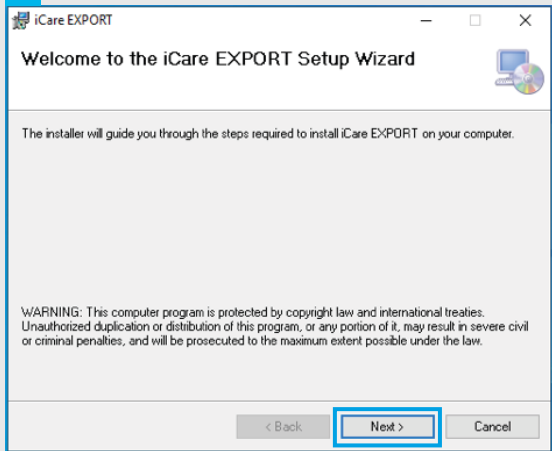

3

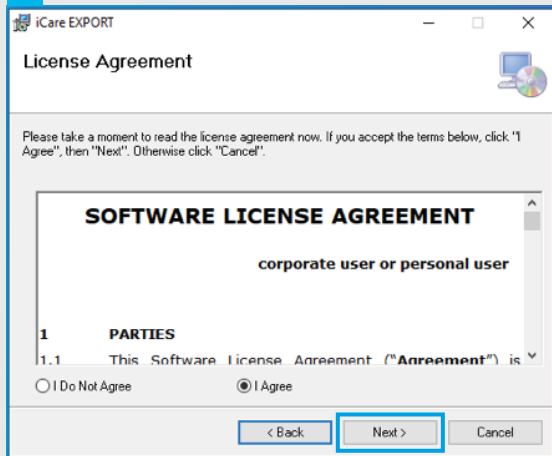

1

從以下網站下載 iCare EXPORT：

<https://www.icare-world.com/apps/export/>

按兩下 iCare EXPORT 的 Setup.exe 檔案。


2

閱讀「設定精靈」上的指示，然後按下一步。


3

選擇**我同意**來接受軟體許可協議。如要繼續，請按一下下一步，直至安裝完成。


4

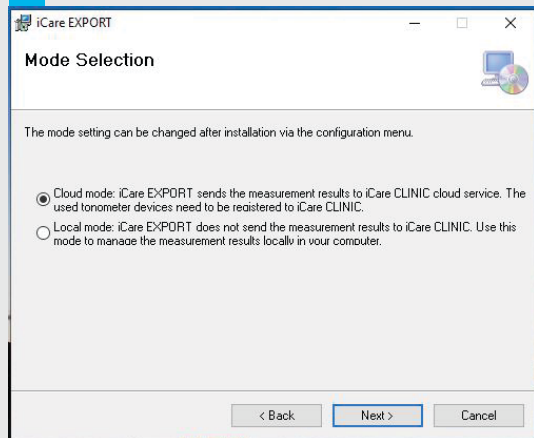

6

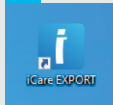

7

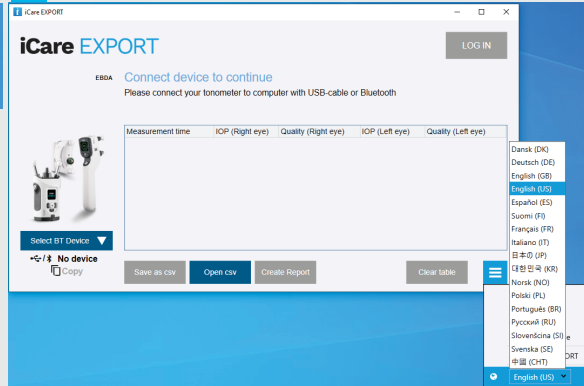

4

選擇雲端模式以在 iCare CLINIC 或 CLOUD 中儲存測量結果。選擇本機模式以在您的個人電腦中儲存測量值。

5

安裝完畢後，按一下關閉。

6


按兩下桌面上的 iCare EXPORT 圖示，或在 Windows 開始功能表中找到程式，在 iCare 資料夾下啟動程式。

7

您可以從右下角的功能表中選擇語言。



1

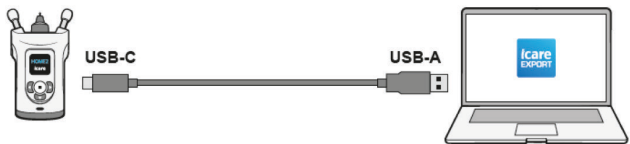

3

iCare EXPORT

**iCare EXPORT** LOG IN

zcs5 Measurements saved!  
All measurements were successfully posted to [Topsyeye](#)

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
11/17/2021 1:24:10 PM	12	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15	Good	

HOME2 2043AH00

1834BM002 S/N

Copy Save as csv Open csv Create Report Clear device memory

1

使用提供的 USB 纜線連接眼壓計與個人電腦。



2

如果彈出請求您的 iCare 憑證的視窗，請輸入您的使用者名稱和密碼，或您的醫療保健提供者提供的安全代碼。

3

眼壓計會自動將測量結果傳送到伺服器。

注意！一旦您傳輸了資料，測量結果就會自動從眼壓計的記憶體中刪除。

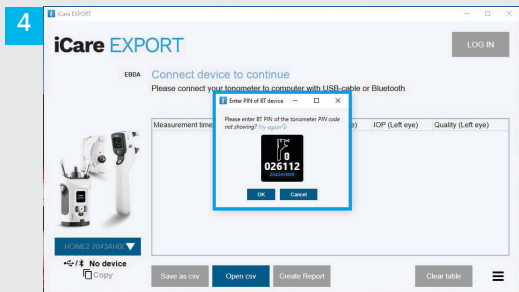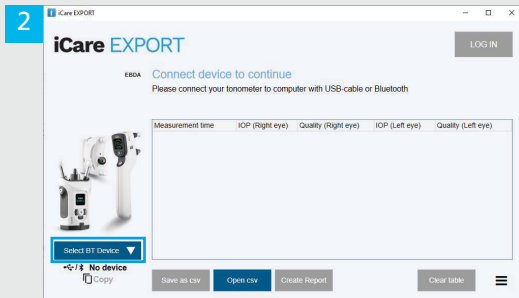


## 在 iCare EXPORT 應用程式中

如要執行這些指示，請確保眼壓計和個人電腦的藍牙均已開啟。如需相關指示，請參閱第 5 章〈如何開啟眼壓計上的藍牙〉。

- 1 在您將眼壓計連線至 iCare EXPORT 前，請確認已開啟眼壓計。
- 2 按一下左下角的選擇 **BT 裝置**。
- 3 從下拉清單中選擇您的眼壓計序號。您可以在眼壓計背面的標籤上找到序號 (SN)。
- 4 輸入顯示在眼壓計螢幕上的 PIN 碼，然後按**確定**

1

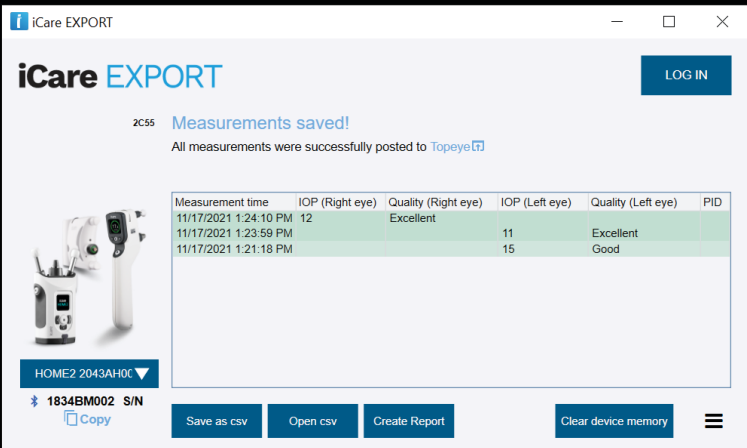

The screenshot shows the iCare EXPORT application window. At the top left, there is a blue square with the number '1'. The window title is 'iCare EXPORT'. Below the title, there is a 'LOG IN' button. A message reads '2C55 Measurements saved! All measurements were successfully posted to Topeye'. Below this is a table of measurement data. To the left of the table is an image of the iCare tonometer. Below the image is a dropdown menu showing 'HOME2 2043AH0C'. Below the dropdown is a 'Copy' button and a '1834BM002 S/N' label. At the bottom of the window are buttons for 'Save as csv', 'Open csv', 'Create Report', and 'Clear device memory', along with a hamburger menu icon.

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
11/17/2021 1:24:10 PM	12	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15	Good	

- 1 眼壓計連線至 iCare EXPORT 應用程式，然後自動將測量結果傳送至 iCare CLOUD 或您的醫療保健專業人員的 iCare CLINIC 帳戶。
- 2 如果彈出請求您的 iCare 憑證的視窗，請輸入您的使用者名稱和密碼，或您的醫療保健提供者提供的安全代碼。

注意！一旦您傳輸了資料，測量結果就會自動從眼壓計的記憶體中刪除。



**Icare Finland Oy**

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

電話：+358 9 8775

1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com

**Icare USA, Inc.**

4700 Falls of Neuse Rd.Ste 245

Raleigh, NC.27609

電話：+1 888.422.7313 | 傳真：+1 877.477.5485

infoUSA@icare-world.com



如需瞭解更多資訊，  
請參閱說明手冊。



**icare**

iCare 是 Icare Finland Oy 的註冊商標。Centervue S.p.A.、Icare Finland Oy 和 Icare USA Inc. 是 Revenio Group 的一部分，代表 iCare 品牌。  
本手冊中提及的所有產品、服務或優惠並非在每個市場均已獲批准或提供，且經批准的標籤和說明可能因  
國家/地區而有所不同。產品規格可能會因應設計和供貨範圍的變化及技術不斷的發展而有變化。