

한국어

iCare HOME2

iCare HOME2
빠른 가이드

빠른 가이드

icare



안압계를 사용하기 전에 이 빠른 가이드를 읽고 HOME2 사용 설명 동영상을 시청하십시오 설명에 따라 차례대로 진행하세요



안압계를 사용하기 전에 사용 설명서 1장에 있는 안전 정보를 확인하십시오

iCare HOME2 안압계를 사용하는 데 도움이 필요한 경우 전문 의료인의 도움을 받으십시오

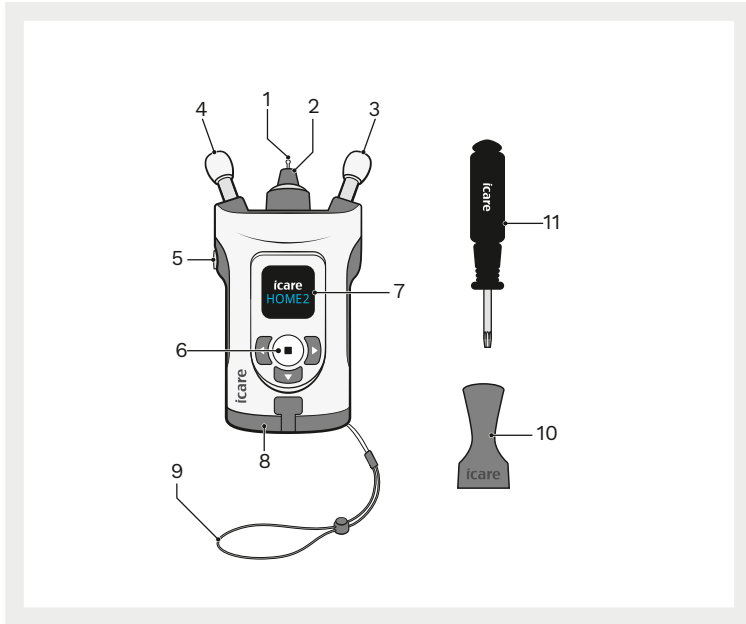


주의 측정을 시작하기 전에 안압계의 시간 설정을 수동으로 현지 시간으로 변경하거나, 안압계를 iCare PATIENT2 앱 또는 iCare EXPORT 소프트웨어에 연결해 자동으로 변경합니다.




단계		페이지
1	배터리 삽입하기	5
2	프로브 삽입하기	6
3	켜기	7
4	올바른 측정 위치	8
5	지지대 조정 및 안압계 위치 설정하기	9
6	안압 측정하기	11
7	바로 누운 자세로 안압 측정하기	13
8	문제 해결	15
9	안압계 끄고 프로브 폐기하기	17


안압계 부착품



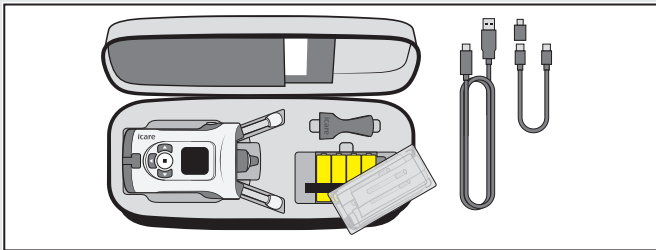
- 1 프로브
- 2 프로브 베이스
- 3 볼 지지대
- 4 이마 지지대
- 5 측정 버튼
- 6 선택 버튼
- 7 디스플레이
- 8 배터리 커버
- 9 손목줄
- 10 프로브 애플리케이터
- 11 스크류드라이버 Torx TX8




배터리는 안압계 전용 케이스 안, 프로브 상자 아래에 들어 있습니다

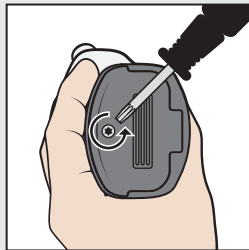


스크류드라이버를 사용해 배터리 커버를 엽니다

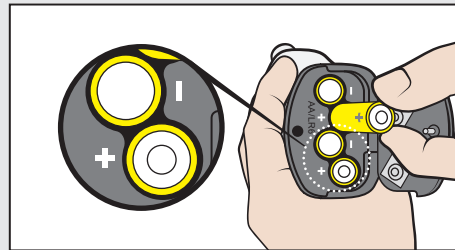


배터리를 삽입하고 커버를 닫습니다

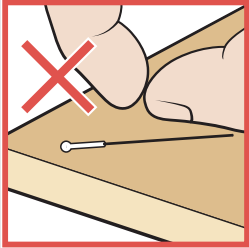

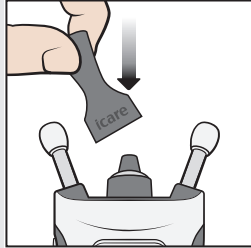
프로브가 손이나
탁자, 또는 그 외
비멸균 상태의
표면에 닿은
경우 그 프로브는
사용하지 마십시오



프로브
애플리케이터를
프로브 베이스 위에
올려놓습니다

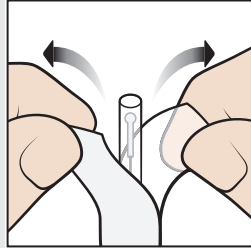


포장을 엽니다

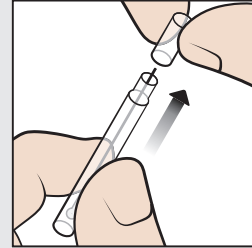


캡을 제거합니다



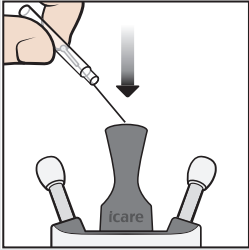
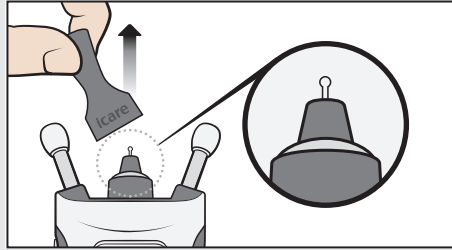
경고! 사용하지 않은 프로브는 오염되지 않도록 상자 안에 그대로 둡니다. 프로브를 직접 손으로 만지지 마십시오. 프로브가 탁자나 바닥 등 비멸균 상태의 표면에 닿은 경우 그 프로브는 사용하지 마십시오.






프로브를
용기에서 프로브
애플리케이터
안으로
떨어뜨립니다

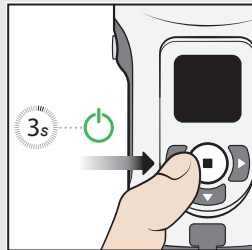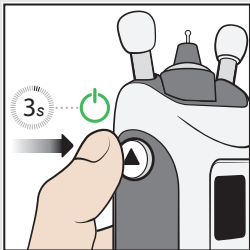


프로브 애플리케이터를 제거합니다




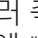삐 소리가 날 때까지  을 누릅니다
디스플레이에 "Start(시작)"이라고 표시됩니다

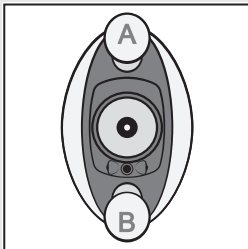
또는, 삐 소리가 날 때까지  을 누릅니다
그런 다음 다시  을 눌러 측정 모드로
들어갑니다 디스플레이에 "Start(시작)"
이라고 표시됩니다



이마 지지대 A는 이마에 대고 볼 지지대 B는 볼에 대도록 합니다

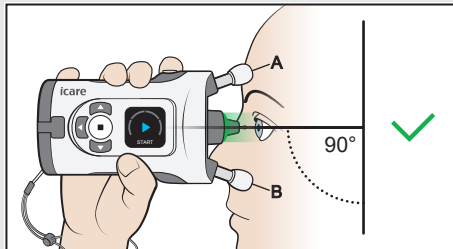


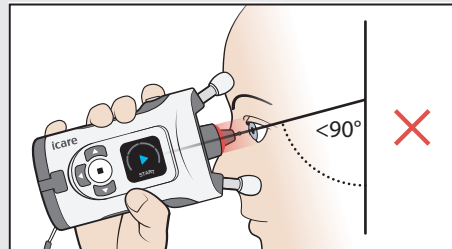정면을 바라본 상태에서 안압계가 얼굴과 90도 각도를 이루도록 위치시킵니다. 프로브는 눈에서 약 5mm 거리에 두고 눈 중심과 직각을 이루도록 해야 합니다




프로브 베이스에 빨간 불빛이 보이면 안압계가 지나치게 아래로 기울어 있다는 뜻입니다. 자세를 곧게 펴고 턱을 들어올려야 합니다

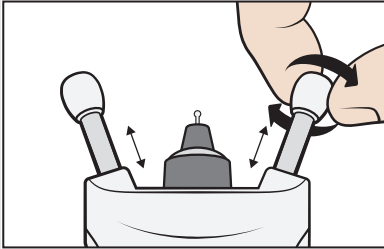
안압계 위치 설정 방법은 다음 섹션에서 설명합니다



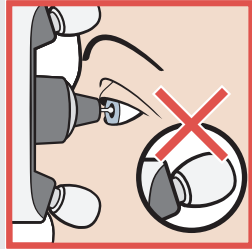측정을 시작하기 전에 이마와 볼 지지대의 길이를 적절하게 조정합니다 지지대를 최대 길이로 뽑아 둔 상태에서 시작합니다



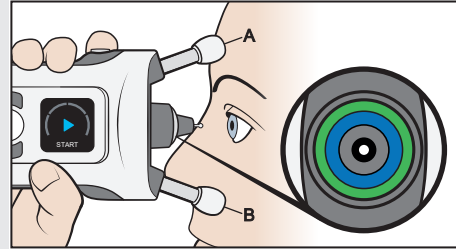
안압계가 지나치게 눈에 가까워지지 않도록 한 번에 2회씩(짚깎 소리 한 번이 1회)만 돌려 지지대 길이를 줄입니다




안압계를 얼굴에 대고 프로브 베이스를 들여다 봅니다 프로브가 눈 중심과 직각 상태가 되면 프로브 베이스의 파란색 고리와 녹색 고리가 대칭을 이룹니다



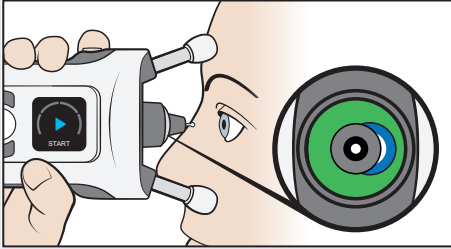
경고 프로브만 눈에 닿아야 합니다 안압계의 다른 부분은 일체 눈에 닿아서는 안 됩니다 안압계가 눈을 찌르지 않도록 하십시오.



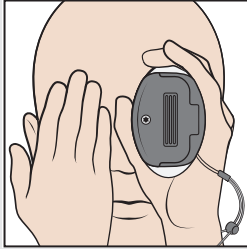
고리가 대칭을 이루지 않는 경우
프로브가 눈 중심과 직각 상태가
아니라는 뜻입니다 안압계의
위치를 바로잡습니다



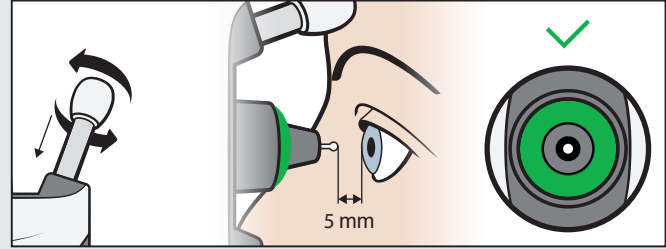
양쪽 눈을 모두 뜬
상태로 유지합니다
측정 대상이 아닌
눈을 가리면 고리
모양 등이 더
뚜렷하게 보일 수
있습니다



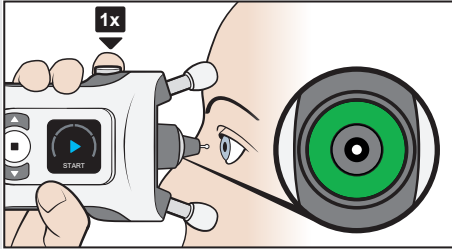
지지대를 시계 방향으로 한 번에 2회씩 돌려서 녹색
고리가 대칭으로 보일 때까지 길이를 줄입니다 이제
눈과 안압계 사이의 거리가 적절합니다



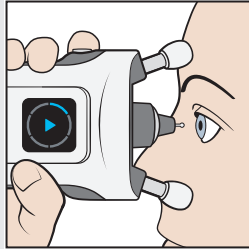
반드시 녹색 고리가 대칭으로 보일 때 측정을 시작해야 합니다 측정 버튼 (▶) 을 한번 누릅니다 프로브가 눈에 가볍게 와서 닿습니다



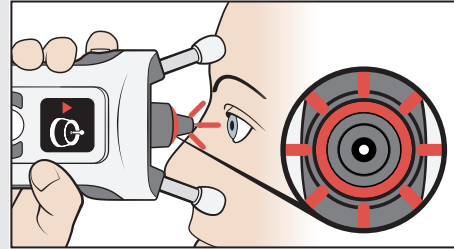
알림음이 한 번 들리면 측정에 성공했다는 의미입니다 알림음이 길게 한 번 나고 프로브 베이스의 불이 꺼질 때까지 측정을 계속합니다




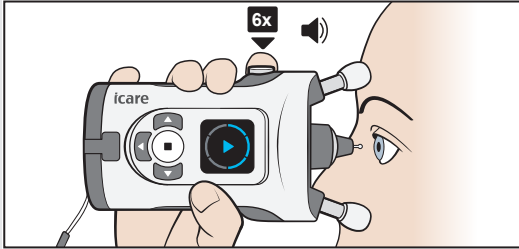프로브 베이스 불빛이 빨간색으로 깜박이고 알림음이 여러 번 나는 경우 측정에 실패했다는 뜻입니다 17페이지의 **문제 해결**을 참조하십시오




연속 6회 측정에 성공해야 전체 측정 시퀀스가 완료됩니다

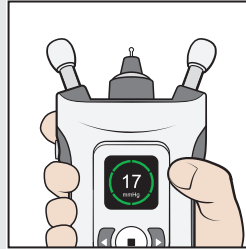
팁: 6회 측정이 연속으로 모두 완료될 때까지 측정 버튼  을 계속 누르고 있는 방법으로도 측정 시퀀스를 완료할 수 있습니다.



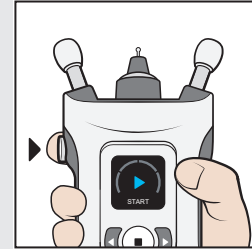
6회 측정이 모두 성공적으로 이루어지면 긴 알람음이 들리고 프로브 베이스의 불이 꺼지면서 측정 결과가 디스플레이에 표시됩니다



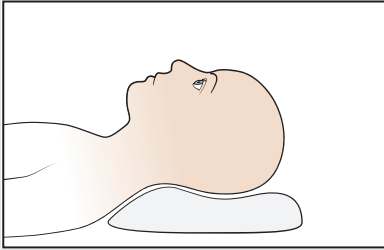
측정 버튼  을 한 번 누른 다음, 같은 방법으로 반대쪽 눈의 측정을 진행합니다




측정하기 전에 잠시 누워
있습니다

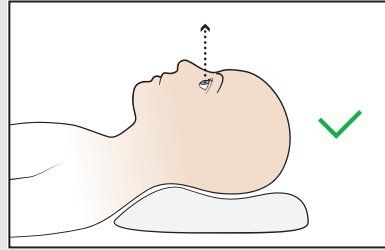


베개를 베고 편안한 자세로
등을 대고 눕습니다 똑바로
위를 봅니다

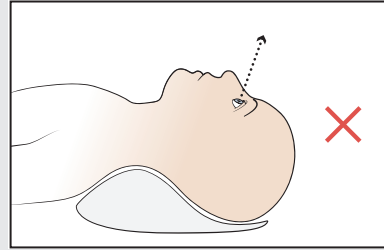


목이 뒤로 굽어지지 않도록
하십시오

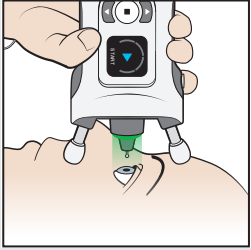

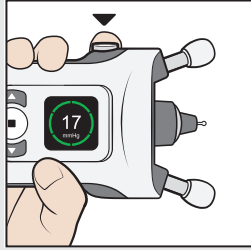
안압계를 얼굴에 90도 각도로 대고 앞서 설명한 방법대로 안압을 측정합니다



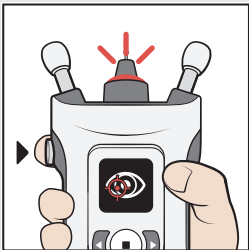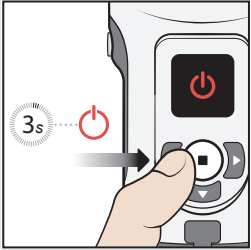
성공적으로 측정이 완료되면 측정 버튼 (▶)을 한 번 누른 다음, 같은 방법으로 반대쪽 눈의 측정을 진행합니다




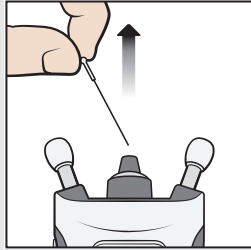
오류가 발생하면 프로브 베이스에 빨간색 불이 깜박입니다
디스플레이와 소리로 오류 발생 원인을 알 수 있습니다

디스플레이를 확인하고 측정 버튼  을 한 번 누른 다음,
문제점을 시정한 후 다시 측정합니다

아이콘	디스플레이 표시 문구	소리	문제	해결 방법
	TOO FAR(너무 멀)	길게 3회 	프로브가 눈에서 너무 멀니다	측정 버튼 을 한 번 눌러 오류를 확인합니다 이마 및 볼 지지대 길이를 줄입니다
	TOO NEAR(너무 가까움)	짧게 5회 	프로브가 눈에 너무 가깝습니다	측정 버튼 을 한 번 눌러 오류를 확인합니다 이마 및 볼 지지대 길이를 늘립니다
	INCORRECT ALIGNMENT(정렬 오류)	짧게 2회 	프로브가 각막과 수직 상태가 아니거나 프로브가 눈꺼풀 또는 속눈썹에 닿아 있습니다	측정 버튼 을 한 번 눌러 오류를 확인합니다 프로브는 눈의 중심부와 직각을 이루도록 안압계 위치를 조정합니다 눈을 계속 뜬 상태로 유지합니다
	REPEAT(반복)	짧게 2회 	프로브의 움직임에 문제가 있었습니다	측정 버튼 을 한 번 눌러 오류를 확인합니다 다시 측정하세요
	DETECTION ERROR(감지 오류)	짧게 2회 	센서가 측정한 눈(오른쪽 또는 왼쪽)을 식별할 수 없습니다	을 누른 다음 디스플레이에 맞는 쪽 눈(오른쪽 또는 왼쪽)이 표시될 때까지 을 누릅니다 을 누르거나 돌아가기 버튼을 눌러 측정을 취소합니다



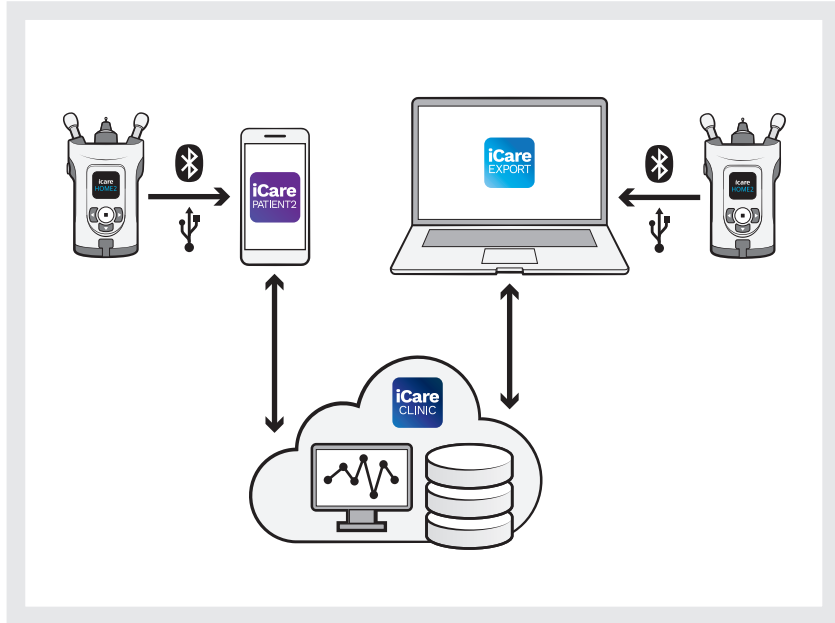
알림음이 3회 들리고
디스플레이가 꺼질
때까지 선택 버튼 
을 길게 누릅니다



프로브를 분리해
프로브 용기에 다시
넣습니다



프로브와 컨테이너는
혼합 폐기물함에 넣어
폐기합니다



이제 사용하고 계신 모바일 기기에 설치한 iCare PATIENT2 앱이나 컴퓨터에 설치한 iCare EXPORT 소프트웨어를 사용해 측정치를 담당 의사의 iCare CLINIC 또는 iCare Cloud의 내 개인 계정으로 전송하면 됩니다



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

전화: +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



자세한 사항은
사용 설명서를 참조하세요



www.icare-world.com

icare

iCare는 Icare Finland Oy의 등록 상표입니다 Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd 및 Centervue S.p.A.는 Revenio Group의 자회사로 iCare 브랜드를 대표합니다. 제품, 부속품, 서비스 또는 제안 중에는 일부 시장에서 제공되지 않는 경우가 있으며, 승인 받은 라벨 및 사용 설명은 국가별로 다를 수 있습니다. 제품 사양은 디자인 및 납품 범위, 지속적인 기술 개발의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.