

简体中文

iCare HOME2

iCare HOME2  
简易指南

简易指南

icare



在使用眼压计之前，请阅读本《简易指南》并观看 HOME2 用户说明视频。请按照说明逐步操作。



有关安全性信息，请在使用眼压计之前阅读《使用手册》中的第 1 章。

如果在使用 iCare HOME2 眼压计方面需要帮助，请联系您的专业医务人员。



**提醒！**在进行测量之前，请在眼压计的设置中将眼压计的时间手动更新为您的本地时间，或者通过将眼压计连接到 iCare PATIENT2 应用程序或 iCare EXPORT 软件自动进行更新。




## 步骤

## 页码


<b>1</b>	装入电池	5
<b>2</b>	装入探头	6
<b>3</b>	开启	7
<b>4</b>	更正测量位置	8
<b>5</b>	调整支架以及眼压计位置	9
<b>6</b>	测量眼压	11
<b>7</b>	以仰卧位测量眼压	13
<b>8</b>	故障诊断	15
<b>9</b>	关闭眼压计并妥善处理探头	17

## 眼压计部件


4

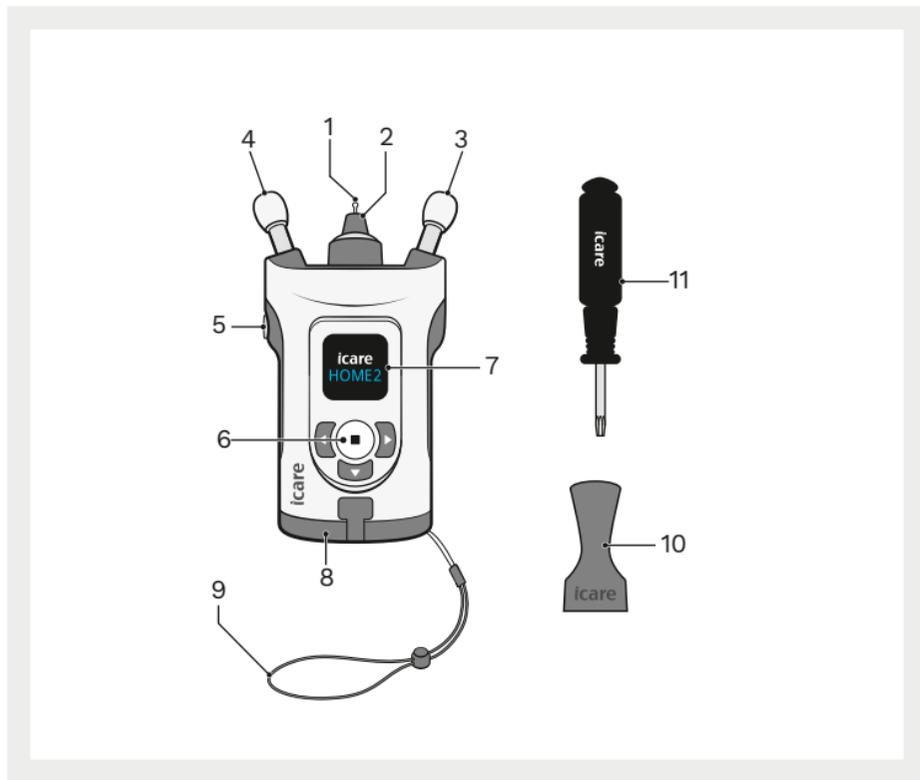


- 1 探头
- 2 探头底座
- 3 脸颊支架
- 4 前额支架
- 5 测量按钮
- 6 选择按钮
- 7 显示屏
- 8 电池盖
- 9 腕带
- 10 探头施用器
- 11 螺丝起子 Torx TX8

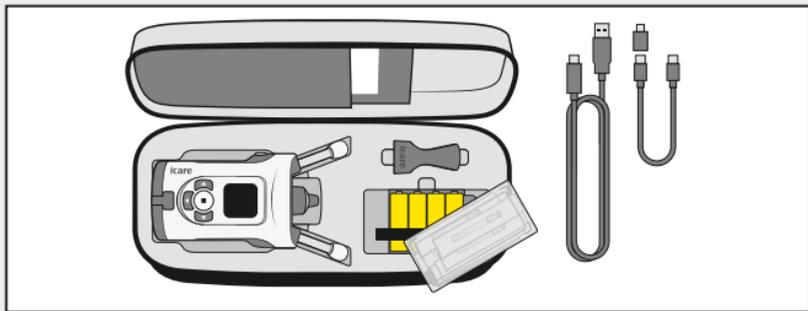


電池在探頭箱下的眼壓計攜帶箱中。

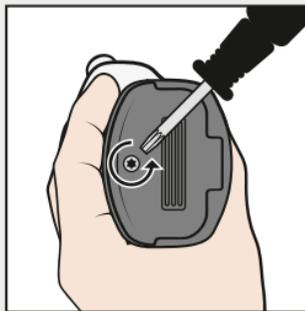


使用螺絲起子打開電池蓋。

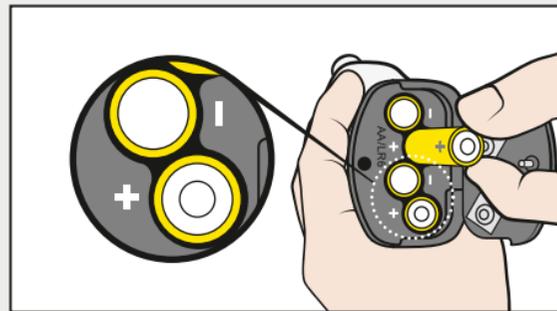


装入电池，然后关闭电池盖。

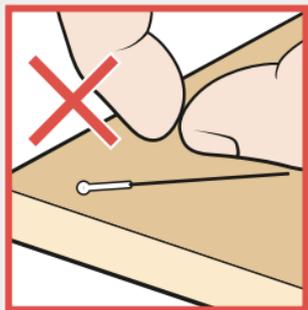


如果探头碰到您的手部、桌子或其他未经消毒的表面，请勿再使用。

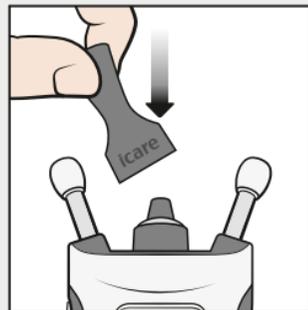

将探头施用器置于探头底座上。

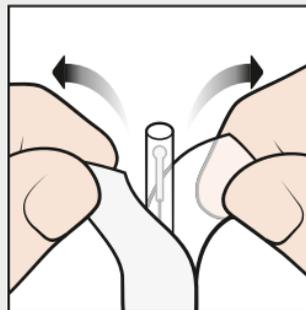


打开包装。

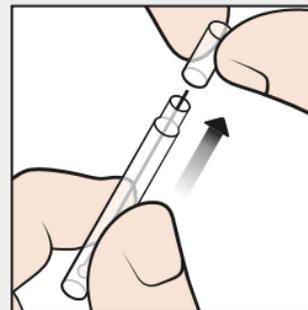


取下盖子。





**警告！** 为防止污染，请将未使用的探头放在包装盒中。请勿触摸裸露的探头。如果探头接触到了未经消毒的表面（如桌子或地面），请勿再使用。

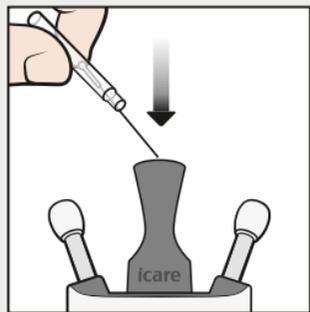

将探头从容器中放入探头施用器。

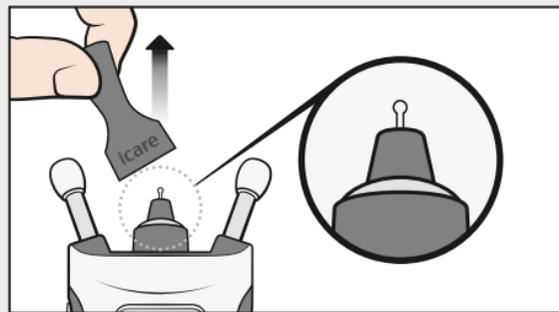


取下探头施用器。

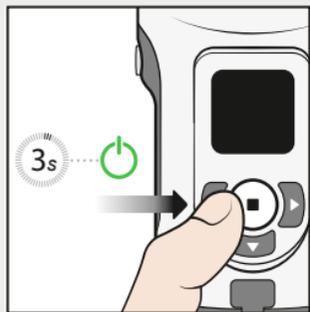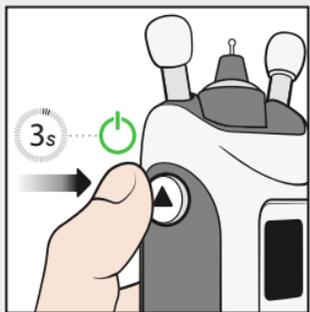


按下 ，直到聽到「嗶」聲。顯示屏上顯示文字“Start”（開始）。


或者，按下  直到聽到哔声。然後再次按下  以進入測量模式。顯示屏上顯示文字“Start”（開始）。

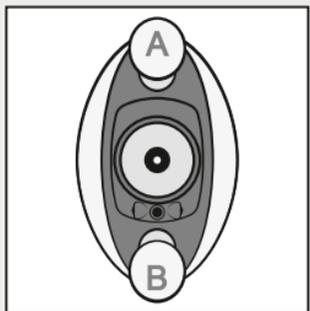

前額支架 A 放在額頭上，臉頰支架 B 靠在臉頰上。

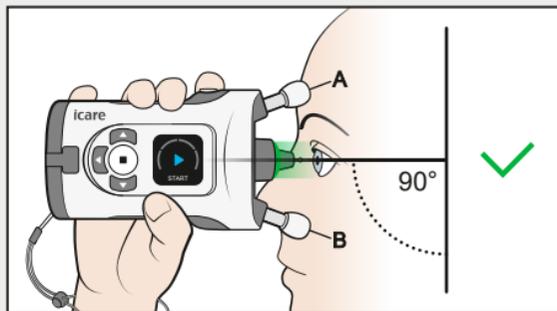


直視前方，眼壓計與臉部成 90 度角。探頭距離眼睛約 5 毫米，並垂直指向眼睛中心。

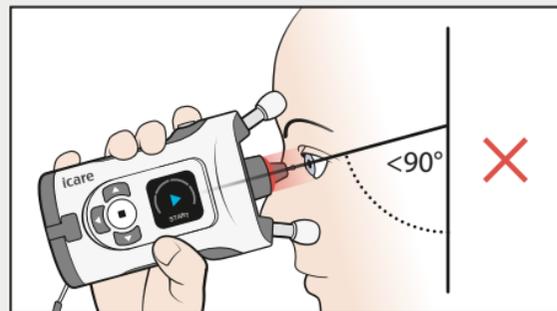


如果探頭底座上的紅燈亮起，則表示眼壓計向下傾斜的角度過大。你應該拉直姿勢，抬起下巴。


下一節將說明如何定位眼壓計。

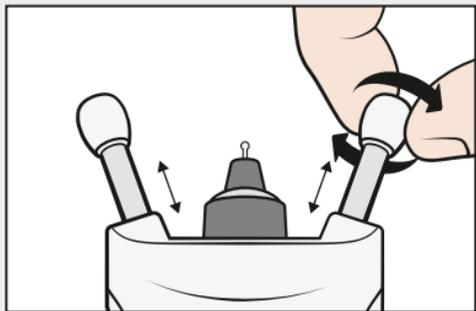

測量前，將前額支架和臉頰支架調整到正確長度。從最大長度開始調整支架。

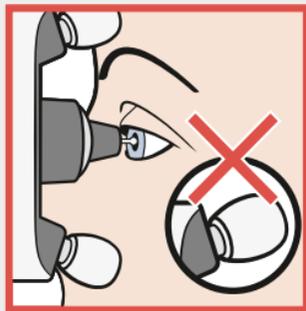


每次只按兩下稍微縮短支架，以防止眼壓計離眼睛太近。

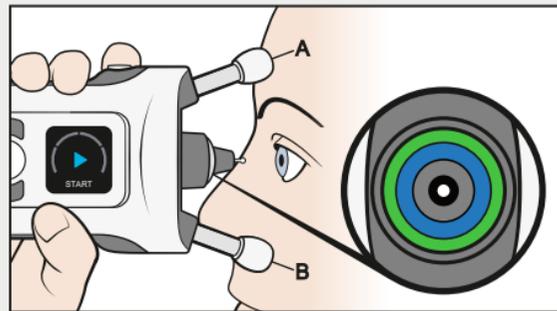


將眼壓計靠在臉上，並查看探頭底座。當探頭底座中的藍色環和綠色環對稱時，則表示探頭垂直指向眼睛中心。




警告！僅有探頭可接觸眼睛。不要用眼壓計的其他部件碰觸眼睛。切勿用眼壓計戳眼睛。

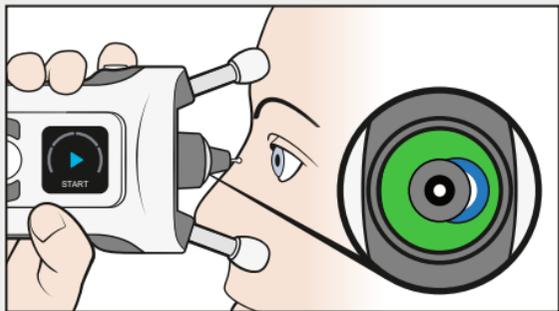




如果色环不对称，则说明探头未垂直指向眼睛中心。纠正眼压计的位置。

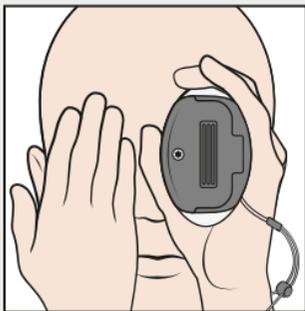

双眼睁开。遮住未测试的眼睛有助于更清晰地看到色环。

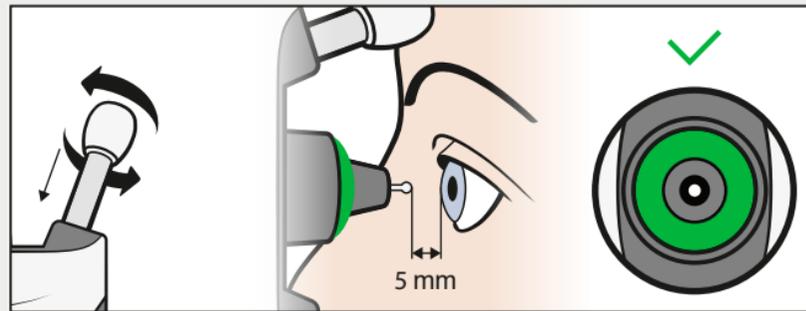


顺时针旋转时每次按两下以稍微缩短支架，直到您只看到对称的绿色环。眼压计现在与您的眼睛保持在正确距离。

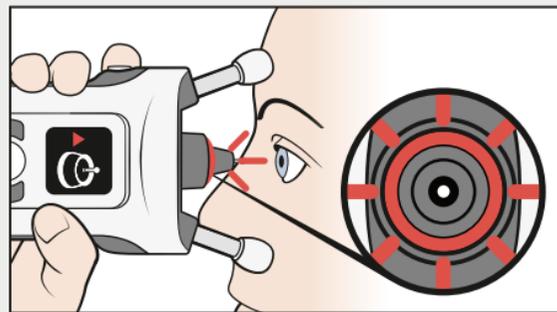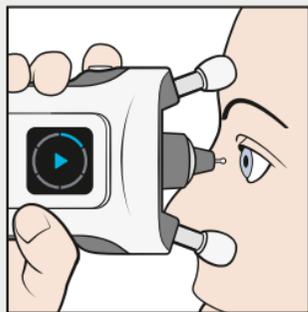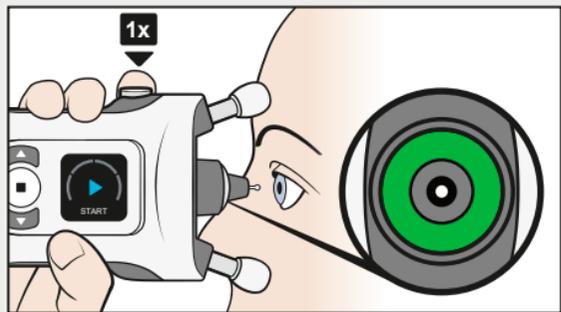

当您只看到对称的绿色环时，开始测量。按一次测量按钮 。探头会轻轻碰触您的眼睛。

听到一次哔声表示测量成功。继续测量，直到听到一声长哔声，并且探头底座中的指示灯熄灭。

如果探头底座闪烁红光，并且听到多次哔声，则表示测量失败。请参阅第 17 页的**故障诊断**。

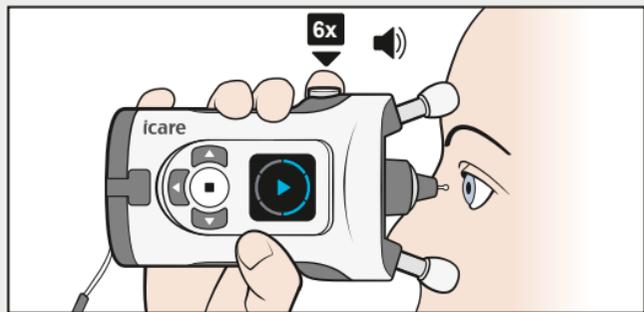


测量程序包含六次测量。


**提示：**您还可以通过按住测量按钮  来执行测量程序，直到完成所有六次测量。




成功进行所有六次测量后，您会听到更长的蜂鸣声，看到探头底座中的指示灯关闭，并在显示屏上看到结果。

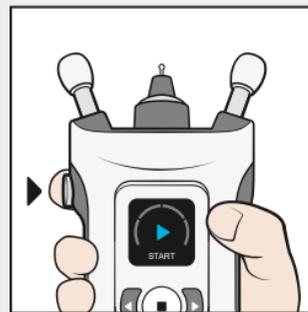


按一下测量按钮 ，然后对另一只眼睛也进行测量。

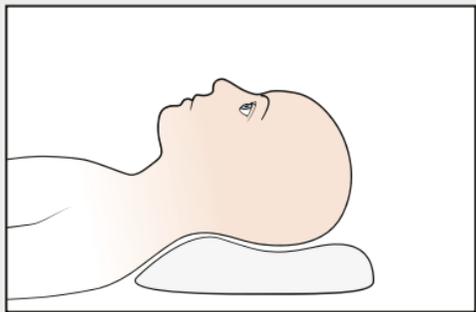


测量前，请躺下一会儿。

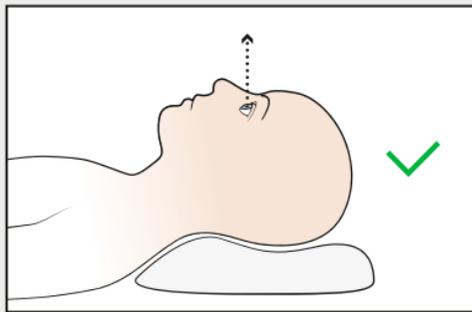


在脖子后面放一个枕头，以背部感到舒适为宜。直视前方。

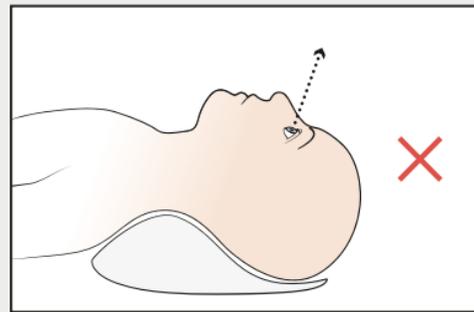


避免向后弯曲头部。

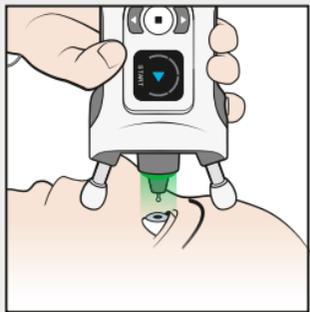

将眼压计以 90 度角放在脸上，然后按照之前的指示进行测量。

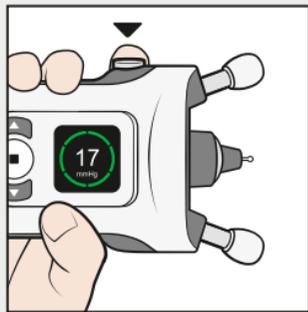


成功完成一次测量后，按一下测量按钮 ，然后对另一只眼睛也进行测量。

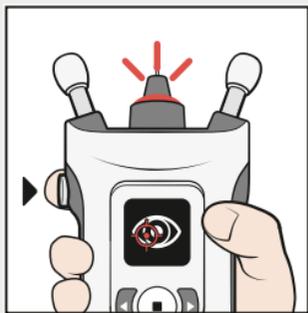


如果發生錯誤，探頭底座將閃爍紅光。显示屏和声音会指示误差源。

查看顯示螢幕，按一下測量按鈕 ，進行必要的修正，然後重複測量。

图标	显示文字	声音	问题	解决方案
	太远	3 長 	探头离眼睛太远。	按一下測量按鈕  確認錯誤。縮短前額支架和臉頰支架。
	太近	5 短 	探头离眼睛太近。	按一下測量按鈕  確認錯誤。拉長前額支架和臉頰支架。
	未正确对齐	2 短 	探头未垂直于角膜，或探头碰到眼睑或睫毛。	按一下測量按鈕  確認錯誤。調整眼壓計位置，使探頭垂直於眼睛中心。保持眼睛正常睜開。
	重复	2 短 	探头移动时出现问题。	按一下測量按鈕  確認錯誤。再次測量。
	检测错误	2 短 	传感器无法识别要测量的眼睛（右眼或左眼）。	按 ，然后按 ，直到显示屏上显示要测量的眼睛（右眼或左眼）。按 ，或按返回按钮取消测量。

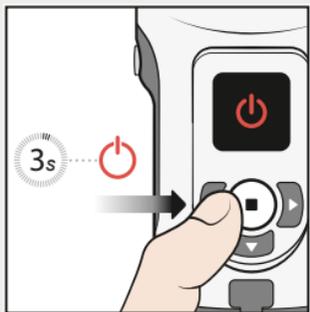


按住「選擇」按鈕 ，直到聽到 3 聲蜂鳴聲，顯示螢幕隨即關閉。

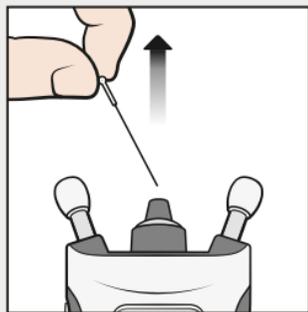

拆下探頭並將其放回探頭容器中。



妥善處理探頭和容器，並將其放在混合垃圾箱中。

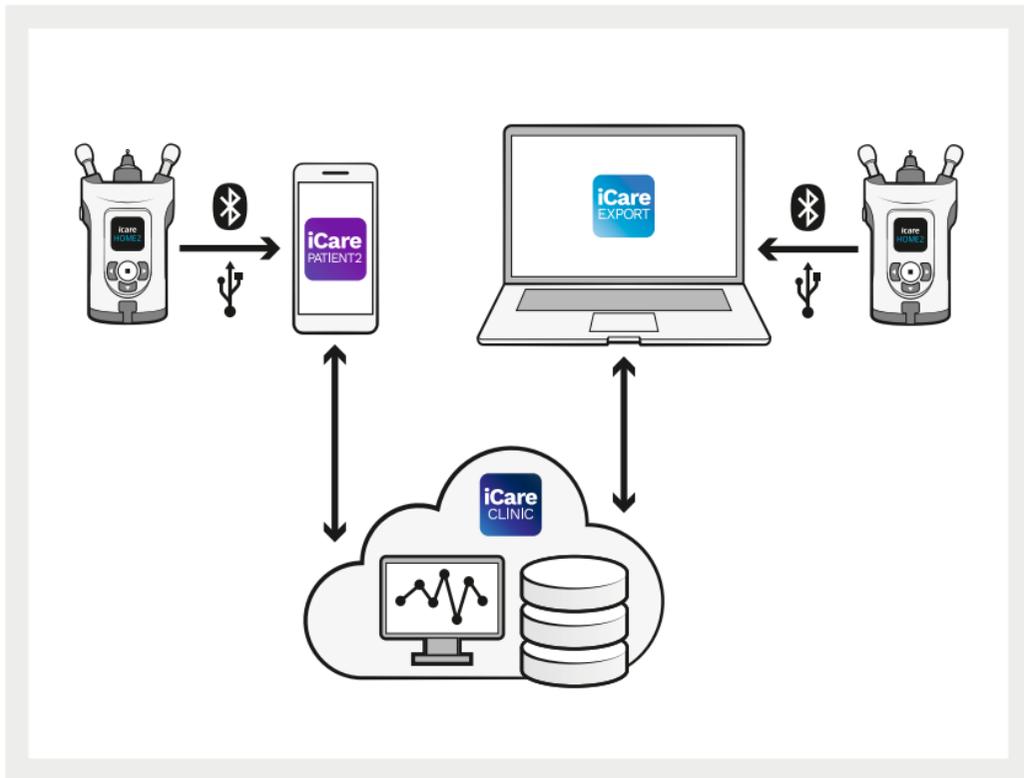

现在，您可以通过移动设备上的 iCare PATIENT2 应用程序或计算机上的 iCare EXPORT 软件，将测量结果传输到医生的 iCare CLINIC 或您的 iCare CLOUD 私人帐户。



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

电话：+358 9 8775

1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com



如需了解更多信息，  
请阅读使用手册。



**icare**

iCare 是 iCare Finland Oy 的注册商标。Icare Finland Oy、Icare USA, Inc.、iCare World Australia Pty Ltd 和 Centervue S.p.A. 隶属于 Revenio Group，代表 iCare 品牌。所有产品、配件、服务或优惠并非在每个市场均得到批准或提供，且经批准的标签和说明可能因国家/地区而异。产品规格可能会因设计和交付范围的变化以及持续的技术发展而变化。