

繁體中文

iCare HOME2

iCare HOME2
快速指南

快速指南

icare



在使用眼壓計之前，請閱讀本簡易指南並觀看 HOME2 使用者說明影片。逐步按照說明操作。



有關安全資訊，在使用眼壓計之前，請閱讀《使用手冊》中的第 1 章。

如果您需要使用 iCare HOME2 眼壓計的說明，請聯繫您的醫療保健專業人員。



預防措施！ 在進行測量之前，請將眼壓計的時間從眼壓計的設定手動更新到您的本地時間，或者透過將眼壓計連接到 iCare PATIENT2 應用程式或 iCare EXPORT 軟體自動更新到本地時間。

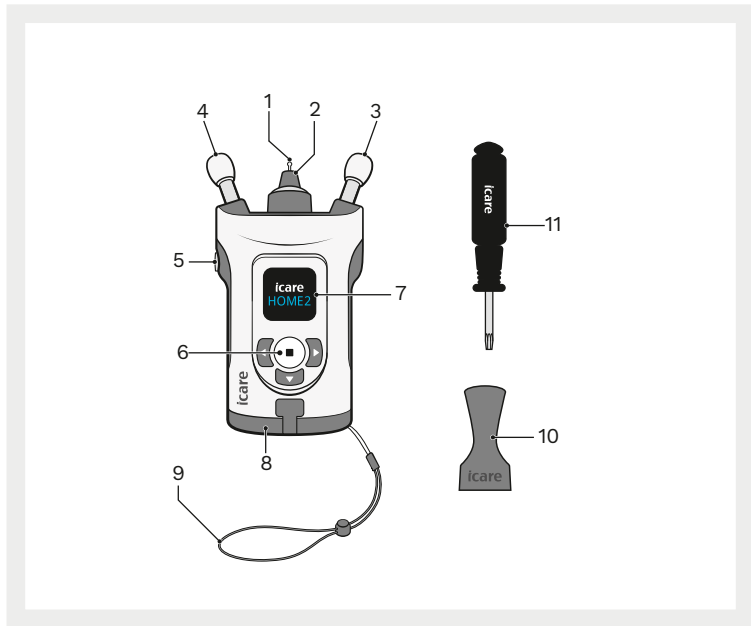


步驟


頁碼

1	插入電池	5
2	插入探頭	6
3	打開	7
4	更正測量位置	8
5	調整支架並定位眼壓計	9
6	測量眼壓	11
7	以仰臥姿勢測量眼壓	13
8	疑難排解	15
9	關閉眼壓計並妥善處理探頭	17


眼壓計零件



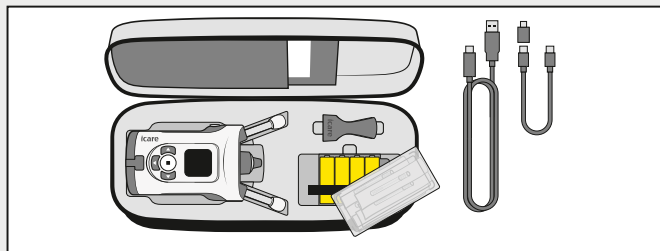
- 1 探頭
- 2 探頭底座
- 3 臉頰支架
- 4 額頭支架
- 5 測量按鈕
- 6 選擇按鈕
- 7 顯示螢幕
- 8 電池蓋
- 9 腕帶
- 10 探頭塗敷器
- 11 螺絲起子 Torx TX8




電池在探頭箱下的眼壓計攜帶箱中。

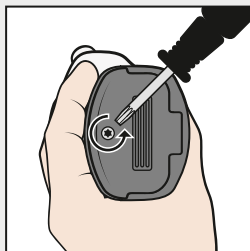


使用螺絲起子打開電池蓋。

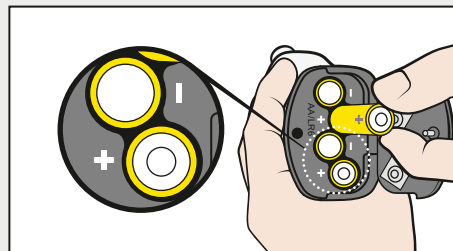


插入電池，然後關閉蓋子。

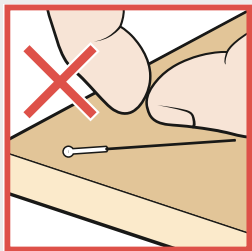


如果探頭碰到了您的手、桌子或其他非無菌表面，請勿使用該探頭。

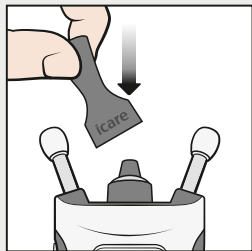

將探頭塗敷器放在探頭底座上。

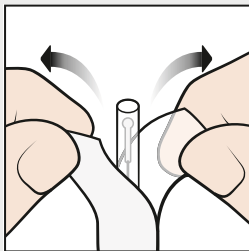


打開包裝。

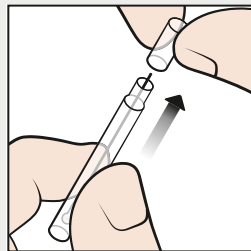


取下蓋子。




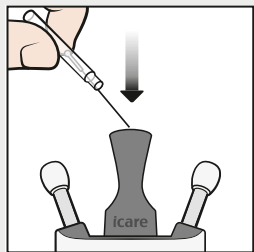
警告！為防止污染，請將未使用的探頭放在包裝盒中。請勿觸摸裸露的探頭。如果探頭接觸桌子或地板等非無菌表面，請勿使用該探頭。




將探頭從容器中放入探頭塗敷器。

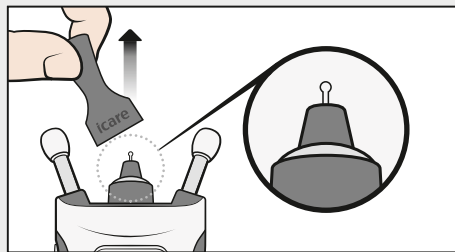


拆下探頭塗敷器。

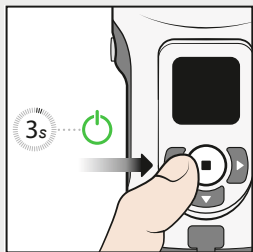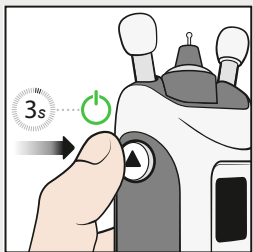


按下 ，直到聽到「
嗶」聲。顯示螢幕上便
會顯示「開始」字樣。

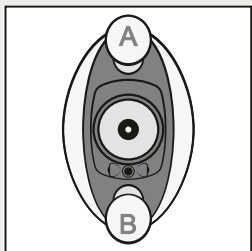
或者，按下  直到聽到「
嗶」聲。
然後再次按下  以進入測量模式。
顯示螢幕上便會顯示「開始」字樣。



額頭支架 A 放在額頭上，臉頰支架 B 靠在臉頰上。

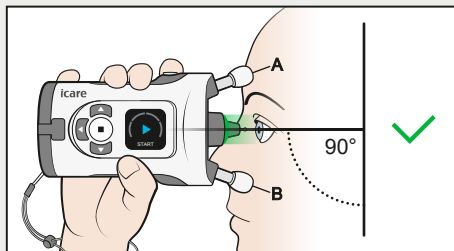


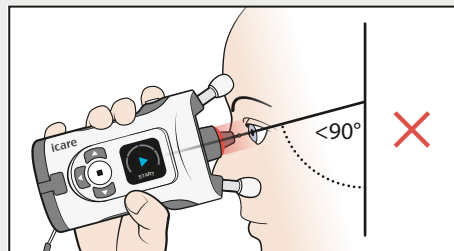直視前方，眼壓計與臉部呈 90 度角。探頭距離您的眼睛大約 5 公釐，並垂直於眼睛中心。




如果在探頭底座中看到紅燈，則表示眼壓計向下傾斜太多。您應該拉直姿勢，抬起下巴。

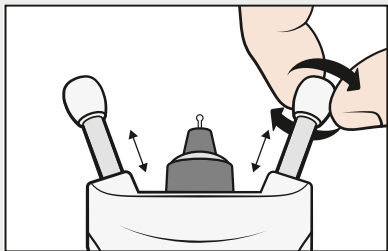
下一節將說明如何定位眼壓計。



測量前，將前額和面頰支架調整到正確的長度。從最大長度的支架開始。

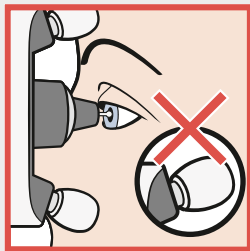


支架一次只能縮短兩格，以防止眼壓計離眼睛太近。

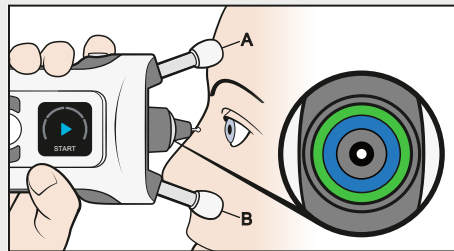


將眼壓計放在臉上，並查看探頭底座。當探頭底座中的藍色和綠色光環對稱時，探頭垂直於眼睛中心。



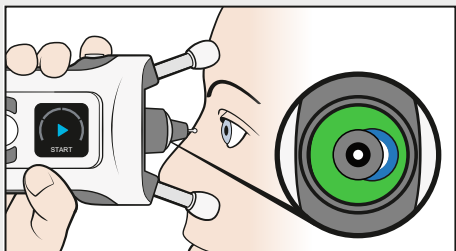
警告！只有探頭能觸碰眼睛。不要用眼壓計的其他部分觸碰眼睛。不要用眼壓計戳眼睛。




如果光環不對稱，則說明探頭沒有垂直於眼睛中心。更正眼壓計的位置。

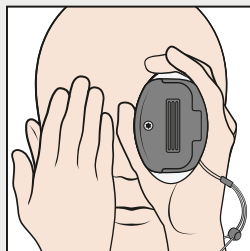

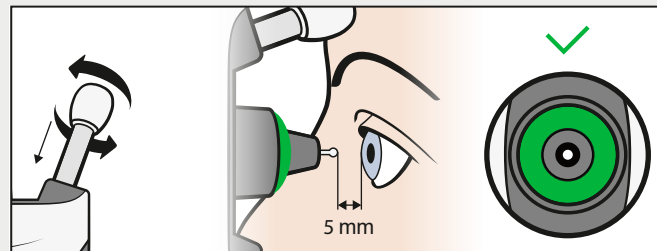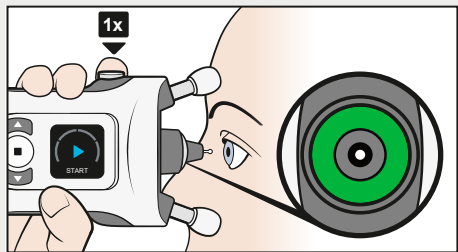
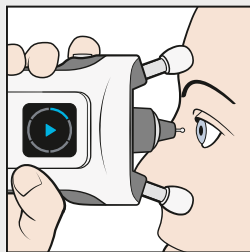
睜開雙眼。遮住未測試的眼睛可能有助於您更清楚地看到光環。




透過順時針旋轉來縮短支架（每次縮短兩格），直到您只看到對稱的綠色光環。眼壓計現在與眼睛的距離正確。






當您只看到對稱的綠色光環時，請開始測量。按一下「測量」按鈕 。探頭會輕輕接觸您的眼睛。



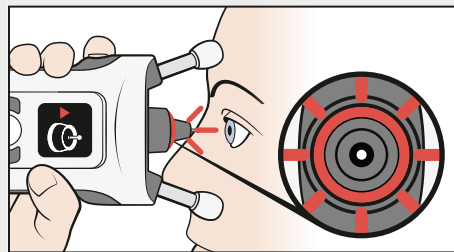
單聲「嗶」聲表示測量成功。繼續測量直到聽到長音，探頭底座中的指示燈便會關閉。



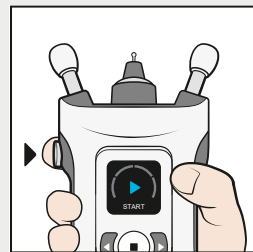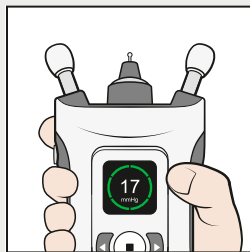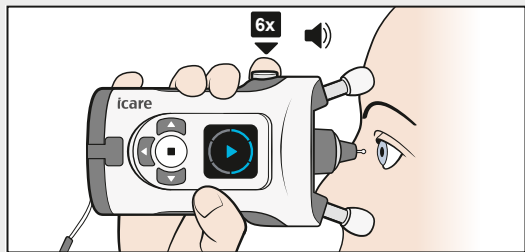
如果探頭底座閃爍紅光，並且聽到多次「嗶」聲，則表示測量未成功。請參閱第 17 頁的**疑難排解**。




測量程序包含六次測量。


提示：您也可以透過按住「測量」按鈕  進行測量程序，直到所有六次測量都完成。

成功進行所有六次測量後，您會聽到更長的蜂鳴聲，探頭底座中的指示燈將關閉，您可在顯示螢幕上看到結果。

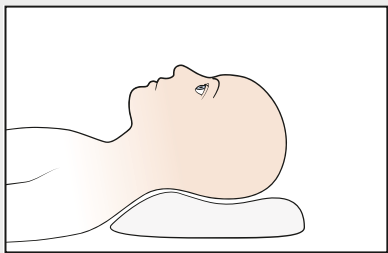
按一下「測量」按鈕 ，然後在另一隻眼睛上重複測量。




開始測量前，請躺下片刻。

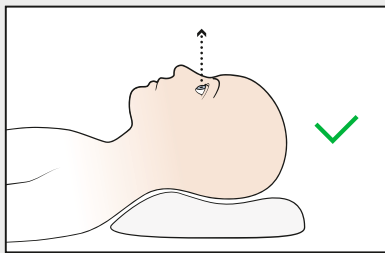


在脖子後方放枕頭，以保持舒適的姿勢。直視前方。

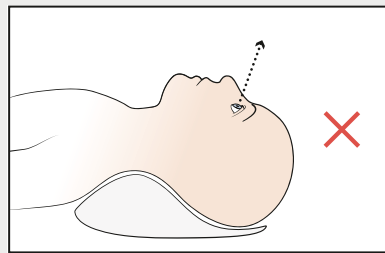

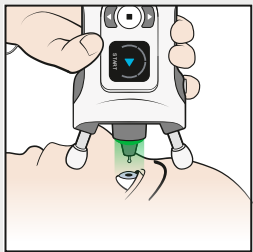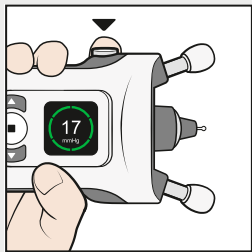
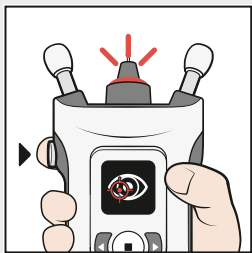
避免向後彎曲頭部。



將眼壓計以 90 度角放在臉上，然後按照之前的指示進行測量。




測量成功後，按一下「測量」按鈕 ，然後在另一隻眼睛上重複測量。




如果發生錯誤，探頭底座將閃爍紅光。顯示螢幕和聲音會指示錯誤的來源。

查看顯示螢幕，按一下測量按鈕(▶)，進行必要的修正，然後重複測量。


圖示	顯示文字	聲音	問題	解決方案
	距離太遠	3 長 	探頭距離眼睛太遠。	按一下測量按鈕  確認錯誤。縮短額頭和臉頰支架。
	距離太近	5 短 	探頭距離眼睛太近。	按一下測量按鈕  確認錯誤。延長額頭和臉頰支架。
	未正確對齊	2 短 	探頭未垂直於角膜，或探頭碰到眼瞼或睫毛。	按一下測量按鈕  確認錯誤。調整眼壓計位置，使探頭垂直於眼睛中心。保持眼睛正常睜開。
	重複	2 短 	探頭的移動有問題。	按一下測量按鈕  確認錯誤。再次測量。
	偵測錯誤	2 短 	感測器無法識別測量的眼睛（右眼或左眼）。	按  ，然後按下  ，直到顯示螢幕上顯示正確的那隻眼睛（右眼或左眼）。按  ，或按返回按鈕取消測量。

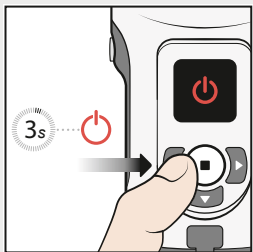


按住「選擇」按鈕
◻，直到聽到 3 聲
蜂鳴聲，顯示螢幕
隨即關閉。

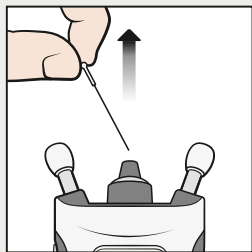

拆下探頭並將其放回
探頭容器中。

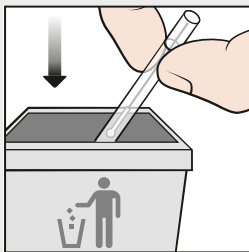

妥善處理探頭和容器，
並將其放在混合垃圾
箱中。

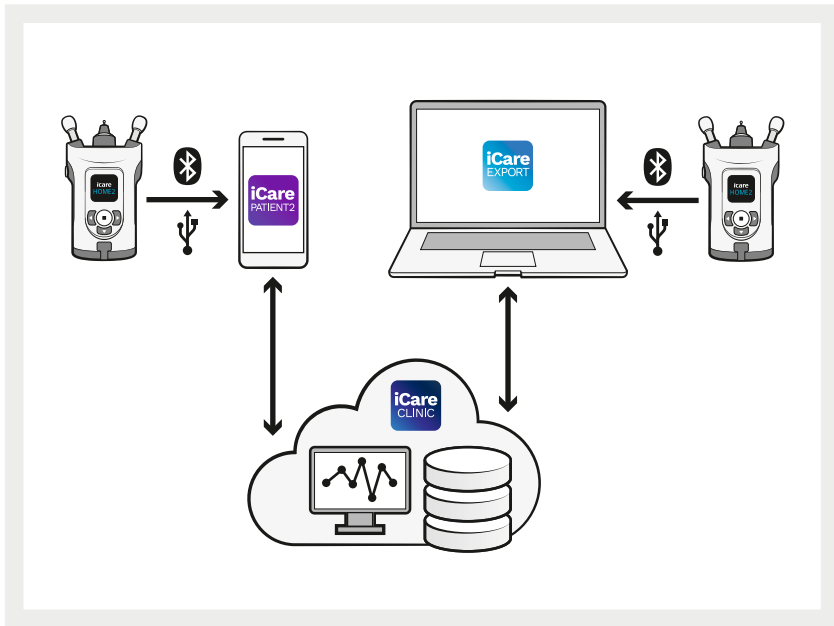

現在，您可以透過行動裝置上的 iCare PATIENT2 應用程式或電腦上的 iCare EXPORT 軟體，將測量結果傳輸到醫生的 iCare CLINIC 或 iCare 雲端中您的私人帳戶。



Icare Finland Oy

Äyritie 22

FI-01510 Vantaa, Finland

電話：+358 9 8775 1150

info@icare-world.com



有關詳細資訊，
請閱讀說明手冊。



www.icare-world.com

icare

iCare 是 Icare Finland Oy 的註冊商標。Icare Finland Oy、Icare USA, Inc.、iCare World Australia Pty Ltd 和 Centervue S.p.A. 是 Revenio Group 的一部分，代表 iCare 品牌。所有產品、配件、服務或優惠並非在每個市場均已獲批准或提供，且經批准的標籤和說明可能因國家/地區而有所不同。產品規格可能會因應設計和供貨範圍的變化及技術不斷的發展而產生改變。