



iCare CLINIC ja EXPORT Käyttöohje potilaille

iCare CLINIC (tyyppi: TS02) ja iCare EXPORT (tyyppi: TS03) – käyttöohje potilaille

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa englanninkielinen versio on pätevä.

Copyright © 2023 Icare Finland Oy

Valmistettu Suomessa

Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen:

Asetus (EU) 2017/745 lääkinnällisistä laitteista



Icare Finland Oy

Äyritie 22, FI-01510 Vantaa

Puh. +358 9 8775 1150

www.icare-world.com, info@icare-world.com

Contents

1	Turvallisuusohjeet.....	4
2	Johdanto.....	4
	2.1 Järjestelmän esittely.....	4
	2.2 Muut ohjeasiakirjat	5
3	Käyttötarkoitus.....	5
4	Käytön aloittaminen	5
	4.1 Asennus ja järjestelmävaatimukset	5
	4.2 Käynnistys ja sammutus.....	9
	4.3 iCare HOME(2) -silmänpainemittarin, iCare CLINIC -palvelun ja iCare EXPORT -sovelluksen yhteiskäyttö	10
	4.4 iCare CLINIC -palvelun käyttäminen.....	11
	4.5 Silmänpaineen mittaustulosten siirtäminen iCare HOME- tai iCare HOME2 -silmänpainemittarista iCare EXPORT -sovelluksen avulla	16
5	Ylläpito ja päivitykset.....	17
6	Käytön lopettaminen.....	17
7	Toiminta virhetilanteissa	17
8	Symbolit.....	18
9	Liite 1: Tekninen kuvaus.....	18
	9.1 Suositellut tietoturvakäytännöt.....	18
10	Liite 2 Järjestelmä-, virhe- ja vikailmoitukset.....	19
	10.1 iCare CLINIC	19
	10.2 iCare EXPORT	19

1 Turvallisuusohjeet



HUOMAUTUS! iCare HOME(2) -silmänpainemittarin kellon on oltava oikeassa ajassa mittauksen aikana. Kellonaika saattaa olla tarpeen päivittää, jos silmänpainemittaria on säilytetty ilman paristoja, jos paristot ovat lopussa tai jos silmänpainemittarin käyttäjä on matkustanut uudelle aikavyöhykkeelle. Näissä tilanteissa suositellaan liittämään silmänpainemittari mukana toimitetulla kaapelilla tietokoneeseen ja käynnistämään iCare EXPORT. Kello päivittyy automaattisesti yhdistetyn tietokoneen aikaan.



HUOMAUTUS! Varmista, että tietokone, jolla iCare EXPORT -sovellusta käytetään, on oikeassa ajassa.



HUOMAUTUS! Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ennen kuin teet muutoksia hoitoosi.



HUOMAUTUS! Älä kerro iCare CLINIC -käyttäjätunnustasi ja -salasanaasi muille ohjelmiston käyttäjille.

2 Johdanto

2.1 Järjestelmän esittely

Tämä on potilaille tarkoitettu käyttöohje iCare CLINIC- ja iCare EXPORT -sovellusten käyttöön.

Ellei toisin mainita, "iCare HOME(2)" viittaa tässä käyttöohjeessa sekä ensimmäisen sukupolven iCare HOME -silmänpainemittariin että toisen sukupolven iCare HOME2 -silmänpainemittariin.

Lisätietoja PATIENT2-sovelluksen käytöstä on PATIENT2-käyttöohjeissa.

iCare CLINIC on selainpohjainen terveydenhuollon ammattilaisten hallinnoima ohjelmistopalvelu, joka on suunniteltu silmänpaineen mittaustietojen tarkasteluun. Katso ohjeet iCare CLINIC -palvelun käyttöön luvusta 4.4.

iCare EXPORT on MS Windows -PC-tietokoneelle asennettava sovellus. Se on suunniteltu iCare HOME(2) -silmänpainemittareiden mittaustulosten siirtämiseen iCare CLINIC -palvelun tietokantaan. iCare EXPORT -sovellusta voidaan käyttää myös iCare HOME(2) -silmänpainemittariin tallennettujen mittaustulosten paikalliseen tarkastelemiseen ja tallentamiseen. Katso iCare EXPORT -sovelluksen käyttöohjeet luvusta 4.5.

iCare CLOUD on potilaille tarkoitettu palvelu, jossa käyttäjä voi luoda henkilökohtaisen tilin iCare HOME(2) -mittaustulosten tallentamista ja tarkastelua varten. Lisätietoja henkilökohtaisen tilin luomisesta iCare CLOUD -palveluun on iCare HOME- tai iCare HOME2 -silmänpainemittarin aloitusoppaassa, jonka löydät tuotteen myyntipakkauksesta.

HUOMAA: iCare HOME(2) -silmänpainemittari voidaan yhdistää joko iCare CLINIC- tai iCare CLOUD -palveluun, mutta ei molempiin. Potilaat voivat tallentaa mittaustietonsa henkilökohtaiselle iCare CLOUD -tililleen, jos silmänpainemittaria ei ole rekisteröity terveydenhuollon ammattilaisen iCare CLINIC -tiliin.

iCare CLOUD- ja iCare CLINIC -käyttöliittymät ovat yhtenevät. Kun olet luonut henkilökohtaisen tilin iCare CLOUD -palvelussa, voit soveltaa tämän käyttöohjeen "4.4 iCare CLINIC -palvelun käyttäminen"-luvun ohjeita myös iCare CLOUD -palvelun käyttöön.

Tämä käyttöohje koskee iCare CLINIC -palvelun versiota 1.7.x ja iCare EXPORT -sovelluksen versiota 2.2.x, jossa x viittaa ylläpitoversioon. Tästä käyttöohjeesta tehdään uusia versioita tarvittaessa.

iCare CLINIC -palvelua käytetään tyypillisesti terveydenhuollon toimipisteissä. iCare EXPORT -sovellusta käytetään tyypillisesti terveydenhuollon toimipisteissä tai kotona.

Sovellukset eivät aiheuta kohtuuttomia jäännösriskejä tai ei-toivottuja sivuvaikutuksia, eikä niillä ole kontraindikaatioita.

Vaaratilanteet: Ilmoita sovelluksen tai sen kanssa käytetyn silmänpainemittarin käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista toimivaltaiselle terveystoimistolle sekä valmistajalle tai valmistajan edustajalle. Jos haluat ilmoittaa tästä ohjeesta löytämistäsi virheellisistä tiedoista, ota yhteyttä osoitteeseen info@icare-world.com.

2.2 Muut ohjeasiakirjat

Muut tähän järjestelmään liittyvät asiakirjat:

- iCare PATIENT2 -käyttöohje Android-laitteille
- iCare PATIENT2 -käyttöohje iOS-laitteille
- iCare PATIENT2- ja iCare EXPORT -pikaopas
- iCare HOME -käyttöohje
- iCare HOME -käyttöohje potilaille
- iCare HOME2 -käyttöohje
- iCare HOME2 -pikaopas
- iCare HOME2 -aloitusopas

3 Käyttötarkoitus

iCare CLINIC- ja iCare EXPORT -tuotteista koostuvalla ohjelmistoperheellä on seuraavat ohjelmistokohtaiset käyttötarkoitukset:

- iCare CLINIC on hoitopäätöksen tueksi tarkoitettu ohjelmisto, jota käytetään silmänpainetietojen tallennukseen ja tarkasteluun sekä tietojen siirtämiseen ulkoisiin järjestelmiin.
- iCare EXPORT on ohjelmistosovellus, joka on tarkoitettu silmänpainetietojen siirtämiseen iCare CLINIC -palveluun tai ulkoiseen järjestelmään. Sovellusta voi käyttää myös silmänpainetietojen tarkasteluun.

iCare CLINIC ja iCare EXPORT on suunniteltu sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden käyttöön.

4 Käytön aloittaminen

iCare CLINIC- ja iCare CLOUD -palveluja käytetään internet-yhteyden välityksellä. Voit käyttää iCare CLINIC -palvelua, jos terveystietojen tuottajalla on iCare CLINIC -tilaus. Kun terveydenalan ammattilainen on aktivoinut iCare CLINIC -käyttöoikeudet, saat sähköpostiviestin "Valitse iCare-tilin salasana", jossa on ohjeet palvelun käytön aloittamiseen.

Jos terveystietojen tuottajalla ei ole iCare CLINIC -tilausta, voit käyttää silmänpainetietojen tallentamiseen ja tarkasteluun iCare CLOUD -palvelua. iCare CLOUD -palvelun käytön aloittamista varten sinun on luotava henkilökohtainen tili iCare HOME2 -myyntipakkauksessa olevan aloitusoppaan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA: Mittaustulokset eivät ole käytettävissä iCare CLINIC- tai iCare PATIENT2 -palvelussa, jos ne on otettu ennen silmänpainemittarin rekisteröintiä iCare CLINIC- tai iCare CLOUD -palveluun.

Jotta silmänpaineen mittaustiedot voi siirtää iCare CLINIC -tietokantaan, käyttäjällä on oltava iCare EXPORT- tai iCare PATIENT2 -sovellus. iCare EXPORT -sovelluksen asennustiedoston voi ladata iCare CLINIC -palvelun Ohje-valikosta.

Lisätietoja iCare CLINIC- ja iCare EXPORT -tuotteiden asentamisesta ja käynnistämisestä on luvussa 4. Lisätietoja iCare-sovellusten tyypillisestä käytöstä on luvussa 4.3.

4.1 Asennus ja järjestelmävaatimukset

iCare CLINIC on palvelu, joka sijaitsee Internetissä sijaitsevalla palvelimella. Se ei vaadi asentamista. iCare EXPORT -sovelluksen asentamista varten sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet asennukseen käytettävällä tietokoneella.

4.1.1 iCare CLINIC- ja iCare CLOUD -palveluiden järjestelmävaatimukset

- Internet-yhteys
- Verkkoselaimen vähimmäisvaatimukset: Edge (versio 90.0.818.51 tai uudempi), Chrome (versio 100 tai uudempi), Firefox (versio 91 tai uudempi) ja Safari (versio 13.1 tai uudempi)


4.1.2 iCare EXPORT -sovelluksen järjestelmävaatimukset ja asentaminen

iCare EXPORT -sovelluksen vähimmäisvaatimukset PC-tietokoneelle:


- x86 tai x64 1 GHz:n Pentium-suoritin tai vastaava
- 512 Mt RAM-muistia
- 512 Mt kiintolevytilaa (lisäksi 4,5 Gt, jos .NET ei jo ole asennettuna; katso vaihe 1)
- USB 2.0 -yhteys
- 800 x 600 -resoluution näyttö 256 värillä
- DirectX 9 -yhteensopiva grafiikkakortti
- .NET Framework 4.6.1 tai uudempi
- Käyttöjärjestelmä: Windows 10 tai Windows 11
- Internet-yhteys (kun sovellusta käytetään tulosten siirtämiseen iCare CLINIC -palveluun)

iCare EXPORT -sovellus asennetaan PC-tietokoneelle noudattamalla seuraavia ohjeita:


1. Kaksoisnapsauta **iCare EXPORT Setup.exe** -tiedostoa. Näyttöön tulee ohjatun asennuksen ikkuna. Tietokone ilmoittaa, jos Microsoftin .NET Frameworkia ei ole asennettu. (Asenna .NET Framework noudattamalla tietokoneen näytölle tulevia ohjeita.) Napsauta **Next (Seuraava)**.

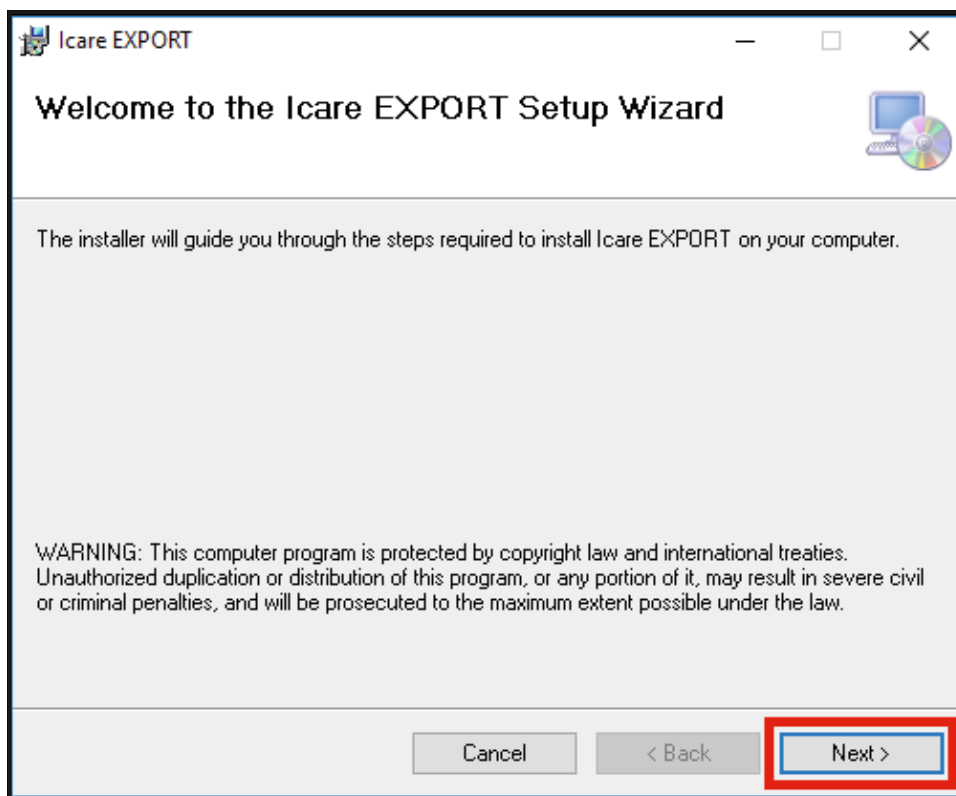


2. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään hyväksymään käyttöoikeusehdot. Vahvista ehdot merkitsemällä **I Agree (Hyväksyn)** ja valitse sitten **Next (Seuraava)**.

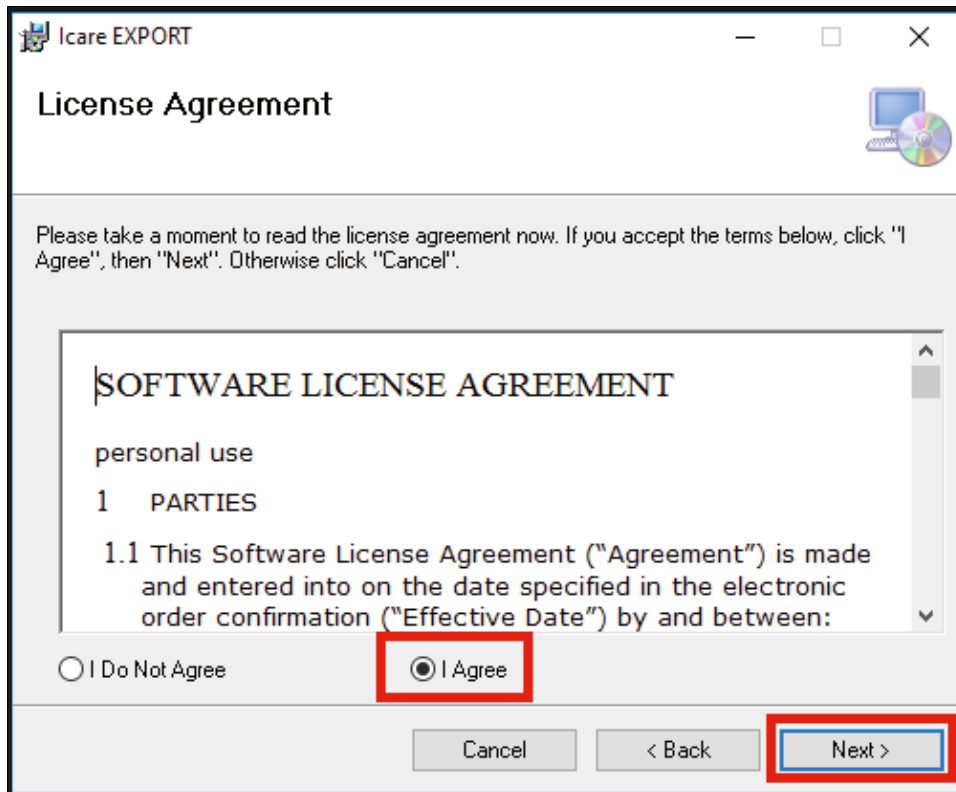


3. Näyttöön tulee asennuskansion valintaikkuna. Valitse kansio, johon sovellus asennetaan. Valitse **Everyone (Kaikki)**, jos haluat, että iCare EXPORT näkyy kaikille tietokoneen käyttäjille. Valitse **Just me (Vain minä)**, jos haluat rajata sovelluksen käyttöoikeuden vain sen asentajalle. Napsauta **Next (Seuraava)**.

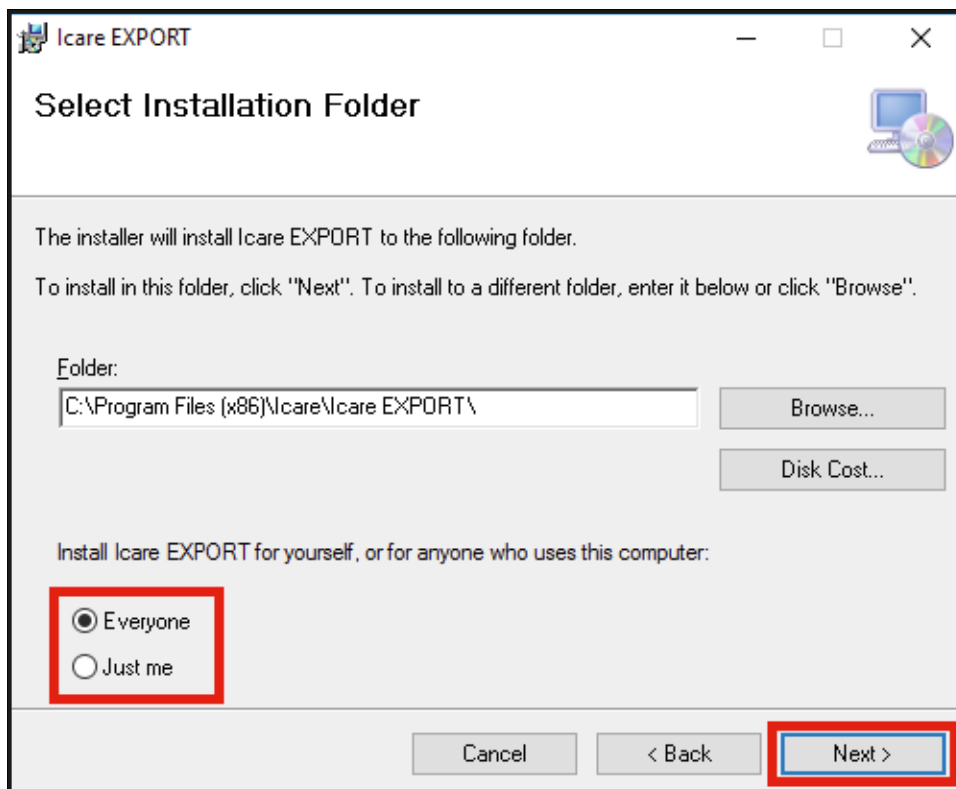


4. Valitse, asennetaanko iCare EXPORT pilvitila vai paikallinen tila. Pilvitilassa (cloud mode) iCare EXPORT lähettää mittaustulokset terveydenalan ammattilaiselle iCare CLINIC -palvelun avulla. Paikallisessa tilassa (local mode) silmänpaineen mittaustuloksia voidaan hallita paikallisesti käytetyllä tietokoneella. Tilan asetusta voi muuttaa iCare EXPORT -sovelluksen asentamisen jälkeen.

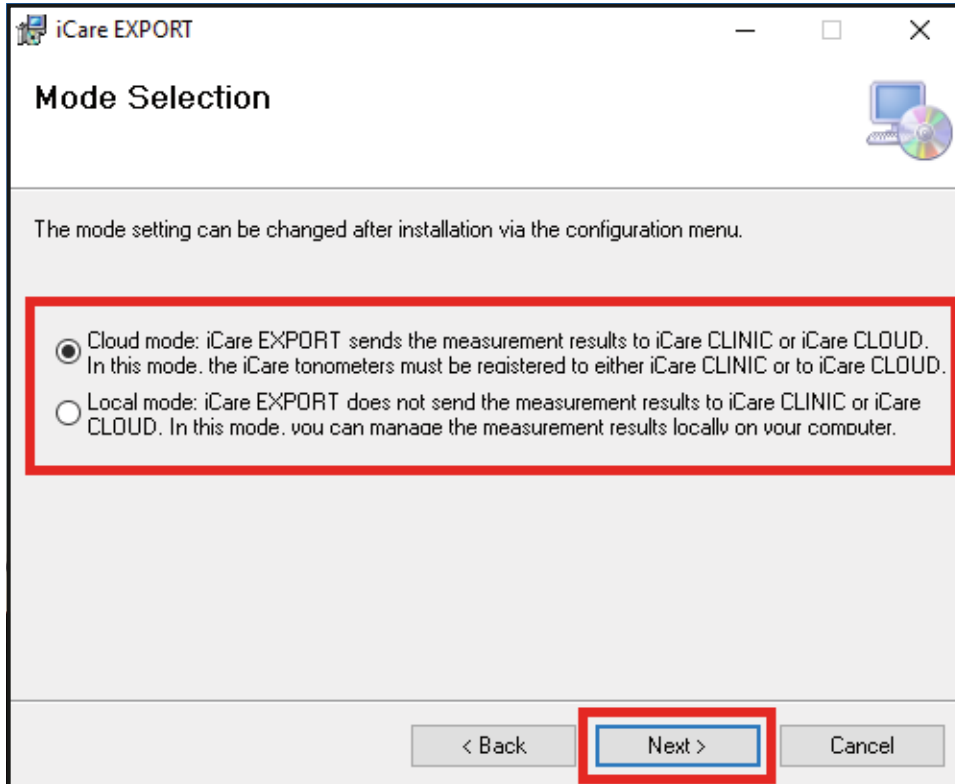

5. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan iCare EXPORT -asennus. Käynnistä asennus napsauttamalla **Next (Seuraava)**.

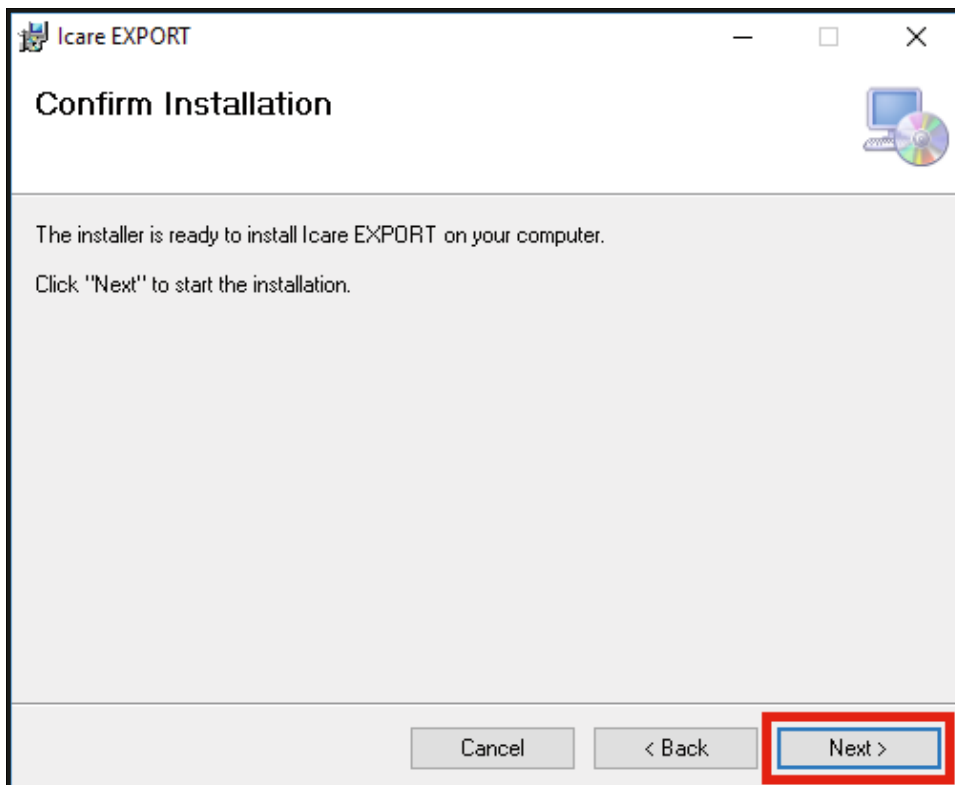


6. Näyttöön tulee ikkuna, jossa kerrotaan asennuksen olevan valmis. Viimeistele asennus napsauttamalla **Close (Sulje)**.

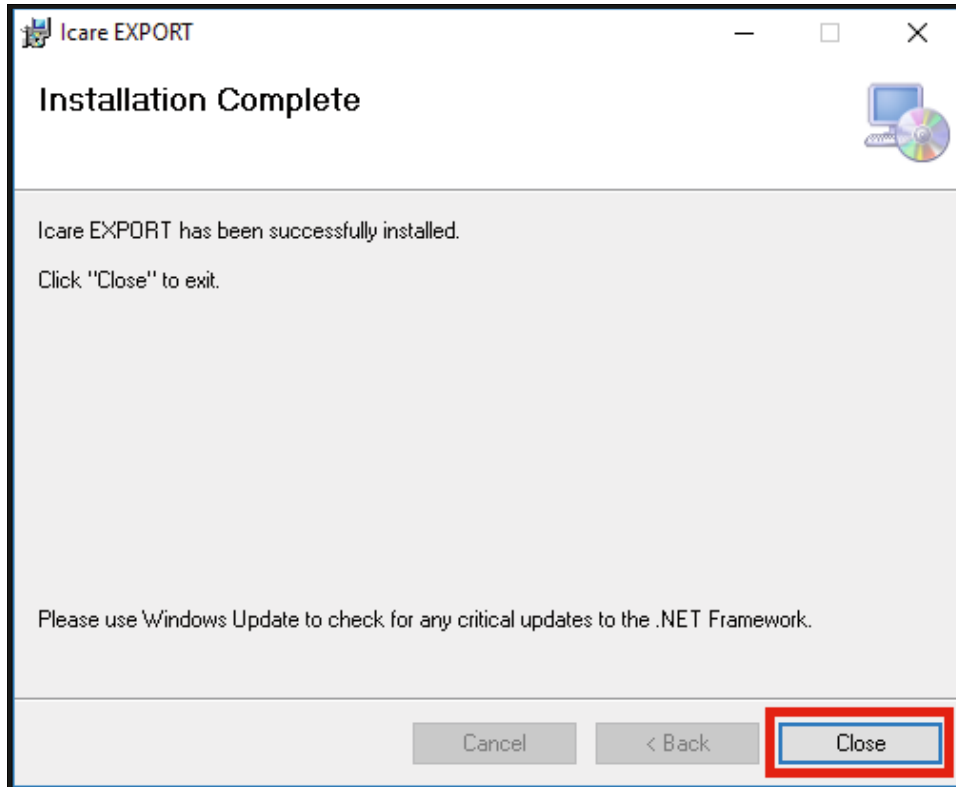

Voit nyt aloittaa iCare EXPORT -sovelluksen käytön. Käynnistä sovellus napsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa iCare EXPORT -kuvaketta.

4.2 Käynnistys ja sammutus

iCare CLINIC käynnistetään avaamalla verkkoselaimella kirjautumissivu ja kirjautumalla sisään sähköpostiosoitteella ja salasanalla (kun terveydenalan ammattilainen on aktivoinut pääsyt iCare CLINIC -palveluun ja olet saanut sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään määrittämään salasana). Muut sisäänkirjautumisvaihtoehdot -välilehti on tarkoitettu vain ammattikäyttäjille.

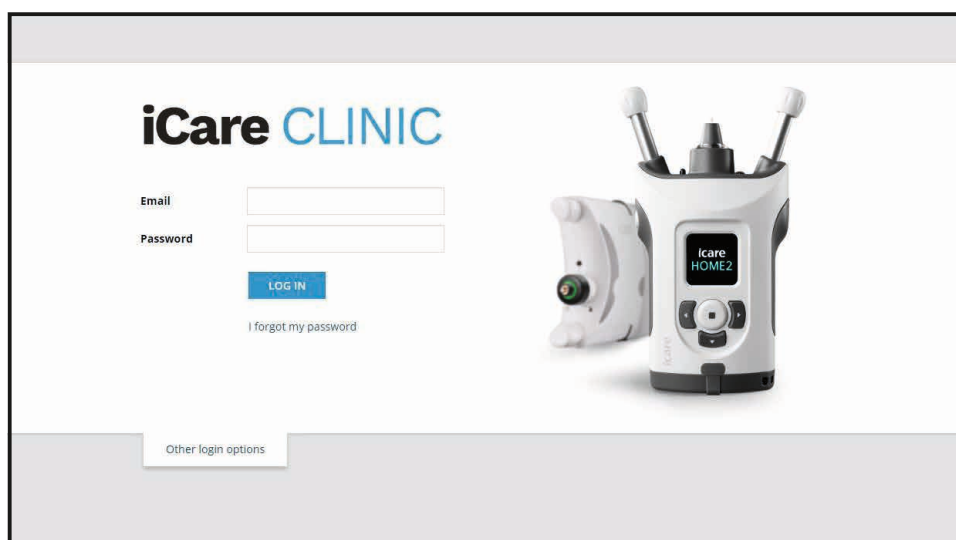

Voit lopettaa iCare CLINIC -palvelun käytön ja sulkea sen valitsemalla uloskirjautumistoiminnon käyttöliittymän oikean yläkulman pudotusvalikosta.

Measurement time	Device type	Device name	IOP (OD)	Quality OD	IOP (OS)	Quality OS	Controls
26/02/2019 08:21	Icare HOME	Mervi's HOME2	-		13	Good	<input type="checkbox"/> Exclude
26/02/2019 08:21	Icare HOME	Mervi's HOME2	10	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
19/02/2019 09:59	Icare		20		-		<input checked="" type="checkbox"/> Exclude
18/02/2019 10:27	GAT		11		15		<input type="checkbox"/> Exclude
15/02/2019 16:55	Icare HOME	Mervi's HOME2	-		14	Excellent	<input type="checkbox"/> Exclude
15/02/2019 16:55	Icare HOME	Mervi's HOME2	11	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
05/12/2018 15:08	No device specified		14		-		<input type="checkbox"/> Exclude
04/12/2018 15:08	No device specified		-		14		<input type="checkbox"/> Exclude
04/12/2018 15:08	No device specified		14		-		<input type="checkbox"/> Exclude
04/12/2018 15:08	No device specified		-		14		<input type="checkbox"/> Exclude

iCare EXPORT -sovellus käynnistetään napsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa kuvaketta. Kuvake on luotu iCare EXPORT -sovelluksen asennuksen yhteydessä.



Voit sammuttaa iCare EXPORT -sovelluksen napsauttamalla sovellusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemiskuvaketta (x).

4.3 iCare HOME(2) -silmänpainemittarin, iCare CLINIC -palvelun ja iCare EXPORT -sovelluksen yhteiskäyttö

iCare HOME(2) -silmänpainemittaria, iCare CLINIC -palvelua ja iCare EXPORT -sovellusta käytetään yleensä seuraavasti:

1. Suorita omatoimiset mittaukset terveydenalan ammattilaisen ohjeiden mukaan.

⚠️ HUOMAUTUS! iCare HOME(2) -silmänpainemittarin kellon on oltava oikeassa ajassa mittauksen aikana. Kellonaika saattaa olla tarpeen päivittää, jos silmänpainemittaria on säilytetty ilman paristoja, jos paristot ovat lopussa tai jos silmänpainemittarin käyttäjä on matkustanut uudelle aikavyöhykkeelle. Näissä tilanteissa suositellaan liittämään silmänpainemittari mukana toimitetulla kaapelilla tietokoneeseen ja käynnistämään iCare EXPORT. Kello päivittyy automaattisesti yhdistetyn tietokoneen aikaan.

⚠️ HUOMAUTUS! Varmista, että tietokone, jolla iCare EXPORT -sovellusta käytetään, on oikeassa ajassa.

2. Kun olet itse mitannut silmänpaineesi kerran tai useampia kertoja, voit siirtää silmänpaineen mittaustulokset silmänpainemittarista iCare CLINIC- tai iCare CLOUD -tietokantaan iCare EXPORT -sovelluksella. Voit siirtää tiedot itsellesi sopivaan aikaan.
3. Sen jälkeen voit kirjautua iCare CLINIC -palveluun ja tarkastella mittaustuloksia terveystietojen tuottajan luvalla. **Vaihtoehtoisesti** voit kirjautua iCare CLOUD -palveluun tunnistetiedoilla, jotka saivat luodessasi henkilökohtaisen tilisi.

Huomaa, että voit käyttää mittaustulosten lataamiseen iCare HOME(2) -silmänpainemittarista joko tietokoneen iCare EXPORT -sovellusta tai älypuhelimien tai tabletin iCare PATIENT(2) -sovellusta.

4.4 iCare CLINIC -palvelun käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan iCare CLINIC -palvelun käytöstä. iCare CLOUD -palvelua käytetään samalla tavalla kuin henkilökohtaista iCare CLOUD -tiliä, joten nämä ohjeet pätevät myös sen käyttöön.

4.4.1 iCare CLINIC -palvelun käyttöliittymän esittely

Patient profile (Potilaan tiedot) sisältää tarpeellisia tietoja sinusta, esimerkiksi sinulle määritetyt otsa- ja poskitukien asetukset. Tarkista ennen mittauksia, että laitteen asetukset ovat samat kuin mitkä on merkitty potilaan tietoihin. Et voi muokata potilaan tietoja itse.

Measurement	RIGHT	LEFT
Forehead	1	1
Cheek	1	1

HOME use periods (HOME-jaksot) -luettelossa näkyvät jaksot, joiden aikana olet aiemmin itse mitannut silmänpaineen iCare HOME(2) -silmänpainemittarilla.

Period start	Period end	Device type	Device name	Measurement count
03/07/2018 14:13	04/07/2018 00:00	Icare HOME	Icare HOME V	11

Measurements (Mittaustulokset) -luettelossa ovat joko itse tekemiesi mittauksien (merkitty laitetypillä iCare HOME(2)) tai terveydenalan ammattilaisen tekemien mittauksien tulokset. Oletuksena näytetään

silmänpaineen mittaustulokset viimeisimmän HOME(2)-jakson ajalta. OD tarkoittaa oikeaa silmää ja OS tarkoittaa vasenta silmää.

Measurement time	Device type	Device name	IOP (OD)	Quality OD	IOP (OS)	Quality OS	Controls
09/01/2019 13:20	No device specified		20		-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:01	No device specified		19		-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:00	Icare HOME	Jeff's device	-		8	Rejected	<input checked="" type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:00	Icare HOME	Jeff's device	10	Good	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:59	Icare HOME	Jeff's device	-		10	Excellent	<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:59	Icare HOME	Jeff's device	10	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:58	Icare HOME	Jeff's device	-		10	Excellent	<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:57	Icare HOME	Jeff's device	8	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:55	Icare HOME	Jeff's device	7	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:48	Icare HOME	Jeff's device	7	Good	-		<input type="checkbox"/> Exclude

4.4.2 Silmänpainemittarin aktivoinnin poistaminen iCare CLOUD -sovelluksessa

Voit poistaa silmänpainemittarin aktivoinnin iCare CLOUD -sovelluksessa. Valitse **Devices (Laitteet)** ja valitse sitten **Deactivate (Poista aktivointi)**. Tämä lopettaa käynnissä olevan HOME-jaksoasi ja poistaa laitteen tililtäsi. Aktivoinnin poistamisen jälkeen et voi siirtää mittaustuloksia iCare CLOUD -tilillesi.

HUOMAA! Laitteen aktivoinnin poistaminen poistaa silmänpainemittarin pysyvästi tililtäsi.

Device name	Device type	Serial number	Firmware version	Owner	Status
2111AH999	ICARE_HOME2	2111AH999	-	Peter Harrison	Active Deactivate
Created	Latest measurement	Last attached	Last detached	Last modified	
23/08/2022	-	-	-	23/08/2022	

Voit edelleen nähdä mittaustulokset ja kirjautua tilillesi iCare CLOUD -palvelussa, kun olet poistanut silmänpainemittarin aktivoinnin.

4.4.3 Silmänpaineen mittaustulosten hallinta ja raporttien luominen

Silmänpaineen mittaustulokset on lueteltu **Measurements (Mittaustulokset)** -välilehdellä. OD tarkoittaa oikeaa silmää ja OS tarkoittaa vasenta silmää. Mittaustulosluettelon voi suodattaa joko antamalla **From (Alkaen)**- ja **To (Päättyn)** -päivämäärät tai valitsemalla HOME(2)-jakson **Select period (Valitse jakso)** -pudotusvalikosta.

Silmänpainemittarin mittauksen laatu näkyy näytössä olevan IOP-arvon oikealla puolella. **Excellent (Erinomainen)** tarkoittaa, että silmänpainemittarin mittauksen aikana keräämissä mittaustiedoissa on vähän vaihtelua. **Good (Hyvä)** tarkoittaa, että kerätyissä mittaustiedoissa on melko vähän vaihtelua. **Satisfactory (Tyydyttävä)** tarkoittaa, että kerättyjen mittaustietojen vaihtelu on suurempaa mutta silti hyväksyttävää mittaustuloksille, joiden arvo on korkeintaan 19 mmHg. **Rejected (Hylätty)** tarkoittaa, että kerätyissä mittaustiedoissa on suurta vaihtelua eikä silmänpaineen mittaustulosta tulisi huomioida.

iCare CLINIC Patients: Harrison, Peter HARRISON, PETER

Patient profile HOME use periods Measurements

From To Select HOME use period CLEAR FILTERS REPORT

Measurement time	Device type	Device name	IOP (OD)	Quality OD	IOP (OS)	Quality OS	Controls
09/01/2019 13:20	No device specified		20		-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:01	No device specified		19		-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:00	Icare HOME	Jeff's device	-		8	Rejected	<input checked="" type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:00	Icare HOME	Jeff's device	10	Good	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:59	Icare HOME	Jeff's device	-		10	Excellent	<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:59	Icare HOME	Jeff's device	10	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:58	Icare HOME	Jeff's device	-		10	Excellent	<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:57	Icare HOME	Jeff's device	8	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:55	Icare HOME	Jeff's device	7	Excellent	-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 15:48	Icare HOME	Jeff's device	7	Good	-		<input type="checkbox"/> Exclude

Silmänpaineraportti luodaan taulukossa olevista silmänpainetuloksista. Terveysthuollon ammattilainen voi jättää mittauksia pois raportista valitsemalla riviltä Exclude (Jätä huomiotta) -ruudun. Voit luoda raportin napsauttamalla REPORT (RAPORTTI) -painiketta. Raportissa näkyy kaavio, jossa on aika x-akselilla ja silmänpaineen mittaukset molemmista silmistä (jos molemmat on mitattu) y-akselilla.

iCare CLINIC Patients: Harrison, Peter HARRISON, PETER


Patient profile HOME use periods Measurements

From To Select HOME use period CLEAR FILTERS REPORT

Measurement time	Device type	Device name	IOP (OD)	Quality OD	IOP (OS)	Quality OS	Controls
09/01/2019 13:20	No device specified		20		-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:01	No device specified		19		-		<input type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:00	Icare HOME	Jeff's device	-		8	Rejected	<input checked="" type="checkbox"/> Exclude
14/12/2018 16:00	Icare HOME	Jeff's device	10	Good	-		<input type="checkbox"/> Exclude


Mittausaika ja yksittäisten mittausten laskettu IOP tulevat näkyviin, kun kohdistin siirretään tietokoneen hiirellä kaavion IOP-tulosten päälle. Käyttäjä voi zoomata kaaviota siirtämällä kohdistimen kaavion päälle ja pitämällä samalla tietokoneen hiiren vasenta painiketta painettuna (kaavion maalaaminen). Tietoja kuvaavat tilastot vaihtelevat sen mukaan, miten käyttäjä zoomaa, ja ne lasketaan dynaamisesti uudelleen ennen näyttämistä.

Kaavion muotoa voidaan muuttaa **Chart type (Kaavion tyyppi)** -valikosta. Kaavion tyyppi **Line (Viiva)** yhdistää esitetyt datapisteet toisiinsa suorilla viivoilla.

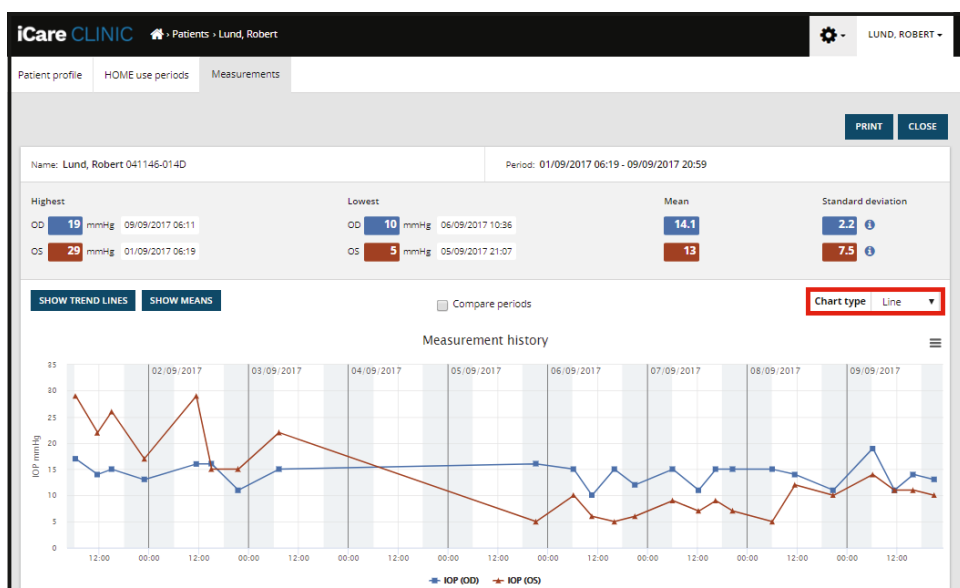


Viiva-kaaviotyyppi

Kaavion tyyppi **Scatter (Sironta)** näyttää datapisteet yhdistämättä niitä viivoilla.

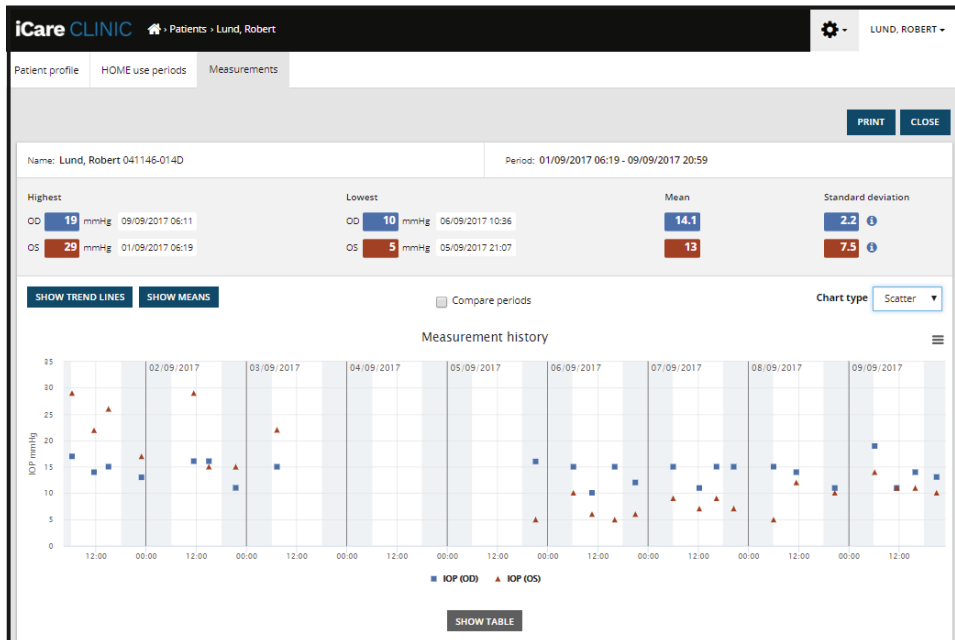


Sironta-kaaviotyyppi

Kaavion tyyppi **Diurnal (Vuorokausi)** sijoittaa kaikki silmänpainedatapisteet 24 tunnin x-akselille. Siten kaikki samaan vuorokauden aikaan mitatut datapisteet näkyvät samassa pisteessä x-akselilla. Kunkin päivän silmänpainedatapisteet yhdistetään toisiinsa suorilla viivoilla.

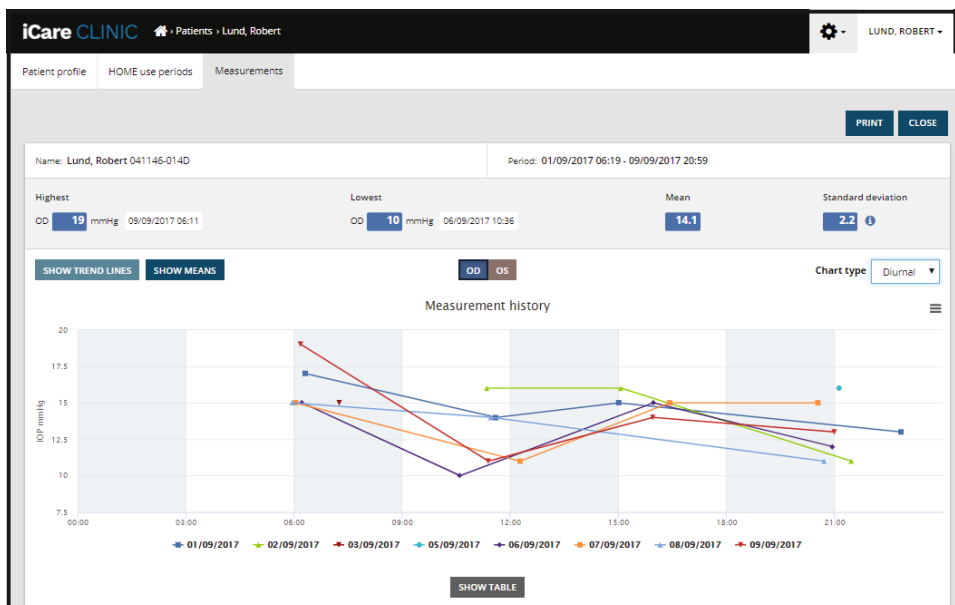


Vuorokausi-kaaviotyyppi

Diurnal Periods (Vuorokausijaksot) -kaaviotyypissä kaikki silmänpainedatapisteet sijoitetaan 24 tunnin x-akselille kolmen tunnin aikavälein. Mitatut datapisteet yhdessä näyttävät mittausten keskiarvon kullakin kolmen tunnin aikavälillä. Kunkin aikavälin silmänpainedatapisteet yhdistetään toisiinsa suorilla viivoilla. Kaaviossa näytetään kolmen tunnin aikavälien keskihajontapalkit valitulla mittausjaksolla.

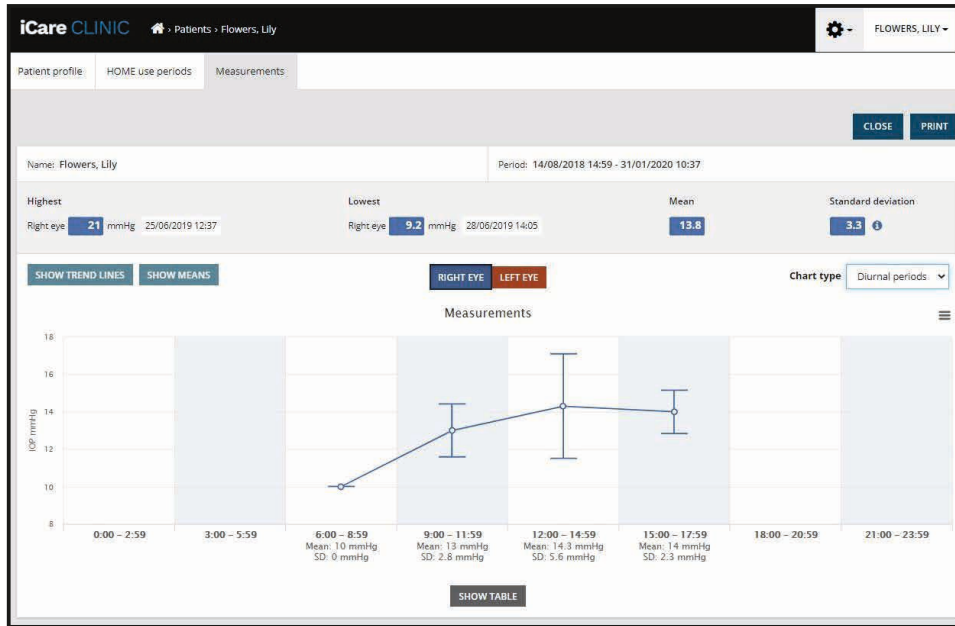

Vuorokausijaksot-kaaviotyyppi

Merkitsemällä **Compare periods (Vertaa jaksoja)** -valintaruudun, kun näytettävän kaavion tyyppi on **Line (Viiva)**, näkyvästä kaaviosta voidaan valita kaksi alajaksoa ja verrata jaksoja toisiinsa silmä kerrallaan. Alajaksot valitaan maalaamalla näytöllä oleva kaavio.

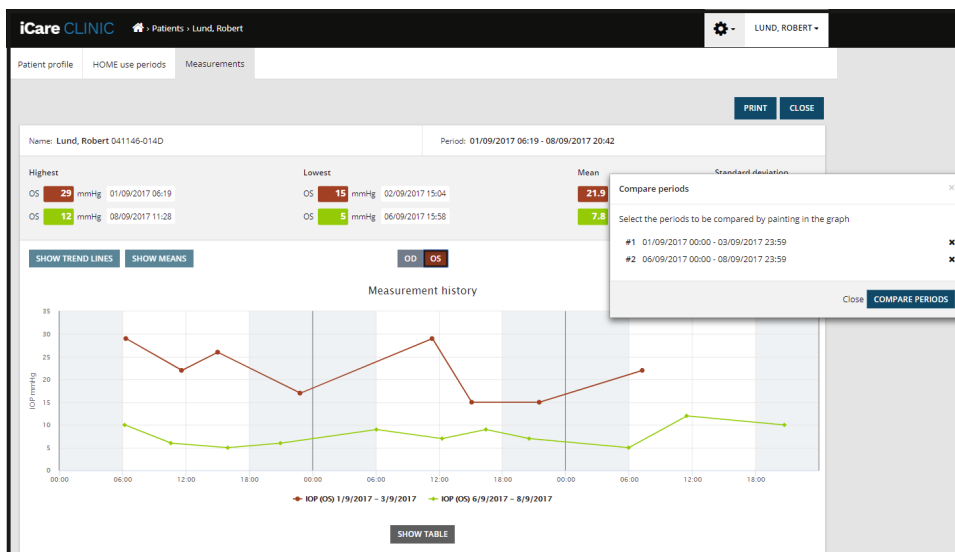

Jaksojen vertailu

Voit avata luettelon kaikista kaaviossa olevista mittauksista napsauttamalla kaavion alapuolella olevaa **SHOW TABLE (NÄYTÄ TAULUKKO)** -painiketta. Voit tulostaa koko raportin tai tallentaa sen PDF-tiedostona napsauttamalla raportin **PRINT (TULOSTA)** -painiketta. Napsauttamalla **SHOW TABLE (NÄYTÄ TAULUKKO)** -painiketta voit avata ja näyttää mittaustulokset luettelona kaavion alapuolella. Mittausluettelossa näkyy mittauspäivämäärä ja -aika, laitetyyppi, mittauksen IOP sekä laatu ja potilaan sijainti. Potilaan asento on istuva, makuulla tai kallistettu.

SHOW TABLE							
Date / Time	Device type	Device name	IOP (OD)	Quality OD	IOP (OS)	Quality OS	Position
20/05/2021 10:48	iCare HOME2	Ann's device	17	Excellent	-	-	Sitting
20/05/2021 10:47	iCare HOME2	Ann's device	-	-	16	Excellent	Sitting
20/05/2021 10:46	iCare HOME2	Ann's device	13	Excellent	-	-	Sitting
20/05/2021 10:45	iCare HOME2	Ann's device	-	-	17	Excellent	Sitting
20/05/2021 10:44	iCare HOME2	Ann's device	14	Satisfactory	-	-	Sitting
20/05/2021 10:44	iCare HOME2	Ann's device	-	-	17	Excellent	Sitting

4.5 Silmänpaineen mittaustulosten siirtäminen iCare HOME- tai iCare HOME2 -silmapainemittarista iCare EXPORT -sovelluksen avulla

Kun olet tehnyt mittauksia, suorita seuraavat toimet:

1. Yhdistä iCare HOME- tai HOME2-silmapainemittari tietokoneeseen USB-kaapelilla (HOME) tai langattomalla toiminnolla (HOME2, katso luku 4.5.1). iCare EXPORT käynnistyy, kun silmänpainemittari on yhdistetty.
2. Jos iCare-tunnuksiasi pyytävä ponnahdusikkuna avautuu, kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi tai terveydenhuollon tarjoajasi antama turvakoodi.
3. iCare EXPORT vahvistaa onnistuneen siirron **Measurements saved! (Mittaustulokset on tallennettu.)** -viestillä.

HUOMAA! iCare EXPORT siirtää mittaustulokset oletusarvoisesti iCare CLINIC -palveluun. iCare EXPORT ei lähetä tuloksia iCare CLINIC -palveluun, jos **Local mode (Paikallinen tila)** on valittu. Tila voidaan määrittää käyttöliittymän oikeassa alakulmassa olevan määrittämisvalikon kautta.



The screenshot shows the iCare EXPORT application window. At the top, there is a 'LOG IN' button. Below it, a notification states 'Measurements saved!' and 'All measurements were successfully posted to Topeye'. A table displays the following data:

Measurement time	IOP (Right eye)	Quality (Right eye)	IOP (Left eye)	Quality (Left eye)	PID
8/18/2022 1:38:22 PM	16.5	Excellent	*No eye selected		
11/17/2021 1:24:10 PM	12.5	Excellent			
11/17/2021 1:23:59 PM			11.9	Excellent	
11/17/2021 1:21:18 PM			15.0	Good	

Below the table, there are buttons for 'Save as csv', 'Open csv', 'Create Report', and 'Clear device memory'. A dropdown menu shows 'IC200 1834BM002' and '1834BM002 S/N' with a 'Copy' button.

iCare EXPORT näyttää siirretyt tulokset kronologisessa järjestyksessä. Tulokset voi tallentaa paikalliseen tiedostoon napsauttamalla **Save csv (Tallenna csv)** -painiketta. Tulokset liitetään valittuun csv-tiedostoon, jos käyttäjä on valinnut aiemmin luodun csv-tiedoston.

Jos paikallisesti tallennetuista tuloksista on tallennettu paikallinen kopio aiemmin, sitä voidaan käyttää napsauttamalla **Open csv (Avaa csv)** -painiketta ja valitsemalla sen tiedoston nimi, johon tulokset on alun perin tallennettu.

Tulokset voidaan tallentaa myös pdf-muotoon napsauttamalla **Create report (Luo raportti)** -painiketta. Täytä potilaan nimi ja henkilötunnus. Raportti sisältää mittausajan, silmänpaineen mittaustulokset ja mittauksen laadun sekä oikean että vasemman silmän osalta, mittausasennon ja silmänpainemittarin mallin.

Oletusarvoisesti kaikki iCare CLINIC- tai iCare CLOUD -tietokantaan siirretyt tulokset poistetaan iCare HOME-tai iCare HOME2 -silmapainemittarin muistista. Kirjautu iCare CLINIC -palveluun napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa **LOG IN (KIRJAUTUMINEN)** -linkkiä (jos terveydenalan ammattilainen on ottanut sen käyttöön), jos haluat tarkastella koko mittaustuloshistoriaasi.

Tuloksia ei siirretä iCare CLINIC- tai iCare CLOUD -tietokantaan, jos käyttämäsi iCare HOME- tai iCare HOME2 -silmapainemittari ei kuulu minkään terveydenhuollon ammattilaisen laitekantaan tai jos **Local mode (Paikallinen tila)** on otettu käyttöön iCare EXPORT -sovelluksesta. Näissä tapauksissa yhdistetyn iCare HOME- tai HOME2 -silmapainemittarin muistissa olevat tulokset voi poistaa napsauttamalla **Clear device memory (Tyhjennä laitteen muisti)** -painiketta ja vahvistamalla poisto.

iCare EXPORT -sovellusta voidaan käyttää myös korkeakontrastisessa tilassa. Aseta tietokoneesi korkeakontrastiseen tilaan tietokoneen asetuksista.

4.5.1 iCare HOME2-silmänpainemittarin yhdistäminen iCare EXPORT -sovellukseen Bluetoothin avulla

iCare HOME2-silmänpainemittari pystyy siirtämään mittaustulokset langattomasti iCare EXPORT -sovellukseen ja edelleen iCare CLINIC- tai iCare CLOUD -palveluun. Tulosten siirtämistä varten muodosta laitepari iCare HOME2 -silmanpainemittarin ja iCare EXPORT -sovelluksen välille. Muodosta laitepari seuraavasti

1. Varmista, että tietokoneen Bluetooth-yhteys on käytössä.
2. Aloita laiteparin muodostaminen HOME2-silmänpainemittarista laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.
3. Valitse silmänpainemittari iCare EXPORT -sovelluksen pudotusvalikosta silmänpainemittarissa olevan sarjanumeron perusteella. Yhdistämättömän laitteen sarjanumero näkyy harmaana ja kursivoituna.
4. Anna HOME2-silmänpainemittarissa näkyvä PIN-koodi.
5. Valittu HOME2-silmänpainemittari aktivoi yhteyden iCare EXPORT -sovellukseen.

HUOMAA! Jos iCare-tunnuksiasi pyytävä ponnahtusikkuna avautuu, kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi tai terveydenalan ammattilaiselta saamasi turvakoodi.

Kun silmänpainemittarista ja iCare EXPORT -sovelluksesta koostuva laitepari on muodostettu, silmänpainemittarin ja iCare EXPORT -sovelluksen välisen yhteyden voi katkaista valitsemalla jonkin muun silmänpainemittarin tai napsauttamalla valikosta Select BT Device (Valitse BT-laite). iCare EXPORT -sovelluksen kanssa laiteparin muodostavan silmänpainemittarin voi yhdistää iCare EXPORT -sovellukseen valitsemalla sen BT-laitevalikosta. Laitepariin kuuluvan silmänpainemittarin voi erottaa iCare EXPORT -sovelluksesta ja tietokoneesta napsauttamalla laitteen sarjanumeron oikealla puolella olevaa kuvaketta.

Silmänpainemittarin ja iCare EXPORT -sovelluksen välille täytyy muodostaa laitepari vain kerran. Kun HOME2-silmänpainemittari seuraavan kerran yhdistetään iCare EXPORT -sovellukseen, varmista, että silmänpainemittari on päällä ja laitteen Bluetooth-yhteys käytössä, ja valitse sitten laite pudotusvalikosta. Kun silmänpainemittarin Bluetooth-yhteys on käytössä ja silmänpainemittari muodostaa laiteparin iCare EXPORT -sovelluksen kanssa, silmänpainemittarin Bluetooth-valikossa näkyy nelimerkinen tunniste, kuten 825D. Tämä tunniste näkyy myös laiteparin muodostavassa iCare EXPORT -sovelluksessa alla olevassa kuvassa näkyvällä tavalla.

5 Ylläpito ja päivitykset

Icare Finland Oy huolehtii iCare CLINIC- ja iCare CLOUD -palveluiden päivityksistä automaattisesti. Tämä ei edellytä käyttäjältä mitään toimia.

iCare EXPORT -sovelluksen asennustiedoston uusimman version voi ladata iCare CLINIC -palvelun [Help \(Ohje\)](#) -valikon kautta.

Asiakasta kehoitetaan tarkistamaan iCare EXPORT -sovelluksen digitaalinen allekirjoitus aina ennen sen asentamista.

6 Käytön lopettaminen

iCare EXPORT -sovelluksen voi poistaa milloin tahansa tietoja menettämättä.

7 Toiminta virhetilanteissa

iCare EXPORT -sovelluksen Open csv (Avaa csv) -painike ei avaa tiedostoa odotetussa sovelluksessa. Tiedoston avaamiseen käytettävä sovellus määritetään tietokoneen käyttöjärjestelmän asetuksissa. MS Windows 10 -käyttöjärjestelmässä oletussovellukset määritetään kohdassa Asetukset / Järjestelmä / Oletussovellukset / Valitse oletussovellukset tiedostotyypin mukaan.





Olet siirtänyt silmänpainemittarin mittaustuloksen iCare CLINIC -palveluun, mutta sitä ei näy potilastiedoissa. Mahdollisia syitä ovat seuraavat:

- a) Terveydenalan ammattilainen ei ole rekisteröinyt iCare HOME(2) -laitetta käyttöösi. Ota yhteyttä terveydenalan ammattilaiseen ja varmista, että iCare HOME(2) -laitteesi on rekisteröity sinulle.
- b) Silmänpainemittarin kellonaika ei ole ollut oikea esimerkiksi siksi, että silmänpainemittari on ollut jonkin aikaa säilytyksessä ilman paristoja tai käyttäjän aikavyöhyke on vaihtunut. iCare CLINIC -ohjelmisto ei pystynyt näyttämään tuloksia oikein silmänpaineen mittaustiedoissa. Pyydä apua terveystalouden tuottajalta.

iCare HOME(2) -silmänpainemittarista ladatut tulokset eivät näy iCare CLINIC -palvelussa.

Varmista, että iCare EXPORT -sovellus on asetettu pilvitilaan. Yhdistä silmänpainemittari uudelleen iCare EXPORT -sovellukseen.

8 Symbolit

	Valmistaja
	CE-merkki
	Tuote on lääketieteellinen laite
	Katso käyttöoppaasta

9 Liite 1: Tekninen kuvaus

iCare CLINIC -palvelu tuotetaan internet-palvelimilta verkkoselaimen avulla. Tietoyhteydet salataan TCP-portin 443 TSL-salauksella. iCare CLINIC -palvelun asianmukainen käyttö edellyttää, että käyttäjän verkkoympäristön on sallittava internetin käyttö verkkoselaimilla. Jos internetin käyttö ei onnistu, mikään iCare CLINIC -palvelun toiminnoista ei ole käytettävissä.

iCare CLINIC näyttää silmänpaineen mittausravot yhden desimaalin tarkkuudella yksikössä mmHg. iCare HOME(2) -silmänpainemittarista ladatut silmänpaineen mittaustulokset näytetään aina mmHg:n kokonaislukuina.

Jotta iCare EXPORT -sovellusta voidaan käyttää asianmukaisesti tietokoneella, käyttäjän verkkoympäristön on sallittava iCare EXPORT -sovellukselle internetin käyttö TCP-portin 443 kautta. Jos internet-yhteyttä ei voida käyttää määritetyn portin kautta, tietojen lähetyksen iCare EXPORT -sovellukseen yhdistetystä laitteesta iCare CLINIC -palvelun tietokantaan ei onnistu.

iCare CLINIC -palvelun päivämäärämuoto määräytyy verkkoselaimen kieliasetusten mukaan. iCare EXPORT -sovelluksen käyttämä päivämäärämuoto määräytyy MS Windows -käyttöjärjestelmän asetusten mukaan.

iCare EXPORT lukee silmänpaineen mittaustulokset iCare-silmänpainemittarista USB-kaapelin tai Bluetooth-yhteyden välityksellä. Jos yhteys katkeaa, yritä muodostaa yhteys silmänpainemittariin uudelleen.

iCare EXPORT lähettää yhdistetystä silmänpainemittarista luetut mittaustulokset iCare CLINIC -palveluun. Jos tulosten siirto iCare CLINIC -palveluun ei onnistu verkkoyhteyden kautta, yritä myöhemmin uudelleen.

9.1 Suositellut tietoturvakäytännöt

On erittäin suositeltavaa pitää tietokoneen virustorjunta ajantasaisena. Suosittelemme myös asentamaan saatavana olevat tietoturvapäivitykset käytössä oleviin verkkoselaimiin ja tietokoneisiin.

iCare CLINIC- ja CLOUD -tuotteiden merkittävimmät riskit liittyvät siihen tallennettujen tietojen käytön hallintaan. Käytä aina vahvoja salasanoja. Älä jaa salasanaasi muiden kanssa. Kirjautu ulos iCare CLINICista tai CLOUDista käytön jälkeen. Ylläpidä haittaohjelmien ja virusten suojausta niissä tietokoneissa ja älypuhelimissa, joissa iCare CLINICia tai CLOUDia käytetään.

iCare EXPORTin suurin riski liittyy IOP-tulosten tallentamiseen paikalliseen tiedostoon. Käyttäjä varmistaa, että käytettyjen tietokoneiden käytönvalvonta on kunnossa.

10 Liite 2 Järjestelmä-, virhe- ja vikailmoitukset

10.1 iCare CLINIC

Viesti	Tilanne	Selitys ja mahdolliset toimenpiteet
Could not save file (Tiedostoa ei voitu tallentaa)	Kun mittaustuloksia tallennetaan tiedostoon.	Tuloksia ei voinut tallentaa valittuun tiedostoon. Tämä voi johtua järjestelmän tilapäisestä viasta.
Token cannot be empty (Tunnistetieto ei voi olla tyhjä)	Kun sähköpostiviestissä olevaa salasanan valintalinkkiä napsautetaan.	Verkkolinkki käyttäjätilin aktivointiin on virheellinen. Ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.
Activation token does not exist (Aktivointitunniste puuttuu)	Kun sähköpostiviestissä olevaa salasanan valintalinkkiä napsautetaan.	Verkkolinkki käyttäjätilin aktivointiin on virheellinen. Ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.
The activation token has expired (Aktivointitunniste on vanhentunut)	Kun sähköpostiviestissä olevaa salasanan valintalinkkiä napsautetaan.	Verkkolinkki käyttäjätilin aktivointiin on vanhentunut. Ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.
Password change token does not exist (Salasanan vaihdon tunniste puuttuu)	Kun sähköpostiviestissä olevaa salasanan vaihtolinkkiä napsautetaan.	Verkkolinkki salasanan palauttamiseen on virheellinen. Ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.
The password change token has expired (Salasanan vaihdon tunniste on vanhentunut)	Kun sähköpostiviestissä olevaa salasanan vaihtolinkkiä napsautetaan.	Verkkolinkki salasanan palauttamiseen on vanhentunut. Ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.
Current password does not match (Nykyinen salasana ei ole oikein)	Kun kirjoitat uuden salasanan.	Käyttäjän antama salasana on virheellinen.
Internal server error (Sisäinen palvelinvirhe)	Minkä tahansa tehtävän suorittamisen aikana.	Järjestelmässä oli tilapäinen vika. Yritä uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.

10.2 iCare EXPORT

Viesti	Tilanne	Selitys ja mahdolliset toimenpiteet
Unknown device! (Tuntematon laite!)	Kun liität silmänpainemittarin tietokoneeseen, johon on asennettu iCare EXPORT -sovellus.	Kytetty laite ei kuulu mihinkään iCare CLINIC -palvelua käyttävään organisaatioon, tai käytössä ei ole iCare EXPORT -sovelluksen viimeisin versio. Pyydä terveydenhuollon ammattilaista rekisteröimään silmänpainemittarisi iCare CLINIC -palveluun tai päivittämään iCare EXPORT -sovellus osoitteesta https://www.icare-world.com/export/ tai iCare CLINIC -palvelun kautta. Jos sinulla ei ole kontaktia terveydenhuollon ammattilaiseen, suorita iCare EXPORT paikallisessa tilassa.
Unable to post measurements into iCare CLINIC database! (Mittaustuloksia ei voitu lähettää iCare CLINIC -tietokantaan.)	Kun liität silmänpainemittarin tietokoneeseen, johon on asennettu iCare EXPORT -sovellus.	Vika voi johtua tilapäisestä virheestä palvelussa. Yritä myöhemmin uudelleen.
Error connecting device (Laitteen yhdistämisessä tapahtui virhe)	Kun liität silmänpainemittarin tietokoneeseen, johon on asennettu iCare EXPORT -sovellus.	Virhe yhdistettäessä laitetta iCare EXPORT -sovellukseen. Yhdistä laite uudelleen.
Unable to write measurements to file (Mittauksia ei voi kirjoittaa tiedostoon)	Kun iCare EXPORT -käyttöliittymässä näkyvät mittaustulokset tallennetaan tiedostoon.	Tuloksia ei voitu tallentaa tiedostoon. Tämä voi johtua valitun tiedoston ja kansion kirjoitusoikeuden puuttuvista käyttöoikeuksista tai tiedosto on avoinna toisessa sovelluksessa.
Device info is not valid. Please, contact technical service. (Laitteen tiedot eivät kelpaa. Ota yhteyttä tekniseen palveluun.)	Kun liität silmänpainemittarin tietokoneeseen, johon on asennettu iCare EXPORT -sovellus.	iCare EXPORT ei voinut lukea joitakin tietoja silmänpainemittarista. Ota yhteyttä terveystalouden tuottajaan.
BT adapter supporting Low Energy is not found. (Low Energyä tukevaa BT-sovitinta ei löydy.)	Kun yhdistät iCare HOME2 -silmänpainemittarin tietokoneeseen, johon on asennettu iCare EXPORT -sovellus.	Toiminto, jota yrität käyttää, edellyttää Bluetooth Low Energy -toimintoa, joka puuttuu käyttämästäsi tietokoneesta.
Mittaustuloksia ei voi lähettää iCare CLINICille vanhentuneen laitelisenssin vuoksi. Pyydä terveydenhuollon- tai palveluntarjoajaasi uusimaan lisenssi.	Kun lähetät mittaustuloksia iCare EXPORT- tai iCare PATIENT2 -sovelluksella.	Kytetyn silmänpainemittarin lisenssi on vanhentunut. Pyydä terveystalouden tuottajaa uusimaan lisenssi.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa

Puh. +358 0 9775 1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com

icare

Icare on Icare Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Centervue S.p.A., Icare Finland Oy ja Icare USA Inc. ovat osa Revenio Groupia ja edustavat iCare-brändiä. Kaikkia tässä esitteessä mainittuja tuotteita, palveluita tai tarjouksia ei ole hyväksytty tai tarjolla kaikilla markkina-alueilla, ja hyväksytyt merkinnät ja ohjeet voivat vaihdella maittain. Tuotetiedot voivat muuttua suunnittelussa ja toimituslaajuudessa tapahtuvien muutosten sekä tekniikan jatkuvan kehityksen seurauksena.