

Slovenščina

iCare HOME2

iCare HOME2
Kratki vodnik

Kratki vodnik

icare



Preden začnete uporabljati tonometer, preberite ta kratki vodnik in si oglejte videoposnetek z navodili za uporabo izdelka HOME2. Sledite navodilom po korakih.



Za varnostne informacije pred uporabo tonometra preberite 1. poglavje priročnika z navodili.

Če potrebujete pomoč pri uporabi tonometra iCare HOME2, se obrnite na zdravstvenega delavca.



POZOR! Preden začnete z merjenjem, posodobite čas tonometra na lokalni čas. To lahko naredite ročno v nastavitvah tonometra ali samodejno tako, da tonometer povežete z aplikacijo iCare PATIENT2 ali programsko opremo iCare EXPORT.

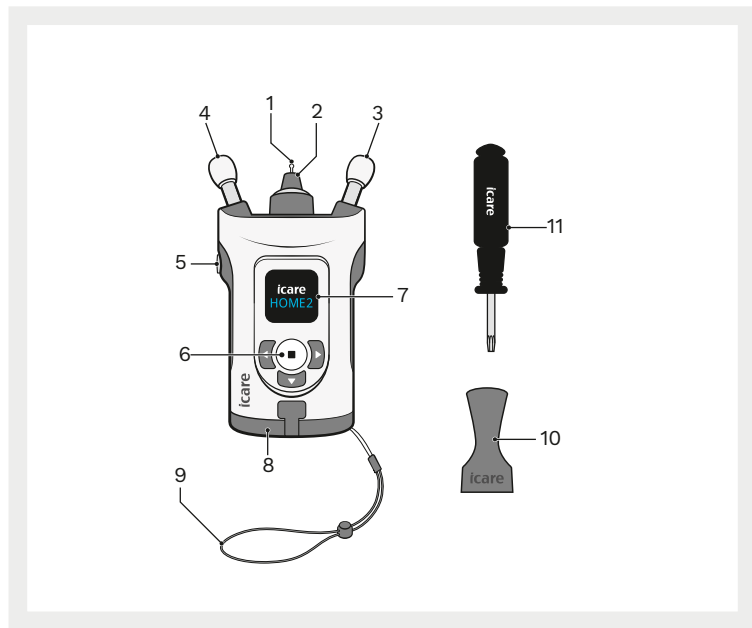


Korak


Stran

1	Vstavljanje baterij	5
2	Vstavljanje sonde	6
3	Vklop	7
4	Pravilen položaj za merjenje	8
5	Prilagoditev opornikov in postavitve tonometra	9
6	Merjenje očesnega tlaka	11
7	Merjenje očesnega tlaka v ležečem položaju	13
8	Odpravljanje težav	15
9	Izklop tonometra in zavrženje sonde	17


Deli tonometra



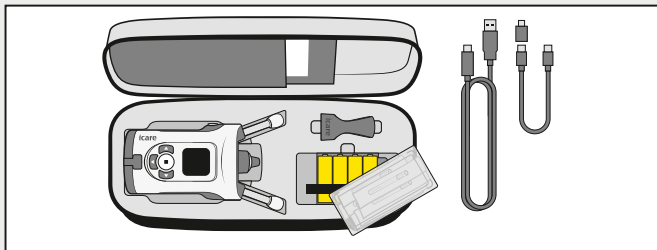
- 1 Sonda
- 2 Podnožje sonde
- 3 Opornik za brado
- 4 Opornik za čelo
- 5 Gumb za merjenje
- 6 Gumb za izbiranje
- 7 Zaslona
- 8 Pokrov baterij
- 9 Zapestni trak
- 10 Aplikator sonde
- 11 Izvijač Torx TX8



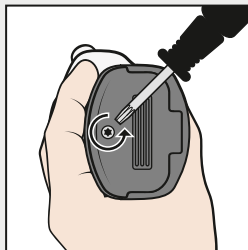
Baterije so v torbici tonometra pod škatlico s sondami.



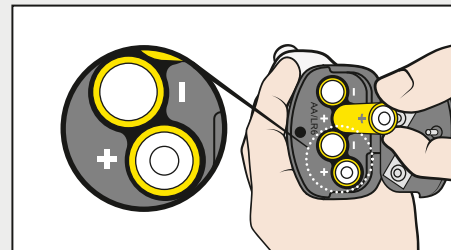
S pomočjo izvijača odprite pokrov za baterije.




Vstavite baterije in zaprite pokrov.

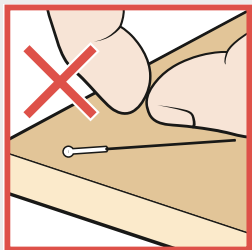

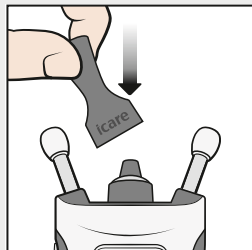
Sonde ne uporabljajte, če ste se z njo dotaknili roke, mize ali druge nesterilne površine.



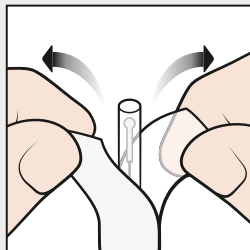Namestite aplikator sonde na podnožje sonde.




Odprite embalažo.

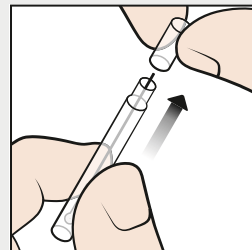


Odstranite pokrovček.



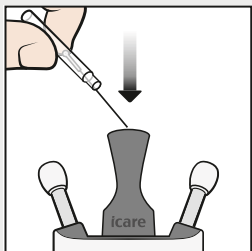
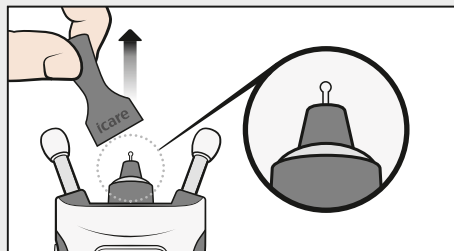
OPOZORILO! Da preprečite onesnaženje, hranite nerabljene sonde v škatlici. Ne dotikajte se gole sonde. Sonde ne uporabljajte, če se dotakne nesterilne površine, na primer mize ali tal.






Sondo iz vsebnika
spustite v aplikator.

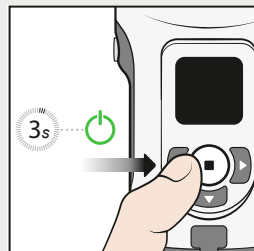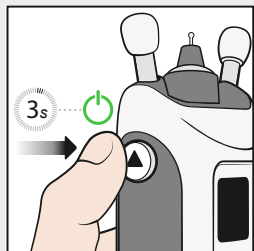


Odstranite aplikator sonde.




Pritisnite gumb  in ga pridržite, dokler ne zaslišite piska. Na zaslonu se prikaže besedilo »Start« (Začnite).

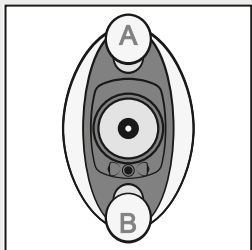
Pritisnete lahko tudi gumb  in ga pridržite, dokler ne zaslišite piska. Nato znova pritisnite gumb , da odprete način za merjenje. Na zaslonu se prikaže besedilo »Start« (Začnite).



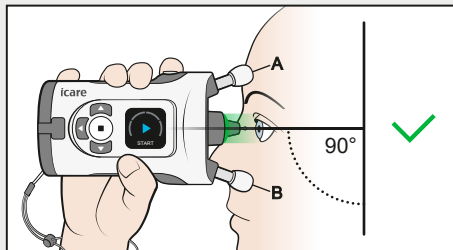Opornik za čelo A je na prislonjen na čelo, opornik za brado B pa na brado.




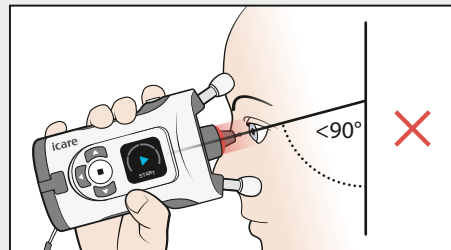Glejte naravnost in držite tonometer pod kotom 90 stopinj glede na obraz. Sonda je od očesa oddaljena približno 5 mm in je usmerjena pravokotno glede na sredino očesa.




Če na podnožju sonde vidite rdečo lučko, je tonometer nagnjen preveč navzdol. Izravnajte se in dvignite brado.

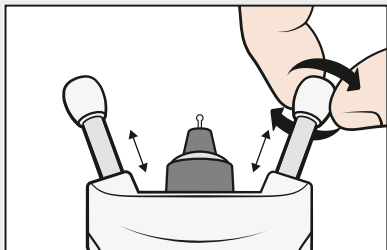
Postavitev tonometra je opisana v naslednjem poglavju.



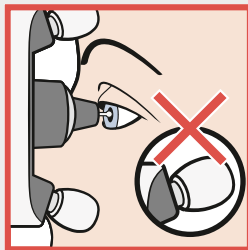Pred merjenjem prilagodite opornika za čelo in brado na ustrezno dolžino. Na začetku naj bosta opornika na največji dolžini.



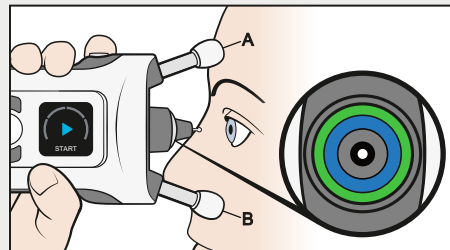
Opornika vsakič skrajšajte samo za dva klika, da se ne bi tonometer preveč približal očesu.




Tonometer pristonite na obraz in pogledjte v podnožje sonde. Sonda je postavljena pravokotno glede na sredino očesa, ko sta moder in zeleni krog na podnožju sonde simetrična.



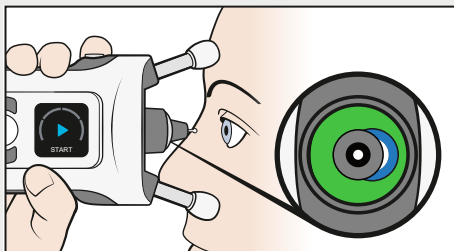
OPOZORILO! Očesa se lahko dotakne samo sonda. Očesa se ne sme dotakniti noben drug del tonometra. Pazite, da s tonometrom ne dregnete v oko.





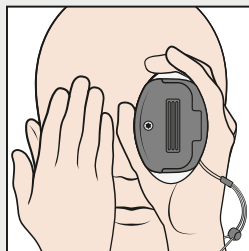
Če krogi niso simetrični, sonda ni postavljena pravokotno glede na sredino očesa. Popravite položaj tonometra.



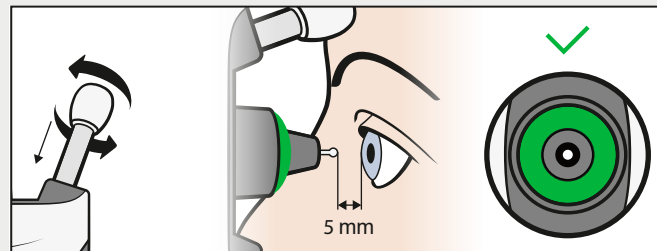Obe očesi imejte odprti. Če si pokrijete drugo oko, boste kroge videli bolj jasno.



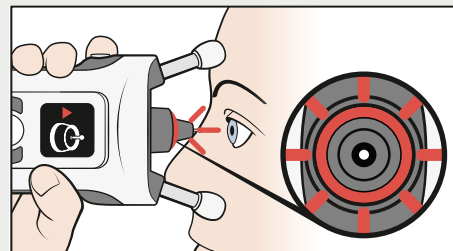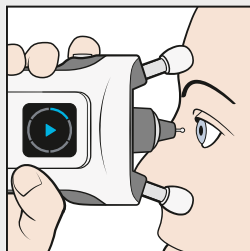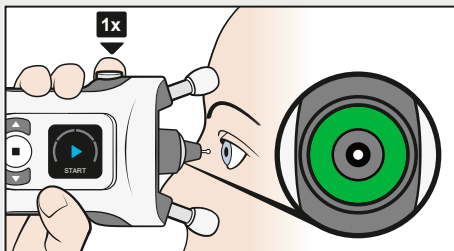
Opornika skrajšajte tako, da ju vsakokrat za dva klika zasukate v smeri urnega kazalca, dokler ne vidite samo zelenega simetričnega kroga. Tonometer je zdaj na ustrezni razdalji od očesa.




Merjenje začnete, ko vidite samo simetričen zelen krog. Enkrat pritisnite gumb za merjenje (▶). Sonda se narahlo dotakne očesa.


En pisk pomeni, da je meritev uspela. Nadaljujte z merjenjem, dokler ne zaslišite dolgega piska in lučka na podnožju sonde ugasne.

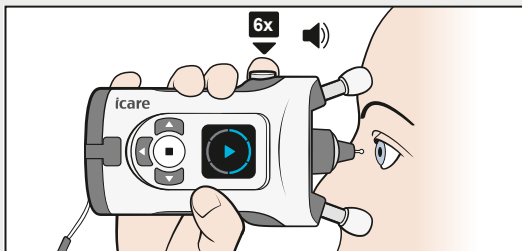Če podnožje sonde utripa rdeče in slišite več piskov, merjenje ni uspelo. Glejte poglavje **Odpravljanje težav** na 17. strani.





Meritveno zaporedje vključuje šest meritev.

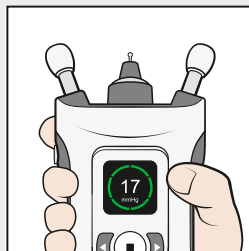
Namig: Meritveno zaporedje lahko izvedete tudi tako, da pritisnete gumb za merjenje  in ga pridržite, dokler ni opravljenih vseh šest meritev.



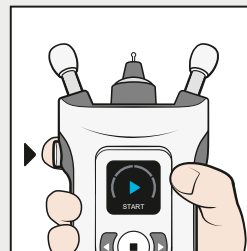
Ko je vseh šest meritev uspešno opravljenih, se zasliši daljši pisk, lučka na podnožju sonde ugasne, rezultat pa se prikaže na zaslonu.



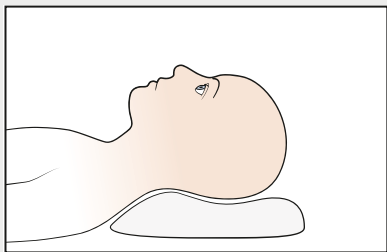
Enkrat pritisnete gumb za merjenje  in ponovite meritev še na drugem očesu.



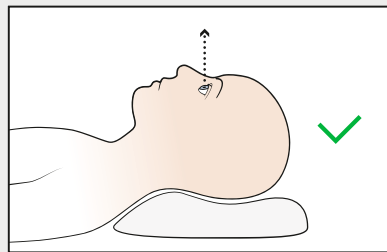
Preden začnete z merjenjem, se za trenutek ulezite.



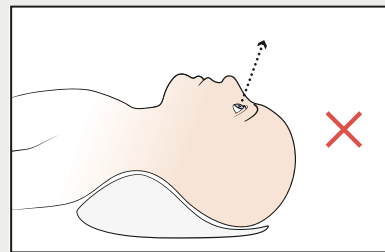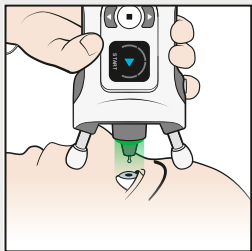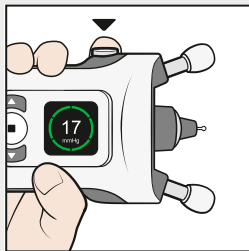
Lezite v udoben položaj na hrbtu in si pod vrat podložite blazino. Glejte naravnost naprej.




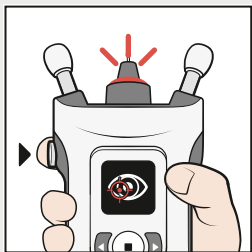
Glave ne nagibajte nazaj.



Tonometer postavite pod kotom 90 stopinj glede na obraz in izvedite merjenje z upoštevanjem predhodnih navodil.




















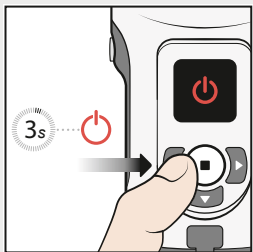
Ko je merjenje končano, enkrat pritisnite gumb za merjenje  in ponovite merjenje še na drugem očesu.




Če pride do napake, podnožje sonde utripa rdeče. Izvor napake lahko določite s pomočjo zaslona in piskov.

Glejte v zaslona, enkrat pritisnite gumb za merjenje (▶), opravite potrebne popravke in ponovite meritev.

Ikona	Besedilo na zaslonu	Piski	Težava	Rešitev
	TOO FAR (PREDALEČ)	3 dolgi 	Sonda je preveč oddaljena od očesa.	Z enim pritiskom gumba za merjenje  potrdite napako. Skrajšajte opornika za čelo in brado.
	TOO NEAR (PREBLIZU)	5 kratkih 	Sonda je preblizu očesu.	Z enim pritiskom gumba za merjenje  potrdite napako. Podaljšajte opornika za čelo in brado.
	INCORRECT ALIGNMENT (NAPAČNA POSTAVITEV)	2 kratka 	Sonda ni bila postavljena pravokotno glede na roženico ali pa je zadel veko ali trepalnice.	Z enim pritiskom gumba za merjenje  potrdite napako. Tonometer postavite tako, da bo sonda usmerjena pravokotno glede na sredino očesa. Oko imejte zadosti odprto.
	REPEAT (PONOVITE)	2 kratka 	Prišlo je do težave pri premikanju sonde.	Z enim pritiskom gumba za merjenje  potrdite napako. Ponovite meritev.
	DETECTION ERROR (NAPAKA ZAZNAVANJA)	2 kratka 	Tipalo ni uspelo prepoznati očesa, na katerem se izvaja meritev (desno ali levo).	Pritisnite gumb  , nato pa pritiskajte gumb  , dokler se na zaslonu ne prikaže pravilno oko (desno ali levo). Pritisnite gumb  ali gumb za vrnitev nazaj, da prekličete meritev.



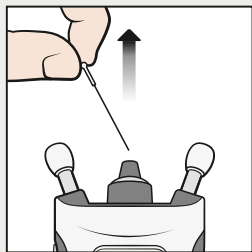
Pritisnite gumb za izbiranje (◻) in ga pridržite, dokler ne zaslišite treh piskov in se zaslon izklopi.



Odstranite sondo in jo pospravite v njen vsebnik.



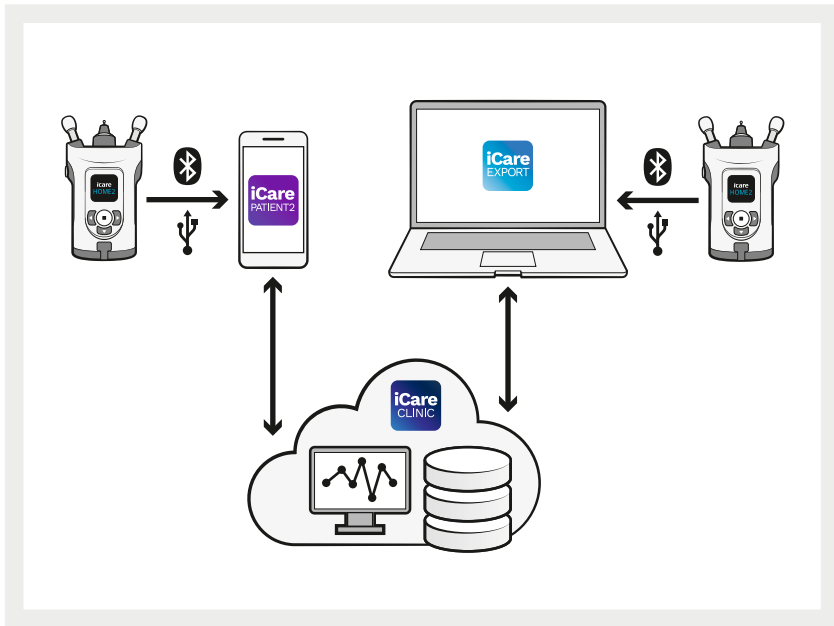Sondo in vsebnik zavržite v posodo za mešane odpadke.



Zdaj lahko z aplikacijo iCare PATIENT2 v mobilni napravi ali s programsko opremo iCare EXPORT v računalniku rezultate meritev prenesete v račun iCare CLINIC zdravstvenega delavca ali v osebni račun v storitvi iCare CLOUD.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finska

Tel. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



Več informacij
najdete v priročniku z navodili.



www.icare-world.com

icare

iCare je registrirana blagovna znamka družbe Icare Finland Oy. Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd in Centervue S.p.A. so del Revenio Group in predstavljajo znamko iCare.

Vsi izdelki, pripomočki, storitve ali ponudbe niso odobrene ali ponujene na vseh tržiščih, odobrene oznake in navodila pa se lahko med posameznimi državami razlikujejo. Specifikacije izdelka se lahko spremenijo glede zasnove in obsega dostave ter kot posledica nenehnega tehničnega razvoja.